

# HistoCore SPECTRA ST

## Infärgare



Bruksanvisning  
Svenska

**Beställningsnr.: 14 0512 80114 - Revision ZB**

Ska alltid förvaras i närheten av instrumentet.  
Ska läsas noggrant innan instrumentet tas i drift.

**CE**



Informationen, sifferuppgifterna, anvisningarna och värdebedömningarna i denna bruksanvisning speglar den aktuella vetenskapliga och tekniska nivå som vi har kommit fram till i våra grundliga efterforskningar.

Vi är inte skyldiga att regelbundet anpassa denna bruksanvisning efter nya tekniska rön och inte heller att löpande förse våra kunder med nya exemplar, uppdateringar osv. av denna bruksanvisning.

I den omfattning respektive gällande nationell lagstiftning tillåter detta ansvarar vi inte för felaktiga uppgifter, ritningar, tekniska illustrationer osv. som finns i denna bruksanvisning. I synnerhet tar vi inte något ansvar för någon ekonomisk förlust eller följdskada orsakad av eller relaterad till efterlevnad av uppgifter eller annan information i denna bruksanvisning.

Uppgifter, skisser, bilder och övrig information av innehållsmässig samt teknisk karaktär i denna bruksanvisning ska inte tolkas som garanterade egenskaper hos våra produkter.

I det avseendet är det enbart de avtalsenliga bestämmelserna mellan oss och våra kunder som gäller.

Leica förbehåller sig rätten till ändringar av den tekniska specifikationen samt produktionsprocessen utan föregående meddelande. Det är endast på detta sätt som en fortlöpande teknisk och produktionsteknisk förbättringsprocess är möjlig.

Denna dokumentation är upphovsrättsligt skyddad. All upphovsrätt tillhör Leica Biosystems Nussloch GmbH.

All reproduktion av text och bilder (helt eller delvis) genom tryck, kopiering, mikrofilm, webbkamera eller andra metoder – inklusive samtliga elektroniska system och medier – är endast tillåtet med uttryckligt, skriftligt medgivande på förhand från Leica Biosystems Nussloch GmbH.

Serienummer samt tillverkningsår framgår av typskylten på instrumentets baksida.



Leica Biosystems Nussloch GmbH  
Heidelberger Strasse 17 - 19  
69226 Nussloch  
Tyskland  
Tel.: +49 - (0) 6224 - 143 0  
Fax: +49 - (0) 6224 - 143 268  
Webb: [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)

# Innehållsförteckning

---

<b>1. Viktig information</b>	<b>7</b>
1.1 Symboler och deras betydelse	7
1.2 Instrumenttyp	12
1.3 Målgrupp	12
1.4 Avsett ändamål	13
1.5 Upphovsrätt – Instrumentets programvara	13
<b>2. Säkerhet</b>	<b>14</b>
2.1 Säkerhetsföreskrifter	14
2.2 Varning	15
2.3 Inbyggda säkerhetsfunktioner	19
<b>3. Instrumentets komponenter och specifikationer</b>	<b>20</b>
3.1 Standardleverans	20
3.2 Specifikationer	21
3.3 Allmän översikt – framsida	24
3.4 Allmän översikt – baksida	25
3.5 Allmän översikt – insida	26
<b>4. Installation och start</b>	<b>27</b>
4.1 Krav för uppställningsplatsen	27
4.2 Sköljvattenanslutning	28
4.2.1 Anslutning av samtliga 6 sköljvattenstationer	29
4.2.2 Kombinerad anslutning 4+2 sköljvattenstationer	30
4.2.3 Avloppsvattenanslutning	31
4.3 Elektrisk anslutning	31
4.3.1 Använda en extern avbrottsfri strömkälla (UPS)	32
4.4 Frånluftsanslutning	33
4.5 Starta och stänga av instrumentet	33
<b>5. Användning</b>	<b>35</b>
5.1 Användargränssnitt – Översikt	35
5.2 Element på statusskärmen	36
5.3 Processtatusvisning	37
5.4 Visning av facken	39
5.5 Huvudmeny – Översikt	40
5.5.1 Knappsatsen	41
5.6 Användarinställningar	43
5.7 Grundläggande inställningar	45
5.7.1 Språkinställningar	45
5.7.2 Regionala inställningar	46
5.7.3 Datum och tid	47
5.7.4 Meny för larm ljud – fel- och signalljud	47
5.7.5 Ugnsinställningar och streckkodsläsare	49
5.7.6 Rörelsehastighet – uppåt-/nedåtrörelse (agitering)	50
5.7.7 Datahantering	52
5.7.8 Serviceuttag	56
5.7.9 Händelsevisning	57
5.8 Reagenslista	59
5.8.1 Kopiera en reagens	62

5.8.2	Ändra RHS-data för en reagens .....	62
5.8.3	Processklasser .....	63
5.9	Infärgningsprogram .....	66
5.9.1	Tilldela ett infärgningsprogram en rackhandtagsfärg .....	67
5.9.2	Leica-infärgningsprogram (förinstallerade).....	68
5.9.3	Anpassa Leica-H&E-infärgningsprogram .....	69
5.9.4	Användardefinierade infärgningsprogram .....	71
5.9.5	Skapa eller kopiera ett nytt infärgningsprogram.....	71
5.9.6	Infoga eller kopiera ett nytt programsteg.....	74
5.9.7	Sortera om programsteg .....	76
5.9.8	Prioritera program för att skapa reagensuppställningen.....	77
5.9.9	Skapa reagensuppställningen.....	78
5.9.10	Fylla på reagenser efter det att reagensuppställningen har skapats .....	79
5.9.11	Anpassa en reagensuppställning .....	86
<b>6.</b>	<b>Daglig inställning av instrumentet .....</b>	<b>90</b>
6.1	Förbereda instrumentet för den dagliga inställningen.....	90
6.2	Daglig inställning av instrumentet.....	91
6.2.1	Förbereda och hantera reagenskyvetter.....	91
6.2.2	Ihopsättning av insatsen för särskilda infärgningar.....	93
6.2.3	Automatisk skanning av påfyllningsnivå.....	94
6.2.4	Streckkod (tillval).....	94
6.3	Reagenshanteringssystem (RHS).....	95
6.4	Stationsinformation .....	97
6.5	Förbereda racket.....	104
6.6	Infärgningsprocessen .....	107
6.6.1	Starta infärgningsprocessen.....	108
6.6.2	Övervaka infärgningsprocessen.....	111
6.6.3	Infärgningsprocess slutförd.....	111
6.6.4	Avbryta infärgningsprogrammet.....	113
6.6.5	Användning som arbetsstation .....	115
6.6.6	Slutföra den dagliga användningen .....	117
<b>7.</b>	<b>Rengöring och underhåll .....</b>	<b>118</b>
7.1	Viktig information om rengöring av instrumentet .....	118
7.2	Utvändiga ytor, lackerade ytor, instrumentets kåpa.....	118
7.3	TFT-pekskärm .....	118
7.4	Insida och avrinningskärl.....	119
7.5	Överföringsarmar .....	119
7.6	Räknarstation för objektglas .....	119
7.6.1	Streckkod (tillval).....	120
7.7	Laddnings- och utmatningsfack.....	120
7.8	Torr överföringsstation.....	121
7.9	Överföringsstation (tillval).....	121
7.10	Reagenskyvetter och sköljvattenkyvetter .....	122
7.11	Rack och handtag .....	124
7.12	Vattenavlopp .....	125
7.13	Vattenavloppsslang .....	125
7.14	Byta filterpatronen till vatteninloppsfiltert.....	125
7.15	Byta det aktiva kolfiltret.....	126
7.16	Rengöra ugnarna.....	127
7.17	Ugnens luftfilter .....	129

## Innehållsförteckning

---

7.18	Intervall för underhåll och rengöring.....	130
7.18.1	Dagligt underhåll och rengöring .....	130
7.18.2	Underhåll och rengöring efter behov.....	131
7.18.3	Rengöring och underhåll varje vecka .....	131
7.18.4	Rengöring och underhåll varje månad.....	131
7.18.5	Rengöring och underhåll var tredje månad.....	131
7.18.6	Rengöring och underhåll varje år.....	131
<b>8.</b>	<b>Fel och felsökning .....</b>	<b>132</b>
8.1	Åtgärder för fel på instrumentet.....	132
8.2	Strömavbrott och fel på instrumentet.....	135
8.2.1	Rutin vid strömavbrott.....	138
8.2.2	Återuppta infärgningsprocessen efter ett strömavbrott.....	140
8.2.3	Avbryta alla infärgningsprocesser vid ett strömavbrott.....	141
8.2.4	Avlägsna ett rack från griparmekanismen.....	143
8.2.5	Borttagning av rack från överföringsstationen .....	145
8.3	Byta ut huvudsäkringar.....	146
8.4	Stopp i vattenavloppet.....	147
8.5	Fel vid fastsättning, avlägsnande eller transport av rack .....	153
<b>9.</b>	<b>Instrumentets komponenter och specifikationer .....</b>	<b>155</b>
9.1	Valbara komponenter till instrumentet .....	155
9.2	Valbara tillbehör .....	155
<b>10.</b>	<b>Garanti och service.....</b>	<b>165</b>
<b>11.</b>	<b>Urdrifttagning och kassering .....</b>	<b>166</b>
<b>12.</b>	<b>Saneringsbekräftelse .....</b>	<b>167</b>
<b>A1.</b>	<b>Bilaga 1 – Godkända reagenser .....</b>	<b>168</b>

## 1. Viktig information

### 1.1 Symboler och deras betydelse



#### Varning

Om nedanstående information, i synnerhet med avseende på transport och hantering av produkter, samt anvisningarna om försiktig hantering av instrumentet inte beaktas, tar Leica Biosystems Nussloch GmbH inget ansvar för eventuella följdskador.

**Symbol:**



**Symbolens rubrik:**

Riskvarning

**Beskrivning:**

Varningar visas i vita fält med orange rubrikfält. Varningar markeras med en varningstriangel.

**Symbol:**



**Symbolens rubrik:**

OBS!

**Beskrivning:**

Information som är viktig för användaren visas i vita fält med blå rubrikfält. Informationen markeras med en informationssymbol.

**Symbol:**

→ "Bild 7 - 1"

**Symbolens rubrik:**

Objektsnummer

**Beskrivning:**

Objektsnummer som numrerar bilder. Siffror i rött avser objektsnummer i bilder.

**Symbol:**

Arbetsledare

**Symbolens rubrik:**

Funktionsknapp

**Beskrivning:**

Programvarubeteckningar som måste visas i inmatningsfönstret visas med fet, grå text.

**Symbol:**

Spara

**Symbolens rubrik:**

Funktionsknapp

**Beskrivning:**

Programvarusymboler som man måste trycka på i inmatningsfönstret visas som fet, grå och understruken text.

**Symbol:**

Strömbrytare

**Symbolens rubrik:**

Knappar på instrumentet

**Beskrivning:**

Knappar på instrumentet, som användaren ska trycka på i olika situationer, visas som fet, grå text.

**Symbol:**



**Symbolens rubrik:**

Obs!

**Beskrivning:**

Anger att användaren måste läsa bruksanvisningen, särskilt säkerhetsinformation som varningar och försiktighetsåtgärder som av olika skäl inte kan anges på den medicintekniska produkten.

**Symbol:**



**Symbolens rubrik:**

Varning, het yta

**Beskrivning:**

Denna varningssymbol indikerar ytor på instrumentet som blir heta när instrumentet är i drift. Direktkontakt ska undvikas eftersom det finns risk för brännskador.

**Symbol:**



**Symbolens rubrik:**

Tillverkare

**Beskrivning:**

Visar den medicintekniska produktens tillverkare.

Symbol: 	Symbolens rubrik: Beskrivning:	Tillverkningsdatum Visar datumet då den medicintekniska produkten tillverkades.
Symbol: 	Symbolens rubrik: Beskrivning:	CE-märkning CE-märkningen är tillverkarens försäkran om att den medicintekniska produkten uppfyller kraven i de tillämpliga EG-direktiven och EG-förordningarna.
Symbol: 	Symbolens rubrik: Beskrivning:	UKCA-märkning UKCA-märkningen (UK Conformity Assessed) är en ny brittisk produktmärkning som används för varor som marknadsförs i Storbritannien (England, Wales och Skottland). Den omfattar de flesta varor som tidigare krävde CE-märkning.
Symbol: 	Symbolens rubrik: Beskrivning:	CSA-förklaring (Kanada/USA) CSA-märket visas med de omgivande indikatorbokstäverna "C" och "US" för Kanada respektive USA (som indikerar att produkterna har tillverkats enligt kraven från både kanadensiska och amerikanska standarder) eller med enbart "US" för endast USA, eller utan någon indikator för endast Kanada.
Symbol: 	Symbolens rubrik: Beskrivning:	In vitro-diagnostik Indikerar en medicinteknisk produkt som är avsedd att användas för in vitro-diagnostik.
Symbol: 	Symbolens rubrik: Beskrivning:	China RoHS Miljöskyddssymbol för China RoHS-direktivet. Talet i symbolen anger produktens "miljösäkra användningstid" i år. Symbolen används när ett ämne som är begränsat i Kina används över den maximalt tillåtna gränsen.
Symbol: 	Symbolens rubrik: Beskrivning:	WEEE-symbol WEEE-symbolen anger att el- och elektronikavfall ska sorteras separat och är en överstruken avfallstunna på hjul (§ 7 ElektroG).
Symbol: 	Symbolens rubrik:	Växelström
Symbol: 	Symbolens rubrik: Beskrivning:	Artikelnummer Anger tillverkarens katalognummer så att den medicinska enheten kan identifieras.
Symbol: 	Symbolens rubrik: Beskrivning:	Serienummer Anger tillverkarens serienummer så att en viss medicinteknisk produkt kan identifieras.



Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Se bruksanvisningen

Anger att användaren behöver läsa i bruksanvisningen.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

UDI

Anger en bärare som innehåller information om unik enhetsidentifiering (UDI). Det är valfritt att använda denna symbol, men den kan användas när flera databärare finns på etiketten. Om symbolen används, ska den placeras intill bäraren för unik enhetsidentifiering (UDI). OBS! Används för att identifiera vilken information som är associerad med unik enhetsidentifiering (UDI).

(01)04049188191953

Symbol:



Leica Microsystems (UK) Limited  
Larch House, Woodlands Business Park, Milton Keynes  
England, United Kingdom, MK146FG

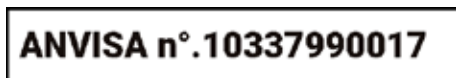
Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Ansvarig person mot Storbritannien

Personen som har ansvar mot Storbritannien agerar åt en tillverkare utanför Storbritannien och ser till att utföra specifika uppdrag som rör tillverkarens plikter.  
ANVISA Identifikationsnummer

Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Nationella byrån för hälsoövervakning (Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA) ansvarar för registreringen av medicintekniska produkter i Brasilien och tilldelar varje produkt ett unikt 11-siffrigt identifikationsnummer i enlighet med särskilda bestämmelser.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

TILL (Strömförsörjning)

Strömförsörjningen kopplas till med hjälp av strömbrytaren.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

FRÅN (Strömförsörjning)

Med strömbrytaren bryts strömförsörjningen.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

PE-terminal

Symbol:





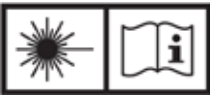

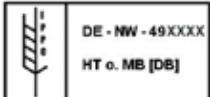



Symbolens rubrik:

Beskrivning:

Varning, risk för elektrisk stöt

Denna varningssymbol indikerar ytor eller områden på instrumentet som står under elektrisk spänning när instrumentet är i drift. Direktkontakt ska därför undvikas.

<b>Symbol:</b>	<b>Symbolens rubrik:</b>	Varning: fara för krosskador
		
<b>Symbol:</b>	<b>Symbolens rubrik:</b>	Rör ej
	<b>Beskrivning:</b>	Rör ej delar av enheten som är märkta med denna symbol.
<b>Symbol:</b>	<b>Symbolens rubrik:</b>	Brandfara
	<b>Beskrivning:</b>	Brandfarliga reagenser, lösningsmedel och rengöringsmedel är märkta med den här symbolen.
<b>Symbol:</b>	<b>Symbolens rubrik:</b>	Varning, biologiska risker
	<b>Beskrivning:</b>	Instrumentdelar nära denna symbol kan vara kontaminerade med ämnen som utgör ett hot mot hälsan. Undvik direktkontakt eller använd lämpliga skyddskläder.
<b>Symbol:</b>	<b>Symbolens rubrik:</b>	Observera varningen för laserstrålar och se Bruksanvisningen
	<b>Beskrivning:</b>	Produkten använder en laserkälla av klass 1. Bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna för hantering av lasrar måste följas.
<b>Symbol:</b>	<b>Symbolens rubrik:</b>	Använd inte någon form av alkohol vid rengöring och följ instruktionerna i bruksanvisningen
	<b>Beskrivning:</b>	Indikerar att användningen av alkohol eller rengöringsmedel innehållande alkohol vid rengöring av artikeln/delen inte är tillåten. Artikeln/delen blir förstörd om alkohol eller rengöringsmedel innehållande alkohol används vid rengöring.
<b>Symbol:</b>	<b>Symbolens rubrik:</b>	IPPC-symbol
	<b>Beskrivning:</b>	IPPC-symbolen innehåller: IPPC-symbol <ul style="list-style-type: none"> <li>• Landskod enligt ISO 3166, t.ex. DE för Tyskland</li> <li>• Regionkod, t.ex. NW för Nordrhein-Westfalen</li> <li>• Registreringsnummer, ett unikt nummer som börjar med 49</li> <li>• Behandlingsmetod, t.ex. HT (värmebehandling)</li> </ul>
<b>Symbol:</b>	<b>Symbolens rubrik:</b>	Ursprungsland
	<b>Beskrivning:</b>	Rutan "Country of Origin" anger det land där den slutgiltiga utformningen av produkten har utförts.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Ömtåligt, hanteras varsamt

Beskrivning:

Betecknar en medicinteknisk produkt som vid oförsiktig hantering kan gå sönder eller skadas.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Förvaras torrt

Beskrivning:

Betecknar en medicinteknisk produkt som ska skyddas mot fukt.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Begränsad stapling

Beskrivning:

Det största antal identiska kollin som får staplas på varandra; "2" anger tillåtet antal kollin.

Symbol:



Symbolens rubrik:

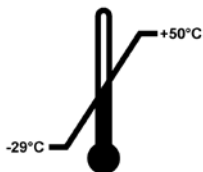
Denna sida upp

Beskrivning:

Visar korrekt upprätt placering av förpackningen.

Symbol:

Transport temperature range:



Symbolens rubrik:

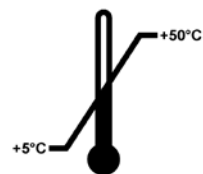
Temperaturbegränsning vid transport

Beskrivning:

De angivna temperaturgränsvärdena vid transport är de som den medicintekniska produkten kan utsättas för utan risk.

Symbol:

Storage temperature range:



Symbolens rubrik:

Temperaturbegränsning vid förvaring

Beskrivning:

De angivna temperaturgränsvärdena vid förvaring är sådana som den medicintekniska produkten kan utsättas för utan risk.

Symbol:



Symbolens rubrik:

Luftfuktighetsgräns vid transport och förvaring

Beskrivning:

Betecknar den luftfuktighet som den medicintekniska produkten kan utsättas för utan risk vid transport och förvaring.

**Utseende:****Beteckning:**

Lutningsindikator

**Beskrivning:**

Indikator för att kontrollera att sändningen har transporterats och förvarats upprätt i enlighet med kraven. Från och med en lutning på 60° rinner blå kvartssand in i det pilformade visningsfältet och fastnar där. En eventuellt felaktig hantering av den lutningskänsliga produkten syns genast och kan bevisas utan tvivel.

**Obs!**

- Vid leverans av instrumentet måste mottagaren kontrollera att lutningsindikatorn är intakt. Om alla indikatorer har utlösts måste den ansvariga Leica-representanten underrättas.
- Med bruksanvisningen följer en inbunden broschyr för "RFID-registrering". Broschyren innehåller landsspecifik information gällande betydelsen av RFID-symboler och registreringsnummer som finns på förpackningen eller på typskylten på HistoCore SPECTRA ST.

## 1.2 Instrumenttyp

Alla uppgifter i denna bruksanvisning gäller enbart för den instrumenttyp som anges på titelsidan. En typskylt som indikerar instrumentets serienummer finns på baksidan av instrumentet. Dessutom finns en typskylt med kinesisk och japansk registreringsinformation på den bakre panelen på instrumentet.

## 1.3 Målgrupp

- HistoCore SPECTRA ST får endast användas av auktoriserad personal som har omfattande utbildning i att använda reagenser i ett laboratorium och tillämpa dessa histologiskt.
- Arbetet med instrumentet får inte påbörjas förrän användaren har läst denna bruksanvisning noggrant och är förtrogen med instrumentets samtliga tekniska detaljer. Instrumentet är endast avsett att användas i professionellt syfte.

#### 1.4 Avsett ändamål

HistoCore SPECTRA ST är en automatiserad infärgare som är särskilt utformad för att färga in preparat med mänsklig vävnad för att kontrastera cellbildningar och deras komponenter, och används för histologisk medicinsk diagnostisering av en patolog, t.ex. för cancerdiagnoser.

HistoCore SPECTRA ST är utformad för in vitro-diagnostikapplikationer.



#### Varning

All avvikande användning av instrumentet klassas som ej ändamålsenlig. Felaktig användning kan leda till olyckor, personskador och/eller skador på instrumentet eller tillbehör. Till ändamålsenlig användning räknas att följa samtliga anvisningar i denna bruksanvisning, instruktionerna för inspektions- och underhållsarbeten samt fortlöpande kontroll av reagensernas hållbarhet och kvalitet. HistoCore SPECTRA ST utför de specifika infärgningsstegen automatiskt. Tillverkaren kan därför inte lämna någon garanti för infärgningsresultaten om infärgningssteg och program matas in på ett felaktigt sätt. Därför ansvarar slutanvändaren själv för egenhändigt skapade och applicerade reagenser eller programinmatningar.

#### 1.5 Upphovsrätt – Instrumentets programvara

Programvaran som är installerad på HistoCore SPECTRA ST är föremål för följande licensavtal:

1. GNU General Public License Version 2.0, 3.0
2. GNU Lesser General Public License 2.1
3. ytterligare mjukvara är inte licensierad under GPL/LGPL

De fullständiga licensavtalen för den första och andra licensen finns i den medföljande språk-CD:n (→ [Sida 20 – 3.1 Standardleverans](#)) i mappen **Mjukvarulicenser**.

Leica Biosystems tillhandahåller en komplett, maskinläsbar kopia av källkoden till alla tredjeparter i enlighet med villkoren i GPL/LGPL gällande källkoden eller andra tillämpliga licenser. Kontakta oss på [www.leicabiosystems.com](http://www.leicabiosystems.com) och använd respektive kontaktformulär.

### 2. Säkerhet

#### 2.1 Säkerhetsföreskrifter



##### Varning

- Säkerhetsanvisningarna och varningsinformationen i detta kapitel måste följas. De ska läsas även om du redan är förtrogen med hanteringen av andra Leica-instrument.
- Skyddsanordningarna på instrument och tillbehör får varken avlägsnas eller modifieras.
- Instrumentet får endast öppnas och repareras av servicetekniker som är auktoriserade av Leica.

Kvarstående risker:

- Instrumentet är tillverkat enligt den senaste tekniken och vedertagna säkerhetstekniska normer och regler. Felaktig användning eller hantering kan medföra livsfara för användaren eller tredje part, eller leda till att instrumentet eller annan materiell egendom skadas.
- Instrumentet får endast användas på ändamålsenligt sätt och om alla säkerhetsanordningar är i ett felfritt skick.
- Skulle det uppstå störningar som kan försämra säkerheten ska instrumentet genast tas ur drift och ansvarig Leica-servicetekniker informeras.
- Endast originalreservdelar och godkända Leica-originaltillbehör får användas.
- Elektromagnetisk kompatibilitet, störsändningar och störtållighet samt kraven enligt IEC 61326-2-6 gäller. Kraven enligt IEC 61010-1, IEC 61010-2-101, IEC 62366 och ISO 14971 med avseende på säkerhetsinformation gäller.

Denna bruksanvisning innehåller viktiga anvisningar och information för instrumentets driftsäkerhet och underhåll.

Den utgör en viktig del av instrumentet och ska läsas noggrant innan instrumentet tas i drift och används, och ska sedan förvaras i anslutning till instrumentet.



##### Obs!

Bruksanvisningen ska kompletteras med anvisningar om detta krävs enligt gällande nationella föreskrifter om olycksförebyggande åtgärder och miljöskydd i det land där instrumentet används.

Instrumentets EG-försäkran om överensstämmelse och UKCA-försäkran om överensstämmelse finns online under:

<http://www.LeicaBiosystems.com>

Detta instrument är tillverkat och kontrollerat enligt säkerhetsbestämmelserna för elektrisk mät-, styr-, regler- och laboratorieutrustning. För att bevara instrumentets skick och säkerställa säker drift ska användaren följa samtliga anvisningar och varningar i denna bruksanvisning.

**Varning**

- Förekomst av skadlig mjukvara i systemet kan leda till att systemet uppför sig okontrollerat. Instrumentets funktion enligt specifikationen kan i så fall inte längre garanteras! Om användaren misstänker att skadlig programvara finns i systemet ska den lokala IT-avdelningen genast informeras.
- Det är mycket viktigt att alltid se till att all data som överförs till instrumentet är fri från virus. Det ingår inga antivirusprogram i leveransen.
- Instrumentet är endast avsett att integreras i nätverk som skyddas av en brandvägg. Leica tar inget ansvar för fel som uppstår till följd av integrering i ett oskyddat nätverk.
- Anslutning av en USB-enhet (mus, tangentbord osv.) får ENDAST utföras av tekniker som är utbildade och godkända av Leica.

För att skydda preparaten indikerar HistoCore SPECTRA ST när användaren behöver ingripa. Detta görs med hjälp av skärmmeddelanden och ljudsignaler. Därmed måste användaren befinna sig inom höravstånd under användning av HistoCore SPECTRA ST.

**Varning**

Produkten använder en laserkälla av klass 1.

Obs! Laserstrålning! Titta inte in i strålen! Det kan ge skador på ögats näthinna.

**Varning**

LASERSTRÅLNING – TITTA INTE  
IN I STRÅLEN  
IEC 60825-1 2014  
P<390 µW, λ = 630 till 670 nm  
PWM-frekvens: 1 kHz  
Arbetscykel: 16.4 %  
Laserprodukt klass 1

**2.2 Varning**

Säkerhetsanordningarna som tillverkaren har monterat på detta instrument utgör endast ett grundläggande olyckskydd. Huvudansvaret för ett olycksfritt arbete ligger framför allt hos företaget där instrumentet används samt hos de utsedda personer som använder, underhåller eller reparerar instrumentet.

För att instrumentets felfria funktion ska kunna garanteras ska följande anvisningar och varningar följas.

Observera att det kan förekomma elektrostatiska urladdningar vid direkt eller indirekt kontakt med HistoCore SPECTRA ST.

**Varning**

En markering med en varningstriangel på instrumentets ytor på instrumentet betyder att användningsinstruktionerna (i enlighet med denna bruksanvisning) måste följas när den märkta delen används eller byts ut. Felaktig användning kan leda till olyckor, personskador och/eller skador på instrumentet/tillbehören eller förstörda, obrukbara prover.



### Varning

Vissa ytor på instrumentet blir mycket varma även vid korrekt användning. De är försedda med denna varningssymbol. Kontakt med dessa ytor utan lämpliga skyddsåtgärder kan leda till brännskador.

### Varningsinformation – transport och installation



### Varning

- Instrumentet får endast transporteras upprätt.
- Instrumentets tomvikt är 165 kg. Därför krävs det fyra kvalificerade personer för att lyfta eller bära instrumentet.
- Använd handskar med bra grepp när instrumentet ska lyftas.
- Leica rekommenderar att transport, uppställning och eventuell flytt av instrumentet överläts åt ett transportföretag.
- Spara instrumentets emballage.
- Ställ instrumentet på ett stabilt laboratoriebord med tillräcklig lastkapacitet och justera det så att det står vågrätt.
- Undvik att utsätta instrumentet för direkt solljus.
- Instrumentet får endast anslutas till ett jordat eluttag. Skyddsverkan får inte upphävas genom användning av en förlängningsladd utan jordningskabel.
- Vid extrema temperaturskillnader mellan förvarings- och uppställningsplats och samtidig hög luftfuktighet kan kondens bildas inuti instrumentet. Vänta i så fall minst två timmar innan instrumentet startas.
- Installationen av instrumentet på användningsplatsen får endast ske med och under anvisning av personal utbildad av Leica. Detta gäller även för eventuell transport till en ny användningsplats. Det rekommenderas att personal utbildad av Leica tar instrumentet i drift igen.
- För att säkerställa att instrumentet fungerar korrekt, ska det sättas upp med ett avstånd på minst 100 mm på alla sidor från väggar och möbler.
- Enligt gällande nationella regler och föreskrifter kan användarföretaget vara skyldigt att permanent säkra den allmänna vattenförsörjningen mot att förorenas av returvatten från installationen. I Europa sker valet av säkringsarmatur för dricksvatteninstallationen som ska anslutas enligt föreskrifterna i DIN EN 1717:2011-08 (informationen aktuell augusti 2013).



**Varningsinformation – hantering av reagenser****Varning**

- Var försiktig när lösningsmedel hanteras.
- Bär alltid lämplig laboratoriekälsel samt handskar och skyddsglasögon vid hantering av kemikalierna som används i detta instrument.
- Uppställningsplatsen ska ha god ventilation. Dessutom rekommenderar vi starkt att man ansluter instrumentet till ett externt ventilationssystem. Kemikalierna som används i HistoCore SPECTRA ST är brandfarliga och kan utgöra en hälsofara.
- Drift i utrymmen med explosionsrisk är inte tillåten.
- Användaren är ansvarig för att övervaka utgångsdatumerna på andra reagenser som används tillsammans med HistoCore SPECTRA ST (t.ex. xylen i reagenskyvetten). Reagenser som utgått måste bytas ut direkt och kasseras. När förbrukade eller utgångna reagenser kasseras ska gällande lokala bestämmelser samt avfallshanteringsreglerna på företaget/institutionen där instrumentet används alltid följas.
- När förbrukade reagenser kasseras ska gällande lokala bestämmelser samt avfallshanteringsreglerna på företaget/institutionen där instrumentet används alltid följas.
- Reagenskyvetter ska alltid fyllas på utanför instrumentet och i enlighet med säkerhetsanvisningarna.

**Varningsinformation – arbete med instrumentet****Varning**

- Instrumentet får endast användas av utbildad laboratoriepersonal. Den får endast användas i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning. Vid arbete med instrumentet bör antistatisk skyddsklädsel (t.ex. av naturfiber) användas.
- När du arbetar med instrumentet ska du bära lämpliga skyddskläder (labbrock, skyddsglasögon och handskar) för att skydda dig mot reagenser och potentiellt smittsamma mikrobiologiska föroreningar.
- I nödfall ska **strömbrytaren** stängas av och strömkontakten (krets brytare enligt EN ISO 61010-1) dras ur.
- Vid allvarliga instrumentstörningar måste varnings- och felmeddelandena på bildskärmen följas. Prover som befinner sig i en process måste avlägsnas från instrumentet omedelbart. Användaren ansvarar för att den fortsatta bearbetningen av proverna sker på ett säkert sätt.
- Vid arbete med öppen eld (t.ex. bunsenbrännare) i närheten av instrumentet föreligger brandrisk på grund av ångor från lösningsmedel. Därför ska ett säkerhetsavstånd på minst två meter hållas.
- Du måste vara helt säker på att instrumentet används med ett aktivt kolfilter. Dessutom rekommenderar vi starkt att man ansluter instrumentet till ett externt ventilationssystem eftersom användningen av instrumentet kan leda till att det bildas lösningsmedelsångor som både är brandfarliga och skadliga för hälsan, även när instrumentet används korrekt.
- Användning av Power over Ethernet (PoE) är inte tillåtet vid användning av RJ45-uttaget (→ "Bild 2-1") som finns på instrumentets baksida.
- USB 2.0-uttaget (→ "Bild 1-7") på instrumentets framsida accepterar endast passiva enheter (utan anslutning till strömtillförsel, t.ex. USB-pinnar).

**Obs!**

För att hantera avgaser från instrumentet rekommenderar Leica att en lufttillförsel på 50 m<sup>3</sup>/h och en 8x luftomsättning (25 m<sup>3</sup>/m<sup>2</sup>/h) används i labbet.



### Varning

- Om överföringsarmen/-armarna måste lyftas och förflyttas får man inte vidröra sensorn/antennen eller använda detta område för att förflytta överföringsarmen/-armarna (→ "Bild 117-6"). Använd i stället griparens metall-del (→ "Bild 117-1") och lyft den manuellt. Förflytta sedan överföringsarmen/-armarna till önskad position.
- Vid arbeten rakt ovanför reagenskvytter som innehåller lösningsmedel måste personlig skyddsutrustning i form av andningsskydd användas.
- Om kåpan öppnas samtidigt som en eller flera infärgningsprogram är aktiva fördröjs respektive bearbetningssteg, eftersom det inte sker några överföringsrörelser under den tiden. Detta kan leda till förändringar av infärgningskvaliteten.
- Låt alltid kåpan vara stängd under tiden infärgningsprogram är aktiva. Leicas garantiansvar gäller inte kvalitetsförsämringar av infärgningsprogram som beror på att kåpan har öppnats under pågående infärgningsprocess.
- **VAR FÖRSIKTIG** när du stänger kåpan: Klämrisk! Sträck dig inte in i kåpans rörelseområde.
- Det får inte läcka in någon vätska bakom locken eller i mellanrummen medan instrumentet är i drift eller rengörs. Detta gäller även överföringsarmarna.
- **VAR FÖRSIKTIG** med program som börjar med ett ugnssteg! Laddningsstationen från vilken överföringsarmen tar ut objektglaset ur får då **INTE** innehålla någon lättantändlig reagens (t.ex. xylén, xylensubstitut eller alkoholer). Ugnens temperatur är max 70 °C. Det kan leda till att reagensen antänds, vilket kan skada instrumentet och preparaten.
- I samband med pauser i arbetet och när instrumentet har stängts av ska vattentillförseln stängas av.

### Varningar – Rengöring och underhåll



### Varning

- Före allt underhåll ska instrumentet stängas av och strömkontakten dras ur.
- Bär lämpliga skyddskläder (labbrock och handskar) när du rengör instrumentet för att skydda dig mot reagenser och potentiellt smittsamma mikrobiologiska föroreningar.
- Vid hantering av rengöringsmedel ska tillverkarens säkerhetsföreskrifter och laborieföreskrifterna följas.
- Använd inget av följande vid rengöring av instrumentets utvändiga ytor: alkohol, rengöringsmedel med alkohol (glasputsmedel), rengöringspulver med slipmedel, lösningsmedel med aceton, ammoniak, klor eller xylén.
- Använd ingen form av alkohol eller rengöringsmedel som innehåller alkohol vid rengöring av vattenfilterkåpan (→ "Bild 5-5"). Det kan resultera i att vatten läcker ut okontrollerat och skadar laboriet och laboriemiljön.
- Kåpor och hölje ska rengöras med mildt, pH-neutralt kommersiellt hushållsrengöringsmedel. De lackerade ytorna tål inte lösningsmedel och xylensubstitut!
- Reagenskvytterna i plast som hör till sköljvatten- och reagensstationerna kan rengöras i diskmaskin vid en temperatur på högst +65 °C. Vanligt diskmedel för laboriediskmaskiner kan användas. Reagenskvytterna i plast får under inga omständigheter rengöras vid högre temperaturer, eftersom det kan leda till att de deformeras.

### 2.3 Inbyggda säkerhetsfunktioner

Så fort instrumentets kåpa öppnas kommer överföringsarmarnas rörelser att stanna i ett horisontellt läge (x och y-axel) av säkerhetsskäl, för att förhindra kollision med rörliga delar som kan utgöra fara för användaren och preparaten.



#### Varning

- Låt alltid kåpan vara stängd under tiden infärgningsprogram är aktiva. Leicas garantiansvar gäller inte kvalitetsförsämringar av infärgningsprogram som beror på att kåpan har öppnats under pågående infärgningsprocess.
- Om kåpan öppnas samtidigt som ett eller flera infärgningsprogram är aktiva fördröjs respektive bearbetningssteg, eftersom det inte sker några överföringsrörelser under den tiden. Detta kan leda till förändringar av infärgningskvaliteten.
- För att säkerställa att instrumentets mjukvara fortsatt fungerar bra måste instrumentet startas om minst var 3:e dag.

### 3. Instrumentets komponenter och specifikationer

#### 3.1 Standardleverans

Antal	Beteckning	Beställningsnr
1	HistoCore SPECTRA ST Grundinstrument (lokal nätsladd ingår)	14 0512 54354
1	Reagenskyvettsats: 46 reagenskyvetter med lock 6 blå sköljvattenkyvetter 6 O-ringar 7x2	14 0512 47507
1	Sats med etiketter för laddnings- och utmatningsfacket: • 10 st. blanka • 5 st. "H <sub>2</sub> O" = vatten • 5 st. "A" = alkohol • 5 st. "S" = lösningsmedel (t.ex. xylen)	14 0512 55161
1	Sats med aktiva kolfilter (2 st.)	14 0512 53772
1	Avloppsvattenslang, 2 m	14 0512 55279
1	Slangklämma 30 45/12 DIN 3017 RF	14 0422 31972
1	Vattenanslutningsats:	14 0512 49324
2	Vattentillförselslang, 10 mm, 2,5 m	14 0474 32325
1	Förlängningsslang 1,5 m	14 0512 49334
2	Kabelband 200 x 12,5 svarta	14 0512 59906
1	Y-koppling G3/4	14 3000 00351
2	Dubbelnippel G3/4 G1/2	14 3000 00359
1	Filterhus	14 0512 49331
1	Filterpatron	14 0512 49332
1	Rörkoppling G3/4	14 3000 00360
1	Blindkåpa G3/4	14 3000 00434
1	Packningsbricka	14 0512 54772
1	Skiftnyckel SW30 DIN894	14 0330 54755
1	Ventilationsslang, 2 m	14 0512 54365
2	Slangklämma 50 70/12 DIN 3017 RF	14 0422 31973
1	Skruvmejsel 5,5 x 150	14 0170 10702
2	Säkring T16 A	14 6000 04696
1	Molykote 111 smörjfett, 100 g	14 0336 35460
3	Rack för 30 objektglas; 3 st. per förpackning	14 0512 52473
1	Rackhandtag för 30 objektglas; gula, 3 st. per förpackning	14 0512 52476
1	Rackhandtag för 30 objektglas; mörkblå, 3 st. per förpackning	14 0512 52478
1	Rackhandtag för 30 objektglas; röda, 3 st. per förpackning	14 0512 52480
1	Rackhandtag för 30 objektglas; vita, 3 st. per förpackning	14 0512 52484

Antal	Beteckning	Beställningsnr
1	Internationellt paket Bruksanvisning (inkl. engelsk papperskopia och ytterligare språk på en datalagringsenhet 14 0512 80200)	14 0512 80001

Om den medföljande nätsladden är trasig eller försvinner, kontakta din lokala Leica-representant.



#### Obs!

De levererade komponenterna ska jämföras noggrant med packsedeln, leveranssedeln och beställningen. Om du upptäcker några avvikelser ska du kontakta ansvarigt Leica-försäljningskontor direkt.

### 3.2 Specifikationer

Märkspänning:	100–240 V AC $\pm$ 10 %
Märkfrekvens:	50/60 Hz
Effektförbrukning:	1580 VA
Säkringar:	2 x T16 A H 250 V AC
Skyddsklassning, i enlighet med IEC 61010-1	Klass I (PE ansluten)
Föroreningsgrad, i enlighet med IEC 61010-1	2
Överspänningskategori, i enlighet med IEC 61010-1	II
Grad av skyddsklassning, i enlighet med IEC 60529	IP20
A-viktad bullernivå, uppmätt på 1 m avstånd	< 70 dB (A)
Värmeavgivning	1580 J/s
Laserklass, i enlighet med IEC 60825-1	1
Minimivstånd till väggar och möbler:	100 mm på alla sidor
Färskvattenanslutning:	
Slangmaterial:	PVC
Slanglängd:	2500 mm, 1500 mm (förlängningsslang)
Anslutningsstycke:	G3/4
Innerdiameter:	10 mm
Ytterdiameter:	16 mm
Invändigt tryck:	minimum/maximum: 2 bar/6 bar
Nödvändig vattenflödesmängd:	Min. 1,7 l/minut
Nödvändig kranvattenkvalitet:	Dricksvattenkvalitet, enligt tillämpliga officiella bestämmelser
Nödvändig kvalitet på avjoniserat vatten (tillvalsanslutning):	ISO 3696: 1995 Typ 3/ASTM D1193-91 Typ IV
Avloppsvattenanslutning:	
Slangmaterial:	PVC
Slanglängd:	2000 mm/4000 mm
Innerdiameter:	32 mm
Ytterdiameter:	37 mm

Frånluft:	
Slangmaterial:	PVC
Slanglängd:	2000 mm
Innerdiameter:	50 mm
Ytterdiameter:	60 mm
Utsugseffekt:	27,3 m <sup>3</sup> /h
Utsug av frånluft:	Aktivt kolfilter och ventilations slang för anslutning till ett externt ventilationssystem
Anslutningar:	1 x RJ45 Ethernet (bak): RJ45 – LAN (extern datahantering)
	1 x RJ45 Ethernet (fram): Endast för serviceändamål
	2 x USB 2.0: 5 V/500 mA (service och datalagring)
Gränssnitt till andra enheter:	Gränssnitt till täckglasapplikator HistoCore SPECTRA CV
Totalt antal stationer:	42
Totalt antal reagensstationer:	36
Tvättstationer:	6
Reagenskyvettvolym	400 ml
Laddningsstationer:	5
Utmatningsstationer:	5
Totalt antal ugnstationer:	6
Temperatur i ugnskammaren:	40 °C till 70 °C
Permanent minneskapacitet:	50 program
Maximalt antal steg/program:	50 steg
Stegtidslängd:	1 sekund till 23:59:59 (tt:mm:ss)
Gränssnitt för streckkodsläsare (tillvalstillbehör):	
Inspänning:	100-240 VAC
Ingångsfrekvens:	47-63 Hz
USB-port:	A-hane-typ
Kommunikationsgränssnitt:	USB-COM endast med USB 1.1-läge (serieanslutning)
Inställningar serieport:	Hastighet (baudhastighet): 115200
	Paritet: Ingen
	Databitar: 8
	Stoppbitar: 1

**Obs!**

Vid användning av en extern avbrottsfri strömförsörjning (UPS) bör denna vara konstruerad för en kapacitet på minst 1 580 VA och kunna säkra driften i minst 10 minuter.

## Omgivningsvillkor:

Miljövillkor Endast användning inomhus

## Användning:

Temperatur: +18 °C till +30 °C

Relativ luftfuktighet: 20 % till 80 %, icke kondenserande

Driftshöjd: Upp till max. 2 000 m över havet

## Förvaring:

Temperatur: +5 °C till +50 °C

Relativ luftfuktighet: 10 % till 85 %, icke kondenserande

## Transport:

Temperatur: -29 °C till +50 °C

Relativ luftfuktighet: 10 % till 85 %, icke kondenserande

## Mått och vikt:

Mått (bredd x djup x höjd): Stängd kåpa: 1 354 x 785,5 x 615 mm

Öppen kåpa: 1 354 x 785,5 x 1 060 mm

Tomvikt (utan överföringsstation, reagenser, och tillbehör) 165 kg

Fullvikt (med överföringsstation, reagenser, och tillbehör) 215 kg

## 3.3 Allmän översikt – framsida

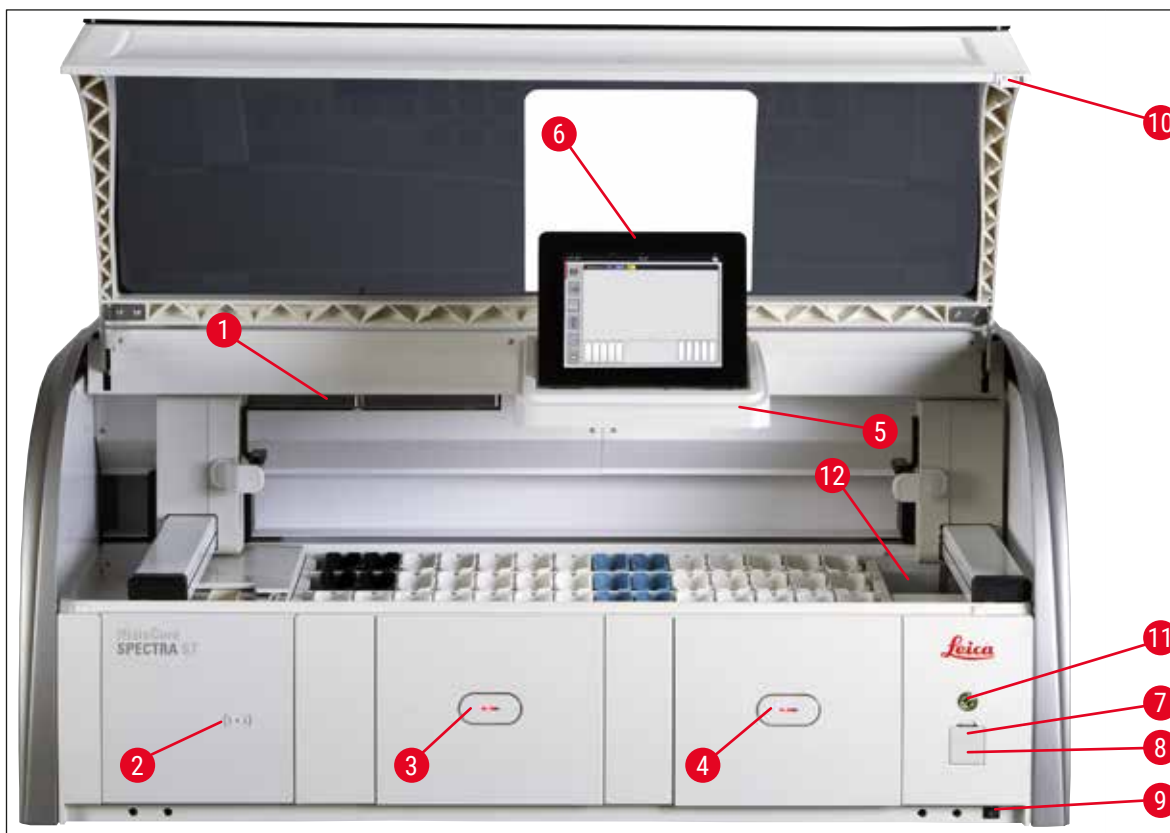


Bild 1

- |   |                                      |    |   |
|---|--------------------------------------|----|---|
| 1 | Isättning av aktivt kolfilter        | 7  | USB-uttag (2 st.)                                 |
| 2 | Inläsningsområde för Leica-reagenser | 8  | Serviceuttag                                      |
| 3 | Laddningsfack (inmatare)             | 9  | <b>TILL/FRÅN</b> -brytare ( <b>strömbrytare</b> ) |
| 4 | Utmatningsfack (utmatare)            | 10 | Kåpa  |
| 5 | Skärmhållare med intern belysning    | 11 | <b>Driftströmbrytare</b>                          |
| 6 | Bildskärm med användargränssnitt     | 12 | Överföringsstation (tillval)                      |

**Varning**

- Serviceuttaget (→ "Bild 1-8") får endast användas av servicetekniker certifierade av Leica!
- Luckan till inläsningsområdet (→ "Bild 1-2") får endast avlägsnas av servicetekniker certifierade av Leica.



## 3.4 Allmän översikt – baksida

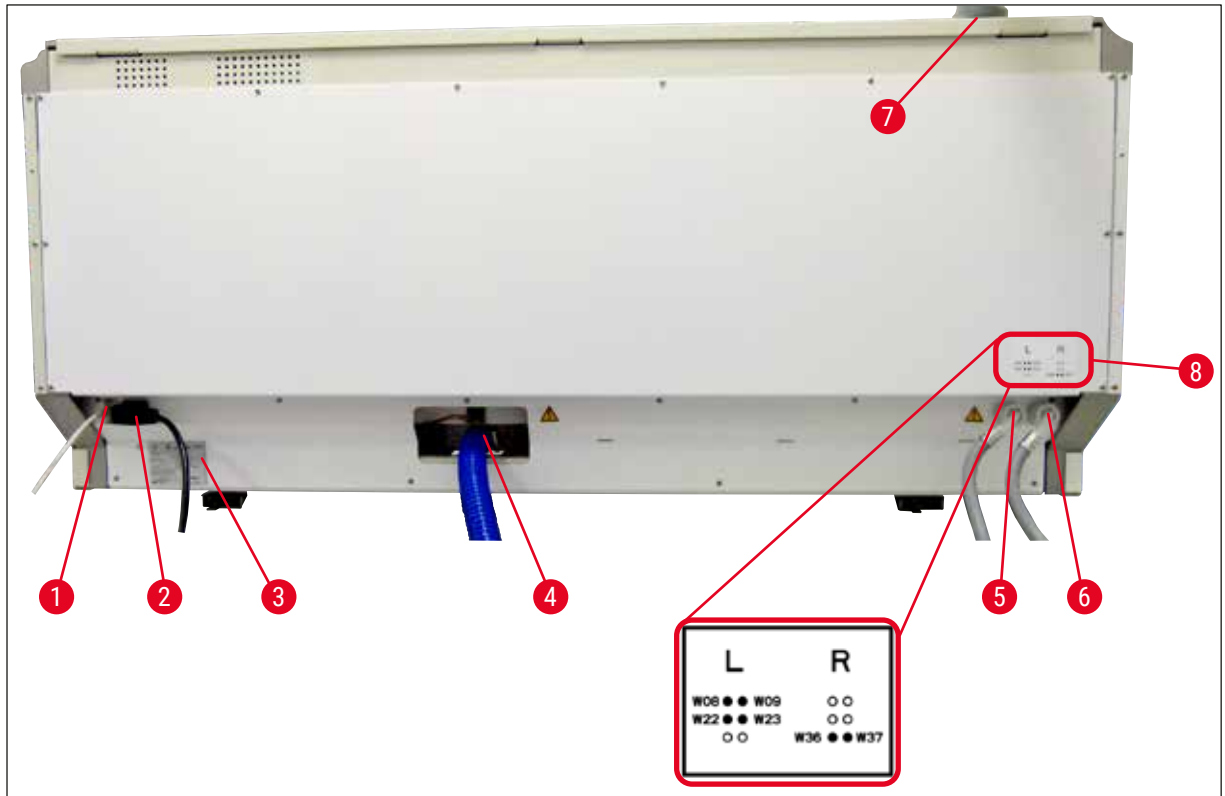


Bild 2

- 1 Nätverksanslutning (frånkopplad)
- 2 Strömanslutning
- 3 Typskylt
- 4 Avloppsvattenanslutning
- 5 Sköljvattenanslutning (grupp om 4)
- 6 Anslutning för destillerat vatten eller kranvatten (grupp om två)
- 7 Frånluftsanslutning
- 8 Vattenanslutningsschema

## 3.5 Allmän översikt – insida

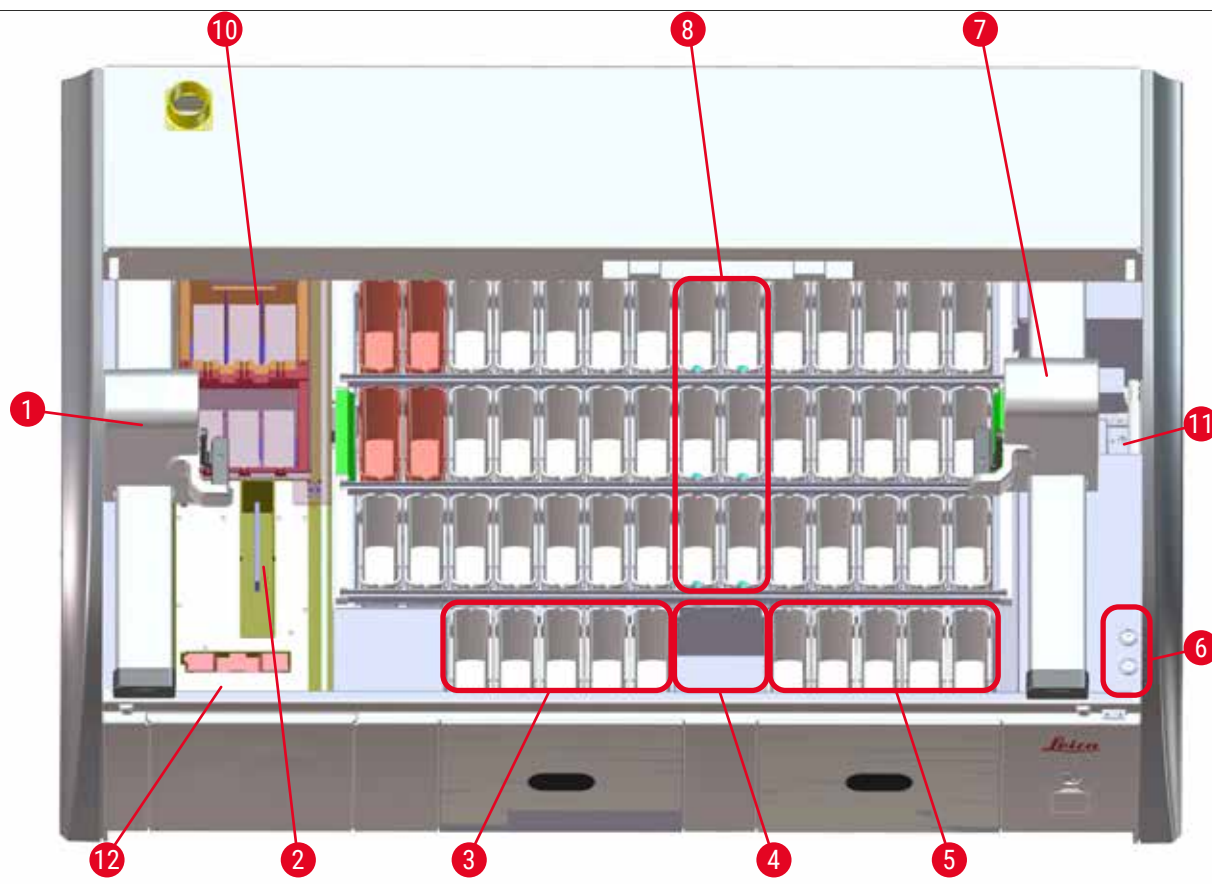


Bild 3

- 1 Vänster överföringsarm
- 2 Räkningarstation för preparat och svärd (tillval – endast i kombination med streckodsläsare)
- 3 Laddningsstationer, 5 st.
- 4 Torra överföringsstationer, 2 st.
- 5 Utmatningsstationer, 5 st.
- 6 Säkringshållare, 2 st.
- 7 Höger överföringsarm
- 8 Sköljvattenstationer, 6 st.
  
- 10 Torkugnsstationer, 6 st.
- 11 Överföringsstation till HistoCore SPECTRA CV (tillval)
- 12 Streckkod (tillval)

**Obs!**

Detta tillbehör är inte tillgängligt i alla regioner/länder. Kontakta din lokala Leica-försäljare.

## 4. Installation och start

### 4.1 Krav för uppställningsplatsen



#### Obs!

- Uppställning och planjustering utförs som en del av instrumentets installation och får endast utföras av auktoriserad Leica-personal!
  - Det krävs fyra kvalificerade personer för att lyfta instrumentet; Ta tag i alla hörn på ramen och lyft jämnt.
- 
- Golvet ska i möjligaste mån vara vibrationsfritt och det ska finnas tillräckligt med fritt utrymme (ca 1,10 m) ovanför laboriebordet så att kåpan kan öppnas obehindrat.
  - Det är användarens ansvar att säkerställa en elektromagnetiskt kompatibel omgivning för instrumentet så att det fungerar som det ska.
  - Vid extrema temperaturskillnader mellan förvarings- och uppställningsplats och samtidig hög luftfuktighet kan kondens bildas. Vänta i minst två timmar innan instrumentet startas. Instrumentet kan skadas om dessa anvisningar inte följs.
  - Stabilt, absolut vågrätt och plant laboriebord, minst 1,40 m brett och 0,80 m djupt.
  - Bordsytan måste vara vibrationsfri och vågrät.
  - Dragskåp på högst 2,0 m avstånd från instrumentet.
  - Instrumentet är endast avsett för drift inomhus.
  - Platsen där det används ska ha god ventilation. Dessutom rekommenderas starkt att det finns ett externt ventilationssystem.
  - Det måste finnas en kranvattenanslutning på högst 2,5 m avstånd från instrumentet. Denna anslutning måste vara lättillgänglig även efter att instrumentet har installerats.
  - Det måste finnas en avloppsvattenanslutning på högst 2 m avstånd. Denna anslutning måste vara ansluten till instrumentet på ett sätt som gör att avloppsvattenslangen har ett permanent fall.
  - Strömkontakten måste vara fri och lättillgänglig.



#### Varning

- En anslutning till ett externt ventilationssystem (rekommenderas starkt), teknisk ventilation samt ett integrerat utsugssystem med aktivt kolfilter minskar koncentrationen av lösningsmedelsångor i rumsluften. Även vid anslutning till ett externt ventilationssystem måste aktiva kolfilter användas. Detta är obligatoriskt.
- Användarföretaget ansvarar för att arbetsplatsens gränsvärden inte överskrids samt de åtgärder som krävs för detta, inklusive dokumentation.

- Ett **JORDAT ELUTTAG** måste finnas på högst 3 m avstånd.

## 4.2 Skölvattenanslutning



## Obs!

- Det finns två olika anslutningar att välja mellan (→ Sida 29 – 4.2.1 Anslutning av samtliga 6 skölvattenstationer). Instrumentet måste programmeras för den anslutningsvariant som används (→ Sida 99 – Bild 76).

## För båda anslutningsvarianter gäller följande installationsanvisningar:

- Ta ur skölvattenslang (→ "Bild 4-1") ur förpackningen.
- Vattenanslutningsslangen är rak (→ "Bild 4-3"), anslutningsslangen till instrumentet är böjd (→ "Bild 4-4").
- Kontrollera att tätningsringarna (→ "Bild 4-2") sitter fast på vattenanslutningsslangen (→ "Bild 4-3") och på anslutningen till instrumentet (→ "Bild 4-4").



## Varning

Slangen kan inte anslutas om tätningsringarna saknas! Kontakta i så fall Leicas tekniska service.

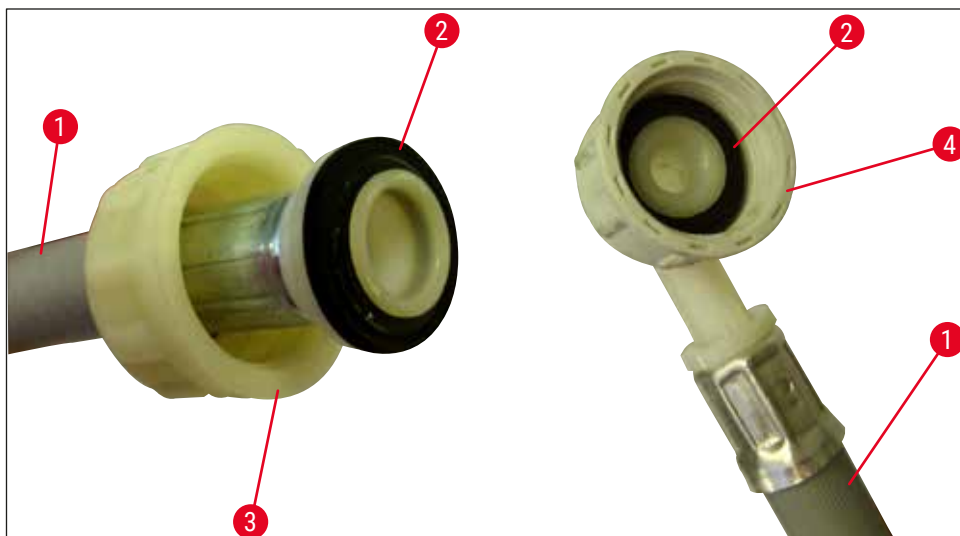


Bild 4



## Varning

Oberoende av vilken anslutningsvariant som väljs (sex skölvattenstationer eller fyra skölvattenstationer och två stationer för destillerat/avjoniserat vatten) måste alltid båda tilloppslangarna anslutas till instrumentet.

Vattentillförseln ska stängas av i samband med pauser i arbetet och när instrumentet har stängts av.

#### 4.2.1 Anslutning av samtliga 6 skölvattenstationer

Om alla skölvattenkyvetter (6 skölvattenstationer) ska anslutas måste båda tilloppslangarna (→ "Bild 5") användas enligt anvisningarna. Båda anslutningarna för rinnande vatten är (→ "Bild 5-4") anslutna till en vattenkran med (→ "Bild 5-8") ett Y-rör:

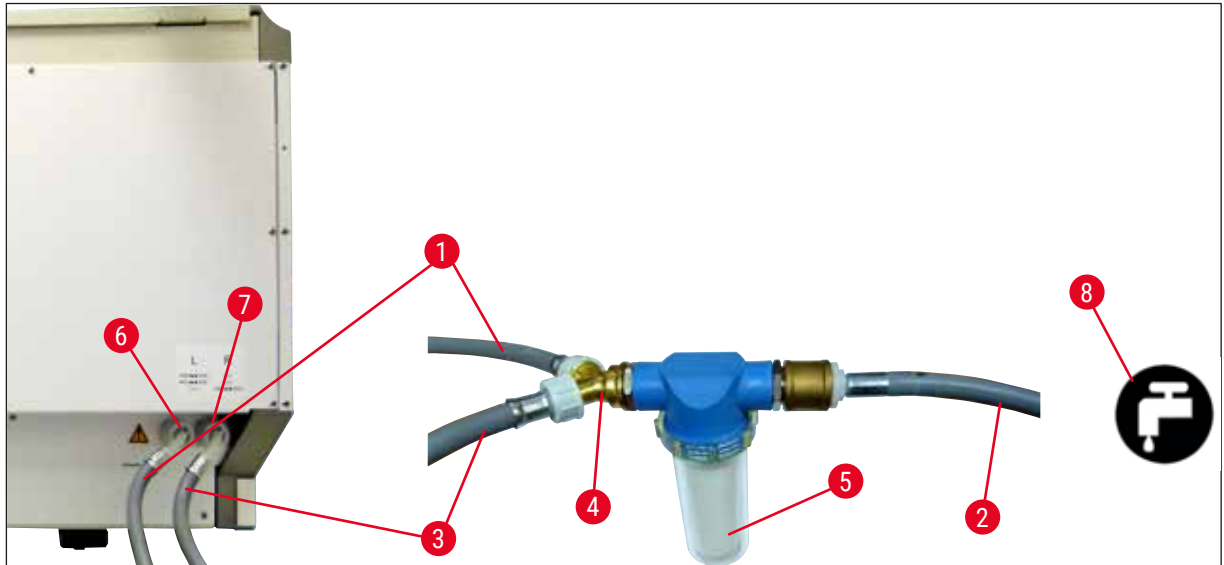


Bild 5

- |   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| 1 | Vattentillförselslang 1 (2,5 m)                                   | Beställningsnr: 14 0474 32325 |
| 2 | Förlängningsslang 1,5 m   | Beställningsnr: 14 0512 49334 |
| 3 | Vattentillförselslang 2 (2,5 m)                                   | Beställningsnr: 14 0474 32325 |
| 4 | Y-koppling  | Beställningsnr: 14 3000 00351 |
| 5 | Filterhus   | Beställningsnr: 14 0512 49331 |
| 6 | Skölvattenanslutning (grupp om 4)                                 |                               |
| 7 | Anslutning för destillerat vatten eller kranvatten (grupp om två) |                               |
| 8 | Kranvattenanslutning i laboratoriet                               |                               |

## 4 Installation och start

### 4.2.2 Kombinerad anslutning 4+2 sköjvattenstationer

Om huvudanslutningen (fyra sköjvattenstationer) ska anslutas till färskvatten och den andra anslutningen (2 sköjvattenstationer) till en källa för destillerat eller avjoniserat vatten i laboratoriet ska följande anslutningsschema användas:

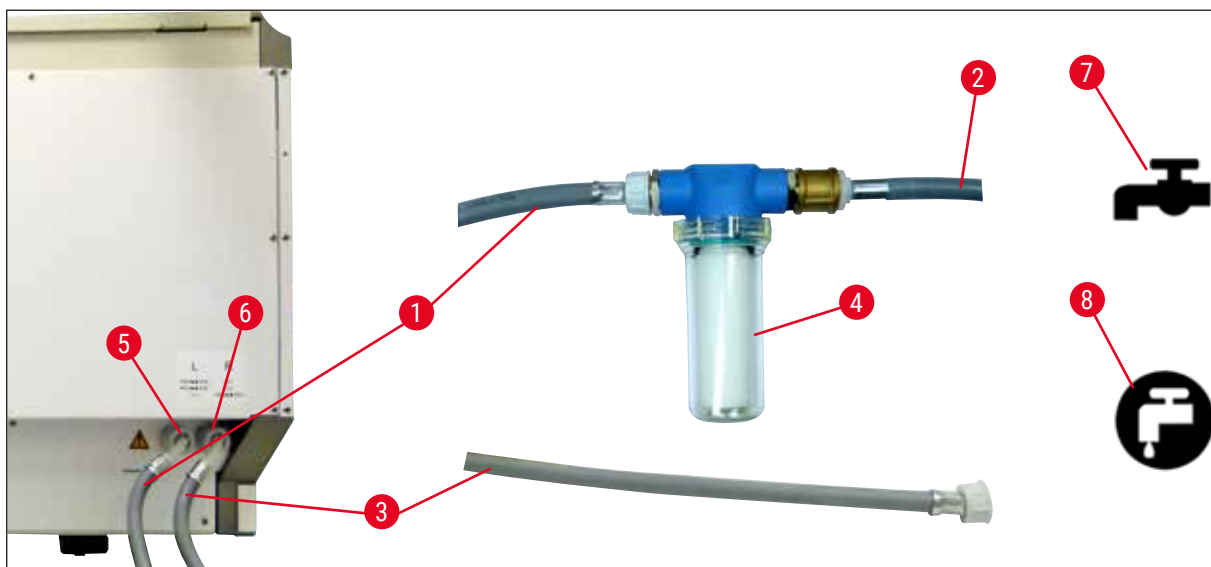


Bild 6

- |   |   |                               |
|---|---|-------------------------------|
| 1 | Vattentillförselslang 1 (2,5 m)                                   | Beställningsnr: 14 0474 32325 |
| 2 | Förlängningsslang 1,5 m   | Beställningsnr: 14 0512 49334 |
| 3 | Vattentillförselslang 2 (2,5 m)                                   | Beställningsnr: 14 0474 32325 |
| 4 | Filterhus   | Beställningsnr: 14 0512 49331 |
| 5 | Sköjvattenanslutning (grupp om 4)                                 |                               |
| 6 | Anslutning för destillerat vatten eller kranvatten (grupp om två) |                               |
| 7 | Kranvattenanslutning i laboratoriet                               |                               |
| 8 | Anslutning för destillerat/avjoniserat vatten i laboratoriet      |                               |



#### Varning

Det är viktigt att slangarna ansluts på rätt sätt (→ "Bild 2-8")!

### 4.2.3 Avloppsvattenanslutning

**Obs!**

Instrumentet har en passiv avloppsvattenavrinning. Laboratoriets avloppssifon måste därför sitta minst 50 cm under instrumentets avloppsvattenanslutning.

**Varning**

Avloppsslangen (→ "Bild 7-1") måste ledas med ett jämnt fall nedåt och får inte höjas.

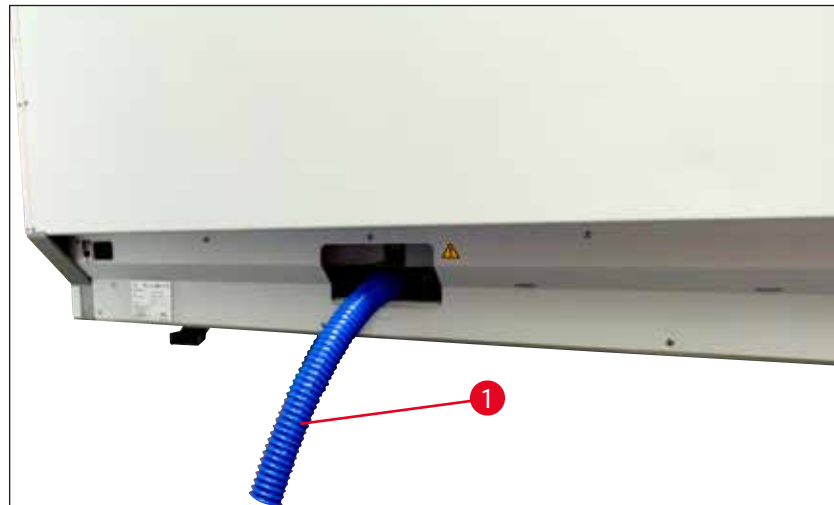


Bild 7

### 4.3 Elektrisk anslutning

**Varning**

- Använd endast den medföljande strömkabeln som är till för lokal strömförsörjning.
- Innan strömkontakten ansluts till uttaget måste du kontrollera att **strömbrytaren** nere till höger på instrumentets framsida står på **FRÅN** ("0").

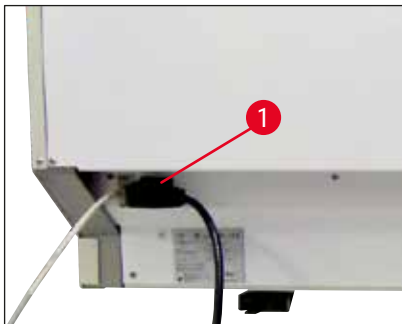


Bild 8

- Anslut strömkabeln till uttaget på baksidan av instrumentet (→ "Bild 8-1").
- Sätt i strömkontakten i ett jordat eluttag.

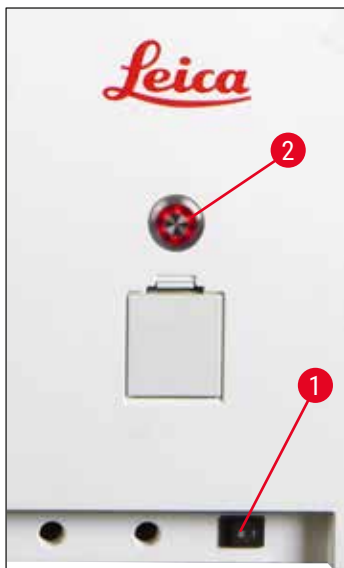


Bild 9

- Koppla till **strömbrytaren** (→ "Bild 9-1").
- Efter en liten stund börjar **driftströmbrytaren** att lysa orange. När programmets startsekvens är slutförd lyser brytaren röd (→ "Bild 9-2") och instrumentet är i **standby-läge**.
- **Driftströmbrytaren** kan nu användas (→ Sida 33 – 4.5 Starta och stänga av instrumentet).

#### 4.3.1 Använda en extern avbrottsfri strömkälla (UPS)

Ett avbrott av infärgningsprocessen vid tillfälliga strömavbrott kan undvikas med hjälp av en batteridriven avbrottsfri strömkälla (→ "Bild 10-1") (UPS). UPS:en bör kunna leverera en effekt på minst 1 580 VA i tio minuter. UPS:en måste vara avsedd för driftspänningen på uppställningsplatsen. Anslut den genom att ansluta strömkabeln på HistoCore SPECTRA ST till UPS-uttaget. UPS:en ansluts till laboratoriets eluttag.

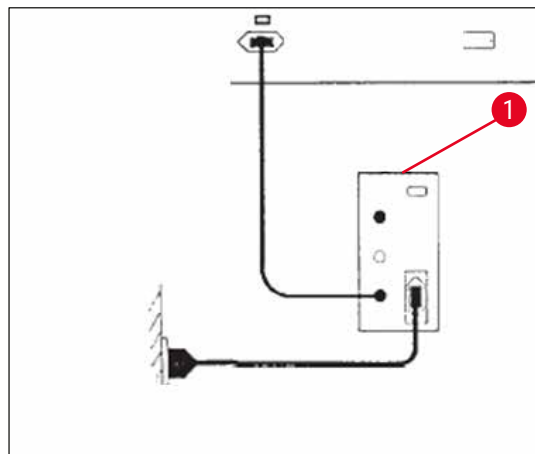


Bild 10



#### Varning

Strömkabeln till UPS:en måste alltid vara ansluten till eluttaget i labbet, även vid strömavbrott. Eftersom instrumentets jordning annars inte är säkerställd!



#### 4.4 Frånluftsanslutning

- » Anslut ena änden av ventilationsslangen (→ "Bild 11-1") till ventilationsuttaget (→ "Bild 11-2") på instrumentets ovansida. Och den andra änden till laboratoriets frånluftsventilation.

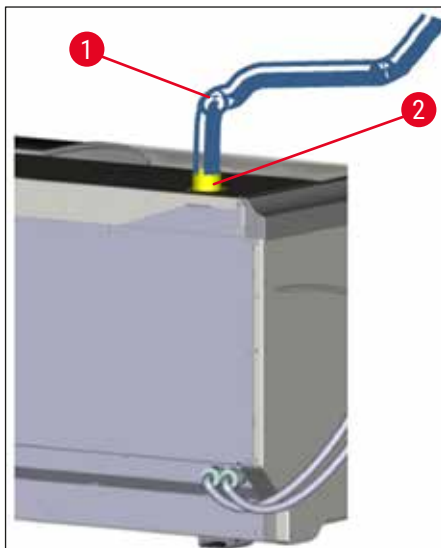


Bild 11



#### Varning

- En anslutning till ett externt ventilationssystem (rekommenderas starkt) och ett integrerat utsugssystem med ett aktivt kolfilter minskar koncentrationen lösningsmedel i luften och måste användas. För att undvika onödig avdunstning av reagenser ska kyvetterna täckas över när de inte används.
- Vid arbeten med farliga ämnen ska användarföretaget kontrollera att arbetsplatsens gränsvärden inte överskrids.

#### 4.5 Starta och stänga av instrumentet



#### Varning

Instrumentet ska vara anslutet till ett jordat eluttag. För att skydda (de elektriska) säkringarna ytterligare rekommenderar vi att HistoCore SPECTRA ST kopplas till ett uttag med en jordfelsbrytare (RCCB).

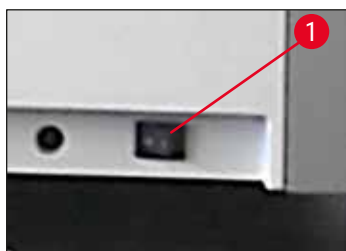


Bild 12

- Sätt **strömbrytaren** längst ner på instrumentets främre högra sida på **TILL** ("I") (→ "Bild 12-1").

## 4 Installation och start



Bild 13

- Några sekunder efter att **strömbrytaren** har kopplats till kommer **driftströmbrytaren** att lysa orange (→ "Bild 13"). Mjukvarans startprocess är slutförd när **driftströmbrytaren** lyser rött.



### Obs!

Om du trycker på **driftströmbrytaren** medan den lyser orange startar inte instrumentet.



Bild 14

- För att starta instrumentet trycker du på **driftströmbrytaren** (→ "Bild 13") som blinkar rött. En ljudsignal hörs.
- Under initieringen utförs automatiskt en kontroll av alla stationer (**skanning av påfyllningsnivå**).
- **Driftströmbrytaren** lyser grönt när instrumentet är redo för start.
- När initieringsfasen är slutförd visas **huvudmenyn** (→ "Bild 14") på skärmen.

### Avstängning av instrumentet

- Tryck två gånger på **driftströmbrytaren** (→ "Bild 13") för att försätta instrumentet i standby-läge (t.ex. över natten). Driftströmbrytaren lyser då rött.
- Inför rengöring och underhåll ska instrumentet stängas av med **strömbrytaren** (→ "Bild 12-1").



### Obs!

När instrumentet installeras eller om inga reagenser har tillsatts identifieras de ofyllda stationerna och markeras på skärmen (→ Sida 94 – 6.2.3 Automatisk skanning av påfyllningsnivå).



### Varning

Om ett ugnsteg har programmerats som första steg i infärgningsprogrammet kan programmet markeras som "ej startklart" efter start av instrumentet, eftersom ugnen ännu inte har nått drifttemperaturen. Så snart drifttemperaturen har uppnåtts visas programmet som startklart.

## 5. Användning

### 5.1 Användargränssnitt – Översikt

HistoCore SPECTRA ST programmeras och används via en pekskärm i färg. När bildskärmen har slagits på ser den ut på följande sätt om ingen infärgningsprocess (inget program) är i gång.

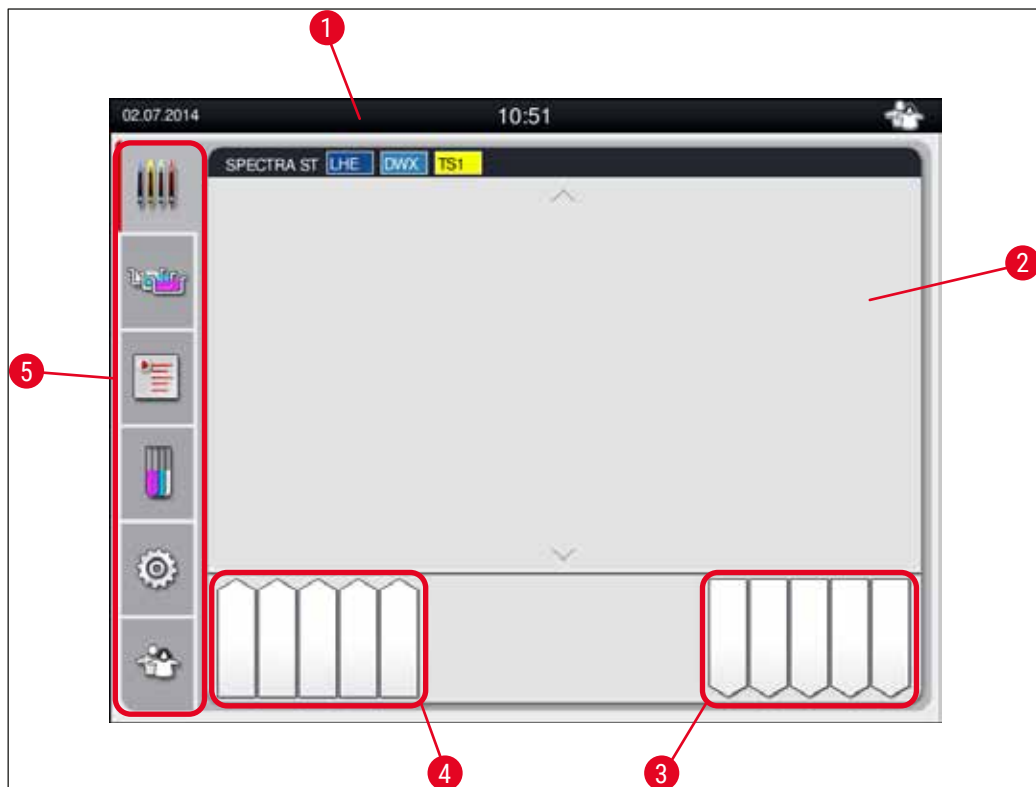


Bild 15

- 1 Statusrad
- 2 Processtatusvisning
- 3 Statusvisning för utmatningsfacket
- 4 Statusvisning för laddningsfacket
- 5 Huvudmeny (→ Sida 40 – 5.5 Huvudmeny – Översikt)

## 5.2 Element på statusskärmen

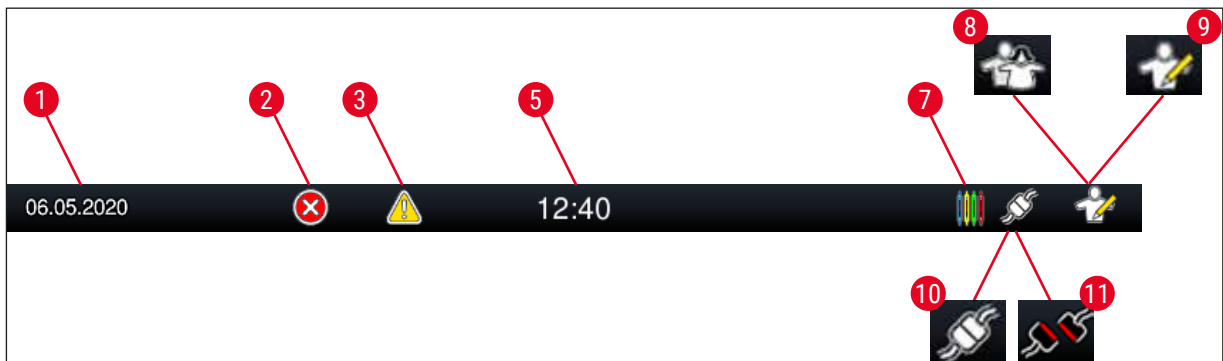


Bild 16

- 1      Aktuellt datum
- 2      Om larm och felinformation visas när instrumentet är i drift syns denna larmsymbol. Genom att trycka på denna symbol kan du öppna de 20 senaste aktiva informationsmeddelandena igen.
- 3      Om varningar och information visas när instrumentet är i drift syns denna informationssymbol. Genom att trycka på denna symbol kan du öppna de 20 senaste aktiva informationsmeddelandena igen.
- 5      Lokal tid
- 7      "**Process**"-symbolen indikerar att det finns aktiva infärgningsprocesser och att det fortfarande kan finnas rack i utmatningsfacket.
- 8      Den här "**användar**"-symbolen indikerar att instrumentet är i användarläge, vilket möjliggör en förenklad användning av instrumentet, utan lösenord.
- 9      När instrumentet används i "**arbetsledarläge**" indikeras det av denna symbol. Detta läge ger ännu fler användnings- och inställningsmöjligheter för utbildad personal. Åtkomst till detta läge kräver lösenord.
- 10     Anslutning har upprättats mellan HistoCore SPECTRA ST och HistoCore SPECTRA CV.
- 11     Anslutningen mellan HistoCore SPECTRA ST och HistoCore SPECTRA CV har avbrutits.

## 5.3 Processtatusvisning

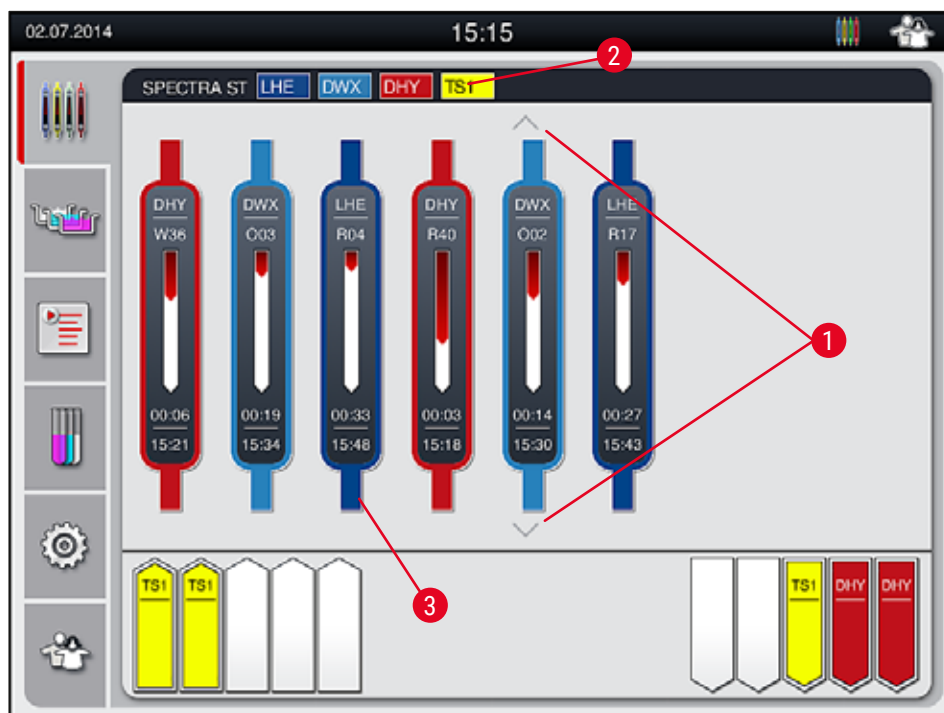


Bild 17

Huvudfönstret (→ "Bild 17") visar alla rack (→ "Bild 17-3") som finns i processen.

**Obs!**

För att visa en aktiv infärgningsprocess visas den övre delen av handtaget i respektive färg (→ "Bild 17-3"). Om antalet rack i processen överstiger det maximala antal som kan visas i huvudfönstret (max. 9) kan du bläddra uppåt och nedåt i skärmområdet med hjälp av (→ "Bild 17-1")-knapparna. Om en knapp är gråmarkerad är den inaktiv och det finns inga andra element i det område som inte visas.

Namnlisten i huvudfönstret (→ "Bild 17-2") indikerar instrumenttypen [SPECTRA ST] och listar de infärgningsprogram som kan startas för tillfället med angivna förkortningar och den färg som har tilldelats racket.

**Varning**

- Tillgängligheten för och valt antal olika utmatningsstationer är inte synliga för användaren i processtatusvisningen. Det rekommenderas att använda reagensuppställningsmenyn för processövervakning (→ "Bild 87") när olika reagenser används i utmatningsstationerna, för att man ska kunna reagera i tid när utmatningskapaciteten nås.
- Om färdiga rack inte avlägsnas från utmatningsstationerna i tid kan detta leda till störningar i infärgningsprocessen och kan påverka infärgningsresultaten.

## 5 Användning



### Obs!

Varje pågående infärgningsprocess illustreras med en rackhandtagssymbol. Den visas i samma färg som det faktiska rackhandtaget. Olika typer av informationen visas på handtagssymbolen (→ "Bild 18").

Om HistoCore SPECTRA ST-infärgare är permanent ansluten till en HistoCore SPECTRA CV automatisk täckglasapplikator kan båda instrumenten användas som arbetsstation. Detta möjliggör ett kontinuerligt arbetsflöde, från infärgningsprocessen till avlägsnandet av de slutförda objektglasen med täckglas. Tiden för överföring till HistoCore SPECTRA CV visas också i processtatusraden (→ "Bild 18-6").

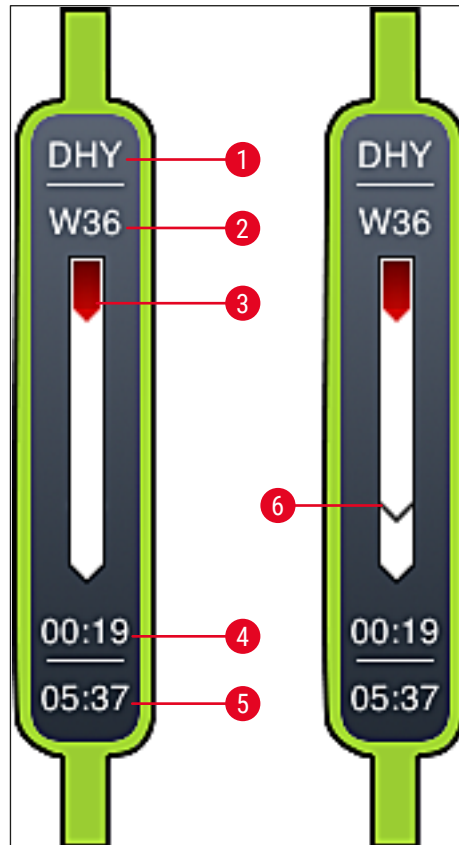


Bild 18

- 1 Programnamnets förkortning
- 2 Rackets aktuella position i instrumentet
- 3 Visning av förloppet för hela infärgningsprocessen
- 4 Förväntad återstående tid för programmet (tt:mm)
- 5 Klockslag vid programmets slut
- 6 Tid för överföring till den automatiska täckglasapplikatorn HistoCore SPECTRA CV vid användning som arbetsstation (→ Sida 115 – 6.6.5 Användning som arbetsstation)

## 5.4 Visning av facken

Längst ner i huvudfönstret visas status för laddnings- och utmatningsfacken.

- Stationerna med en pil som pekar i riktning in mot instrumentet (→ "Bild 19-1") symboliserar laddningsfacket och stationerna med en pil som pekar bort från instrumentet (→ "Bild 19-2") symboliserar utmatningsfacket, vart och ett med fem positioner.
- Beräknad starttid (→ "Bild 19-5") visas för varje rack i laddningsfacket.
- Respektive fack öppnas och stängs automatiskt när du trycker på fackknappen (→ "Bild 19-3") eller (→ "Bild 19-4").
- Instrumentet känner automatiskt av om rack sätts i eller tas ur när facket stängs.
- De rack som är placerade i inmatnings- eller utmatningsfacket visas med respektive rackhandtagsfärg och den tilldelade programförkortningen på skärmen.
- Lediga positioner visas i vitt.



### Obs!

Laddnings- och utmatningsfacken kan öppnas när fackknappen lyser grönt (→ "Bild 19-4"). När rack transporteras ut ur laddningsfacket eller in i utmatningsfacket lyser knappen för respektive fack röd (→ "Bild 19-3") och facket kan inte öppnas.

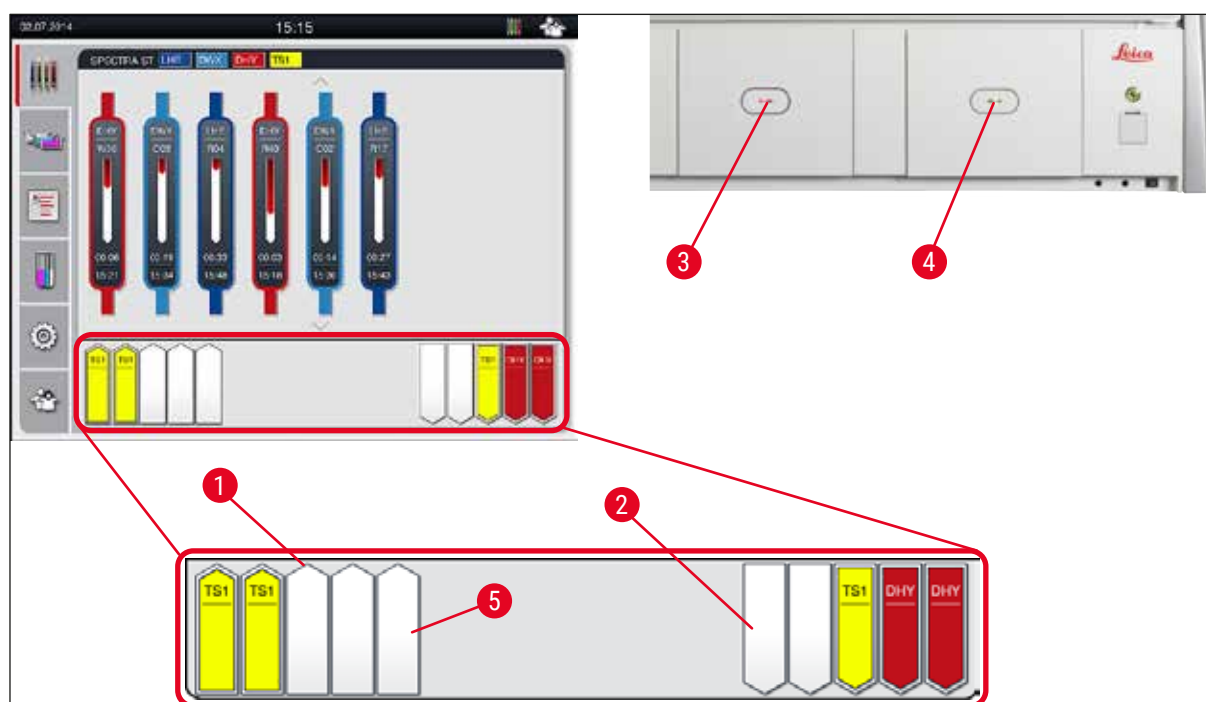


Bild 19



### Varning

Se upp när facken öppnas eller stängs. Klämrisk! Facken är motordrivna och öppnas automatiskt när knappen trycks in. Blockera inte fackens rörelseområde.

### 5.5 Huvudmeny – Översikt

Huvudmenyn är placerad till vänster på skärmen (→ "Bild 15-5") och indelad enligt beskrivningen nedan. Denna meny syns i alla undermenyer och gör att du när som helst kan byta till en annan undermeny.



**Processtatusvisningen** visar aktuell status för alla pågående rack. Här visas respektive handtag som en symbol på racket i respektive färg.

Denna visning utgör standardvisningen.



**Reagensuppställning** visar alla stationer i instrumentet ovanifrån. De enskilda reagensstationerna visas med förkortningar av reagensnamnen, stationsnumren och de pågående racken.



När **Programlista** aktiveras visas alla infärgningsprogram som är tillgängliga i instrumentet i listform. I menyn kan du mata in infärgningsprogram på nytt eller ändra dem, ändra deras prioritet samt skapa reagensuppställningen.



När **Reagenslista** aktiveras visas alla tidigare inmatade reagenser i listform. Med hjälp av menyn kan du ändra befintliga eller lägga in nya infärgningsreagenser, t.ex. för integrering av nya infärgningsprogram. Reagenserna måste läggas in innan programmet skapas.



I menyn **Inställningar** kan grundinställningar göras. Här kan språk, datum och tid, ugnstemperatur och andra parametrar anpassas efter lokala behov.



I menyn **Användarinställningar** kan ett individuellt lösenord läggas in, så att inga obehöriga kan göra ändringar i program och reagenslistor (**Arbetsledarläge**). I **Användarläge** kan instrumentet dock användas utan lösenord.



## 5.5.1 Knappsatsen

**Obs!**

En knappsats visas (→ "Bild 20") när något måste matas in (t.ex. för att skapa program, redigera program eller för att ange ett lösenord). Användningen sker via pekskärmen.

Observera att knappsatsens beror på vilket språk som är inställt.

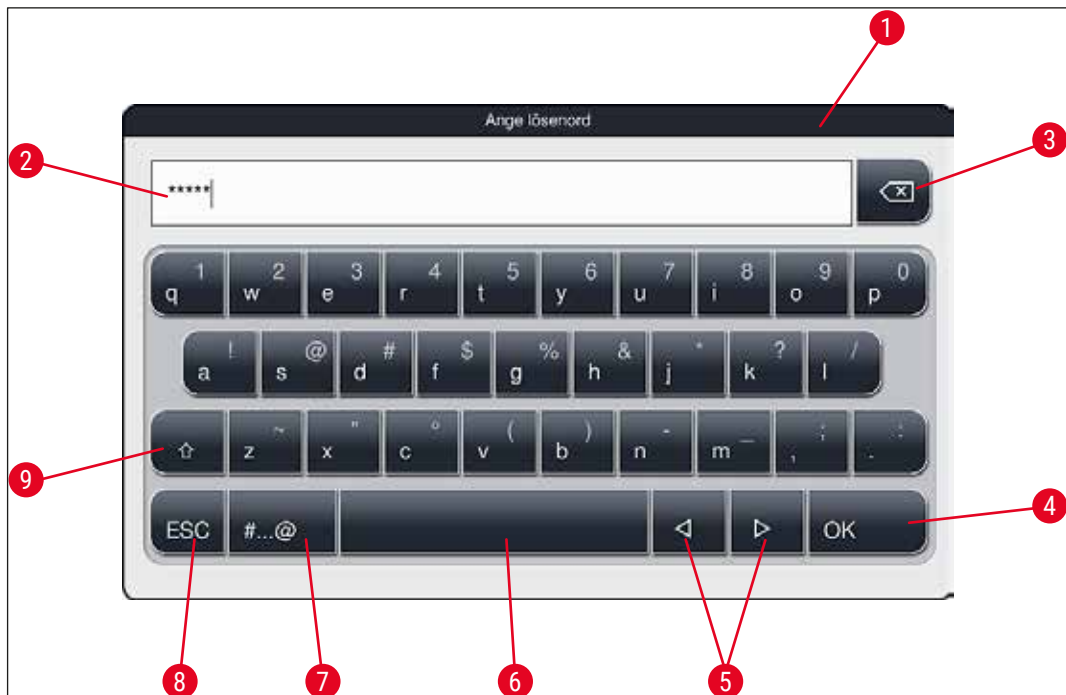


Bild 20

- 1 Namnlist
- 2 Inmatningsfält
- 3 Radera senast inmatat tecken
- 4 Bekräftelse
- 5 Flytta markören åt vänster eller höger
- 6 Mellanslagstangent
- 7 Shifttangent för specialtecken (→ "Bild 21")
- 8 Avbryt (inmatningar sparas inte!)
- 9 Stora/små bokstäver (om man trycker två gånger på tangenten aktiveras versaler permanent, vilket visas genom att tangenten blir röd. Trycker man på tangenten igen aktiveras gemener.)

### Knappsats med specialtecken



Bild 21

### Ytterligare specialtecken



Bild 22

- För att skriva ett specialtecken eller diakritiskt tecken som inte finns på knappsatsen med specialtecken (→ "Bild 21") håller du in motsvarande normal tangent på knappsatsen.
- Exempel: Om du håller in **a**-tangenten får du en rad andra alternativ (→ "Bild 22").
- Tryck på önskat tecken för att välja det på det nya, enradiga tangentbordet.



#### Obs!

Följande teckenbegränsningar gäller för lösenord och beteckningar:

- Reagensnamn: max. 30 tecken/reagensförkortningar: max. 10 tecken
- Programnamn: max. 32 tecken/programförkortningar: max. 3 tecken
- Lösenord: minst 4 och max. 16 tecken

## 5.6 Användarinställningar



I den här menyn kan motsvarande behörighetsnivå ställas in. Man skiljer mellan:

- Standardanvändare
- Arbetsledare (lösenordsskyddad)
- Servicetekniker (lösenordsskyddad)

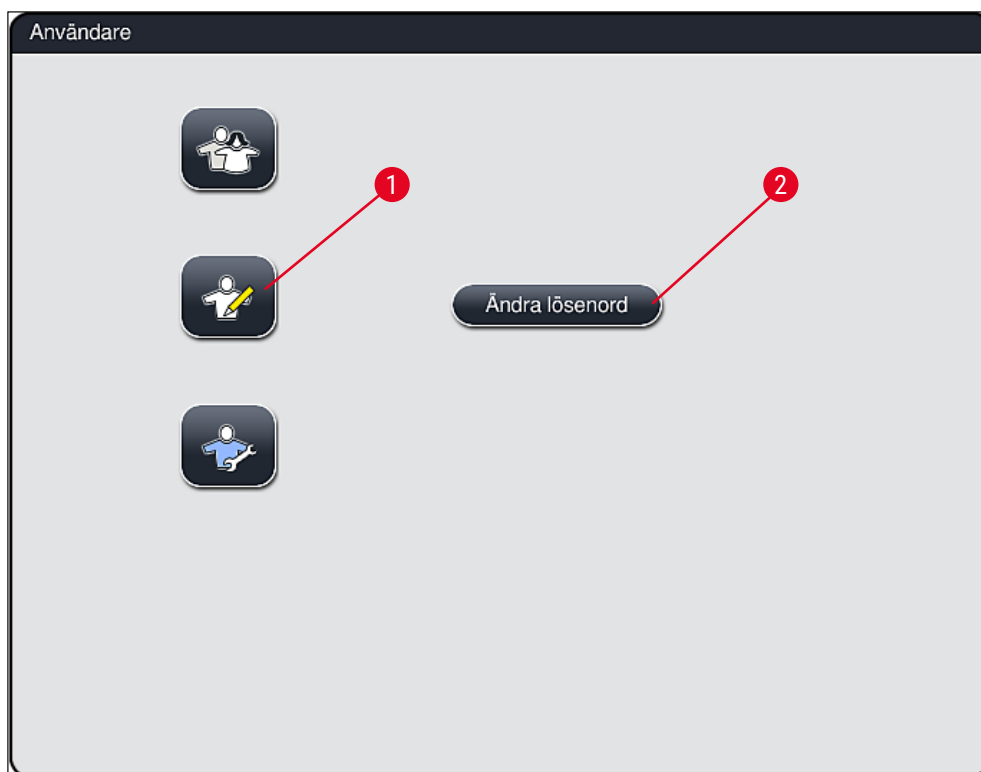


Bild 23



### Standardanvändare:

Standardanvändaren behöver inget lösenord och kan använda det färdiginställda instrumentet för alla vanliga användningsområden. Ändringar i program och inställningar kan inte göras av denna användargrupp.



### Arbetsledare:

Arbetsledaren har samma behörighet som standardanvändaren men kan dessutom skapa program och ställa in instrumentet när det tas i drift. Arbetsledarbehörigheten är därför lösenordsskyddad.



### Obs!

- **Arbetsledarläge** kommer att återställas till **Standardanvändar läge** efter 15 minuters inaktivitet. Icke sparade ändringar kommer att kasseras!
- Vi rekommenderar att du avslutar **Arbetsledarläge** när alla önskade ändringar är gjorda och sparade. För att logga ut, tryck på knappen **Standardanvändare** i menyn **Användarinställningar**.

## 5 Användning

Gör så här för att aktivera arbetsledarläget:

1. Tryck på knappen **Arbetsledare** (→ "Bild 23-1").
2. Sedan visas en knappsats (→ "Bild 24") som kan användas för att ange lösenordet.
3. Med **OK** avslutas inmatningen och det angivna lösenordets giltighet kontrolleras.
4. Aktuell användarstatus visas med respektive symbol i statusraden (→ "Bild 16") längst upp till höger.



Bild 24



### Obs!

Lösenordet som är inställt från fabrik bör ändras första gången det används.

Gör så här för att ändra arbetsledarens lösenord:

1. För att ändra lösenordet trycker du på knappen **Ändra lösenord** (→ "Bild 23-2") och anger det gamla lösenordet.
2. Ange sedan det nya lösenordet två gånger med hjälp av knappsatsen och bekräfta med **OK**.



### Obs!

Ett lösenord måste innehålla minst 4 tecken och får vara högst 16 tecken långt.



### Servicetekniker:

Serviceteknikern har åtkomst till systemfiler och kan utföra grundläggande inställningar och tester.

## 5.7 Grundläggande inställningar



### Obs!

Vissa inställningar kan endast ändras i arbetsledarläge, till exempel när instrumentet installeras för första gången (→ Sida 44 – Gör så här för att aktivera arbetsledarläget:).

Om du trycker på kugghjulssymbolen (→ "Bild 25-1") öppnas menyn **Inställningar** (→ "Bild 25"). I denna meny kan grundläggande instrument- och mjukvaruinställningar göras.

- Om du trycker på en symbol (→ "Bild 25-2") väljs den och markeras med rött.
- I bildskärmens högra område visas respektive inställningsfönster.
- De enskilda undermenyerna beskrivs nedan.



Bild 25

### 5.7.1 Språkeställningar



- Menyn för språkval visas när du trycker på symbolen för **Språk** (→ "Bild 25-2"). Denna meny innehåller en översikt över alla språk som är installerade på instrumentet. Här kan du välja önskat visningsspråk.

- Välj önskat språk och bekräfta med knappen **Spara**.
- Skärmbilden, informationsmeddelanden och etiketter visas omedelbart på det aktuella konfigurerade språket.



## Obs!

En arbetsledare eller Leica-servicetekniker kan lägga till fler språk med hjälp av Import (→ Sida 52 – 5.7.7 Datahantering).

### 5.7.2 Regionala inställningar



I den här menyn kan grundläggande skärminställningar (→ "Bild 26") konfigureras.

#### Temperaturenhet

- Ställ in temperaturenheten (→ "Bild 26-1") på Celsius eller Fahrenheit. Dra skjutreglaget till önskad enhet för att göra detta.

#### Tidsformat

- Tidsvisningen (→ "Bild 26-2") kan ändras från 24-timmarsformat till 12-timmarsformat (a.m. = morgon/ p.m. = eftermiddag) med hjälp av skjutreglaget.

#### Datumformat

- Konfigurera datumvisningen (→ "Bild 26-3") till internationellt, ISO- eller USA-format genom att trycka på motsvarande radioknapp bredvid formatet.
- Den aktiva inställningen markeras med en röd ram (→ "Bild 26-4").
- Tryck på knappen **Spara** för att spara inställningarna.

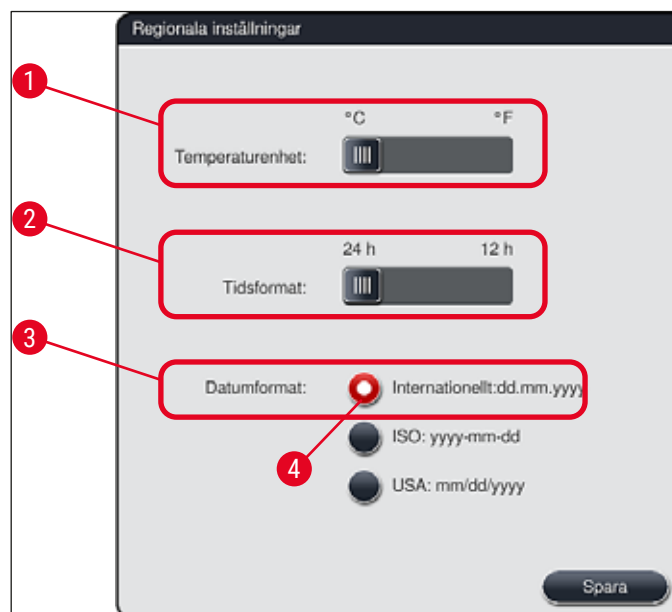


Bild 26

### 5.7.3 Datum och tid



I den här menyn (→ "Bild 27") kan du ställa in aktuellt datum och lokal tid genom att vrida på de enskilda hjulen.



#### Obs!

I 12-timmarsvisningen anges dessutom a.m. (förmiddag) och p.m. (eftermiddag) under timsiffrorna, så att en korrekt inställning kan göras.

Inställningen av tid och datum får inte avvika med mer än 24 timmar från systemtiden som är inställd från fabrik.

- Tryck på knappen **Spara** för att spara inställningarna.



Bild 27

### 5.7.4 Meny för larmljud – fel- och signalljud



I den här menyn kan du välja larm- och ljudsignaler, justera volymen och kontrollera att de fungerar (→ "Bild 28-6").

När menyn har öppnats visas aktuell inställning av larm- och ljudsignaler.

## 5 Användning



### Varning

- När instrumentet startas spelas en larmsignal upp. Om så inte är fallet får instrumentet inte användas, detta för att skydda proverna och användaren. Kontakta i så fall Leicas tekniska service.
- De akustiska larmsignalerna kan inte avaktiveras. Minsta konfigurerbara värde för volymen är 2. Det högsta värdet är 9.

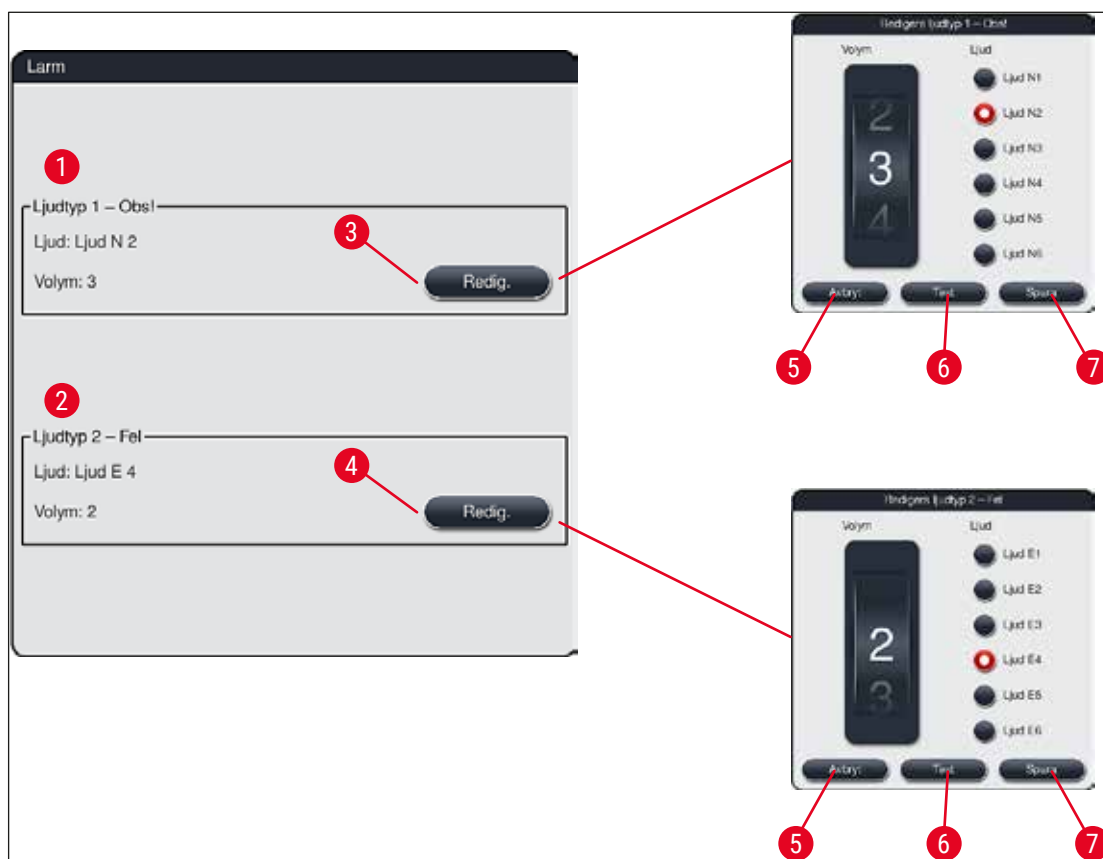


Bild 28



### Ljudtyp 1 – Obs! (→ "Bild 28-1")

Ljudsignaler avges när varningsmeddelanden eller anvisningar visas på skärmen. Det går att välja en av sex olika ljudsignaler. För att ändra inställningarna trycker du på knappen **Redig.** (→ "Bild 28-3"). Volymen kan ställas in stegvis (0 till 9) med hjälp av hjulet.



### Ljudtyp 2 – Fel (→ "Bild 28-2")

Larmsignaler hörs när ett felmeddelande visas på bildskärmen. Detta kräver att användaren genast ingriper. Det går att välja en av sex olika ljudsignaler. För att ändra inställningarna trycker du på knappen **Redig.** (→ "Bild 28-4").



- Med hjälp av hjulet **Volym** kan larmsignalernas volyminställning anpassas. För larmtyperna finns det sex olika ljudsignaler att välja mellan. Knappen **Test** (→ "Bild 28-6") kan användas för att lyssna på de olika ljuden.
- Tryck på knappen **Spara** (→ "Bild 28-7") för att spara inställningarna. Använd knappen **Avbryt** (→ "Bild 28-5") för att stänga fönstret utan att bekräfta inställningarna.

### 5.7.5 Ugnsinställningar och streckkodsläsare



Ugnens temperatur och driftläge kan konfigureras i menyn för ugnsinställningar (→ "Bild 29"). När menyn har öppnats visas de aktuella ugnsinställningarna.

Om tillvalet streckkodsläsare är installerad, kan den aktiveras/inaktiveras i denna meny.



#### Varning

Ändringar av ugnstemperaturen kan leda till att infärgningsresultatet påverkas. Om ugnstemperaturen är för högt inställd kan det påverka provet.

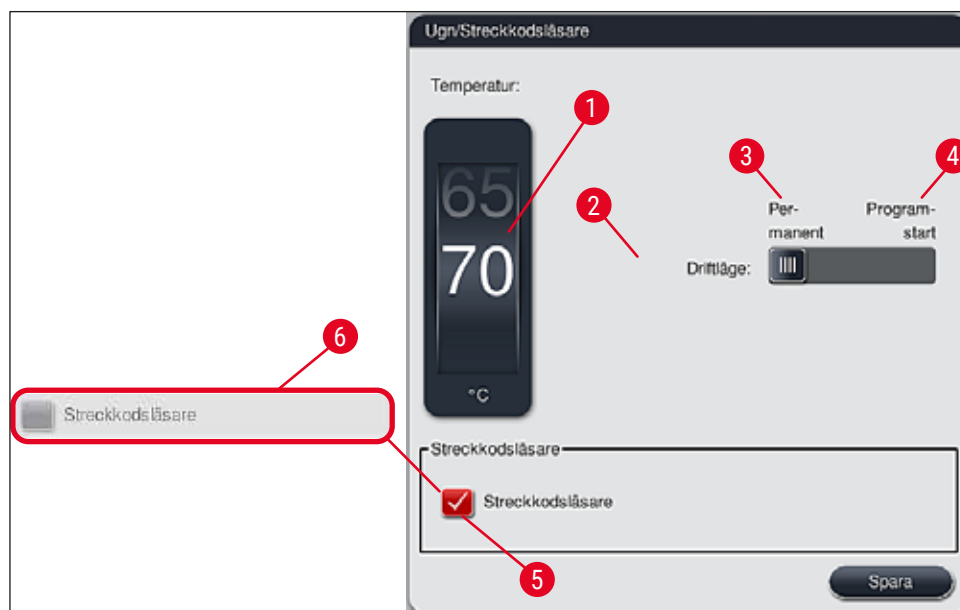


Bild 29

#### Temperatur:

Ugnens måltemperatur kan ställas in i steg om 5 °C från 40 °C till 70 °C med hjälp av hjulet (→ "Bild 29-1").

## 5 Användning

### Driftläge:

För driftläget (→ "Bild 29-2") kan du välja mellan:

- uppvärmning av ugnen i samband med att ett program (→ "Bild 29-4") startas (**Programstart**) eller
- start av ugnen i samband med att instrumentet (→ "Bild 29-3") startas (**Permanent**).
- Inställningen ändras genom att skjutreglaget ställs i motsvarande läge.
- Inställningarna sparas genom att man trycker på knappen **Spara**.



### Obs!

- För att ändringarna ska sparas måste det lösenordsskyddade användarläget **Arbetsledare** användas. I det vanliga användarläget är knappen **Spara** grå och därmed inaktiv.
- Om Leica-infärgningsprogram har integrerats i reagensuppställningen (→ Sida 78 – 5.9.9 Skapa reagensuppställningen) kan inte temperaturinställningen ändras. Se informationen som medföljer Leica Reagent Kit för standardtemperaturen.



### Varning

- Det rekommenderas att **Permanent** används som inställning för att undvika upprepade väntetider till följd av ugnens uppvärmning.
- På grund av omgivningsvillkoren kan den inställda ugnstemperaturen ibland avvika med  $-8\text{ °C}$  till  $+5\text{ °C}$  från det inställda värdet. För särskilt känsliga preparat bör den inställda temperaturen därför väljas med hänsyn till detta (t.ex. den inställda temperaturen sänkas med  $5\text{ °C}$  och ugnsmomentet förlängas motsvarande).

### Strekkodsläsare



### Obs!

Om ingen strekkodsläsare har installerats av en Leica servicetekniker, förblir denna kontrollruta inaktiv (→ "Bild 29-6"). Efter att en strekkodsläsare installerats, kan strekkodsläsaren aktiveras eller inaktiveras i denna meny.

För att aktivera eller inaktivera strekkodsläsaren, klicka på kontrollrutan (→ "Bild 29-5").

#### 5.7.6 Rörelsehastighet – uppåt-/nedåtrörelse (agitering)



Agitering

I menyn **Agitering** (→ "Bild 30") kan hastigheten för rackhållarens uppåt-/nedåtrörelse justeras. Rackhandtagen ligger på hållarens ram som rör sig uppåt och nedåt under infärgningsprocessen (agitering).

När menyn har öppnats visas den aktuella inställningen.

**Obs!**

Agiteringen bidrar till att de påfyllda reagenserna blandas ordentligt under pågående infärgningsprocess. För att rörelsehastigheten (agitering) ska kunna justeras måste det lösenordsskyddade användarläget **Arbetsledare** användas.


**Hastighet:**

Genom att rotera hjulet **Hastighet** (→ "Bild 30-1") kan du ställa in agiteringsfrekvensen (provernas rörelse) i fem steg (0 = agitering inaktiverad, 5 = högsta hastighet). Högre värden innebär en högre agiteringsfrekvens.

Inställningarna sparas genom att man trycker på knappen **Spara**.


**Obs!**

- Agiteringshastigheten för användardefinierade program kan bara ändras om inget validerat Leica-program är aktivt. Hjulet är i så fall svart och aktivt.
- Agiteringen är förinställd (fast) för validerade Leica-program (se bruksanvisningen till Leica Reagent Kit). Hjulet är då grått och inaktivt.

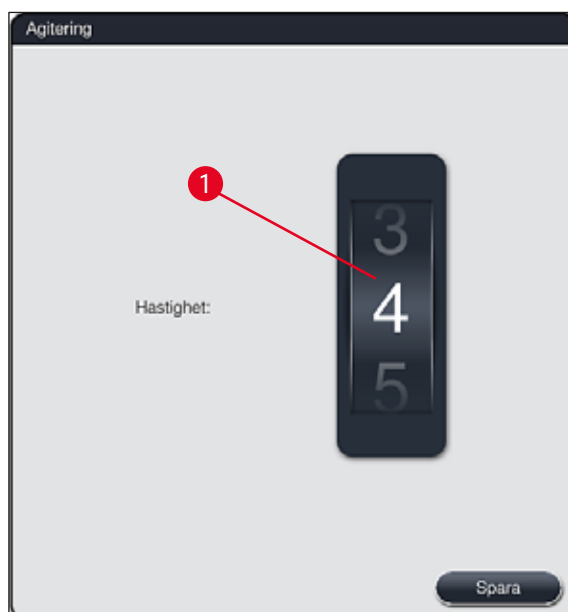**Bild 30**

## 5 Användning
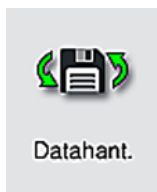
### 5.7.7 Datahantering



I menyn **Datahantering** (→ "Bild 31") kan du exportera och importera data, inställningar och händelseloggar (loggfiler). Ett USB-minne som ansluts till ett av USB-uttagen på instrumentets framsida (→ "Bild 1-7") krävs för alla exporter och importer (förutom fjärrmjukvaruuppdateringar).



#### Obs!

- USB-minnet måste vara FAT32-formaterat.
- Om ett USB-minne inte känns igen av instrumentet, sätt in det i den andra USB-porten. Om USB-minnet fortfarande inte känns igen i den andra USB-porten kan det vara skadat eller inte läsbart av HistoCore SPECTRA ST. I detta fall rekommenderar vi att ett annat FAT32-formaterat USB-minne används.

#### Användarexport (→ "Bild 31-1")

Funktionen **Användarexport** används för att spara information på ett anslutet USB-minne (→ "Bild 1-7"):

- En **zip**-fil med händelseloggarna från de 30 senaste arbetsdagarna och **RHS**-information i CSV-format.
- En PDF-fil som innehåller alla användardefinierade program, aktiva program, användarvalda inställningar för Leica-program, reagensuppställning och reagenslista.
- En krypterad **lpkg**-fil som innehåller alla användardefinierade program samt reagenslistan.



#### Obs!

**lpkg**-filen kan inte öppnas och visas av användaren.



Bild 31

Användardefinierade program och reagenslistan kan överföras till en annan HistoCore SPECTRA ST med samma konfiguration med hjälp av funktionen **Import** (→ "Bild 31-3").

- Medan dataexporten pågår visas informationsmeddelandet **Användardata exporteras....**
- Informationsmeddelandet **Export lyckades** informerar användaren om att dataöverföringen är slutförd och att säker borttagning av USB-minnet kan ske.
- Om informationsmeddelandet **Export misslyckades** visas har ett fel inträffat (t.ex. har USB-minnet tagits bort för tidigt). Utför i så fall exporten på nytt.

**Obs!**

Det rekommenderas att man gör en export av data när instrumentet har installerats, så att denna data är åtkomliga vid en eventuell ominstallation.

**Serviceexport** (→ "Bild 31-2")

Funktionen **Serviceexport** används för att spara **lpkg**-filer på ett anslutet USB-minne (→ "Bild 1-7"):

Den krypterade **lpkg**-filen innehåller ett fördefinierat antal händelseloggar samt följande:

- Information från reagenshanteringssystemet (**RHS**)
- Reagensdata
- Användardefinierade programnamn
- Annan servicerelaterad data

**Obs!**

**lpkg**-filen kan inte öppnas och visas av användaren.

- När man trycker på knappen **Serviceexport** visas en urvalsmeny där användaren kan välja önskat antal dataposter som ska exporteras (5, 10, 15 eller 30 dagar).
- Tryck på **OK** för att bekräfta valet.
- Medan dataexporten pågår visas informationsmeddelandet **Serviceexporteras....**
- Informationsmeddelandet **Export lyckades** informerar användaren om att dataöverföringen är slutförd och att säker borttagning av USB-minnet kan ske.
- Om informationsmeddelandet **Export misslyckades** visas har ett fel inträffat (t.ex. har USB-minnet tagits bort för tidigt). Utför i så fall exporten på nytt.

### Import (→ "Bild 31-3")



#### Obs!

- Det lösenordsskyddade användarläget **Arbetsledare** krävs för import.
- Om det finns en eller flera filer i dialogrutan kan du använda filnamnet för att ange datumet då filen sparades och instrumentets serienummer. Välj filen som ska importeras och bekräfta meddelandet som följer på bildskärmen med **OK**.
- Instrumentets mjukvara ser till att inga befintliga Leica-program och -reagenser skrivs över när data importeras (program och reagenser). Dubbletter av förkortningar för program och reagenser samt dubbletter av reagensnamn ersätts automatiskt av en platshållare, alternativt läggs en platshållare till i namnet. Om det finns objektglas med dubblerade handtagsfärger får det importerade programmet färgen vit.

Handtagsfärg objektglas:

- Om ett program som importeras innehåller ett objektglas vars handtagsfärg redan har ett tilldelat program, byts denna handtagsfärg ut till vit vid importen.

Förkortning av programnamn:

- Om ett program ska importeras vars förkortning redan används för ett befintligt ersätter mjukvaran automatiskt denna förkortning med en platshållare. Det långa programnamnet förblir detsamma.
- Förkortning av det befintliga programmet: PAS
- Ändrad förkortning av det importerade programmet: +01

Reagensnamn och förkortning av reagensnamn:

- Om en reagens importeras vars namn och/eller förkortning redan används lägger mjukvaran automatiskt till en platshållare ("\_?").
- Befintligt reagensnamn: 100 % alkoholdehyd 1 S
- Ändrat reagensnamn på den importerade reagensen: 100 % alkoholdehyd 1 S\_?
- Befintlig förkortning: 100Dhy 1S
- Ändrad förkortning av den importerade reagensen: 100Dhy 1+01

Importerade program och reagenser kan integreras i reagensuppställningen, även med platshållare. Du kan byta namn på dem senare.



#### Varning

När du importerar data från ett USB-minne skrivs alla användardefinierade program och reagenser som redan finns på instrumentet över och ersätts av den data som importeras. Det går inte att markera endast enstaka filer för import! Leica rekommenderar att denna funktion endast används för att importera säkerhetskopior eller för att installera ytterligare en HistoCore SPECTRA ST med samma parametrar.

Funktionen **Import** gör det möjligt att importera data från den krypterade listan med program och reagenser, ytterligare validerade Leica-program och ytterligare språkpaket från ett anslutet USB-minne.

Denna data kan också användas för att förse en annan HistoCore SPECTRA ST med samma data med hjälp av funktionen Export/Import.

- För att göra detta sätter du i USB-minnet med tidigare exporterad data i ett av USB-uttagen på instrumentets framsida (→ "Bild 1-7").
- Välj sedan funktionen **Import**. Data importeras.
- Ett informationsmeddelande bekräftar att dataimporten har lyckats.

**Varning**

I allmänhet behöver en ny reagensuppställning skapas när funktionen **Import** används (och när ett nytt Leica-infärgningsprogram importeras). Alla Leica-reagenser som finns i instrumentet kommer att förfalla och måste ersättas med ett nytt, motsvarande Leica Reagent Kit.

**Mjukvaruuppdatering** (→ "Bild 31-4")

Om det finns mjukvaruuppdateringar och ytterligare språkpaket tillgängliga kan dessa köras eller installeras på följande sätt i användarläget **Arbetsledare** eller av en servicetekniker som är auktoriserad av Leica.

Utföra en mjukvaruuppdatering

1. Kopiera filen för mjukvaruuppdateringen till ett USB-minne som är formaterat med FAT32.
2. Sätt i USB-minnet i ett av de två USB-uttagen (→ "Bild 1-7") på instrumentets framsida.
3. Byt därefter till menyn **Datahantering** och klicka på **Mjukvaruuppdatering** (→ "Bild 31-4").
4. Mjukvaruuppdateringen startar.

✓ Ett informationsmeddelande informerar användaren om att uppdateringen har utförts.

**Varning**

Om uppdateringen inte kan genomföras får användaren information om detta. Kontakta Leica service om orsaken till detta inte är uppenbar.

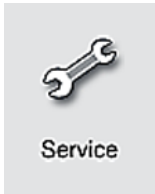
**Obs!**

Laboratoriespecifika inställningar raderas inte när mjukvaran till HistoCore SPECTRA ST uppdateras. Efter en mjukvaruuppdatering måste det kontrolleras att instrumentet fungerar korrekt.

**Fjärrmjukvaruuppdatering** (→ "Bild 31-5")

Den här funktionen är för närvarande inaktiverad.

## 5.7.8 Serviceuttag



Den här menyn (→ "Bild 32") ger Leica-auktoriserade servicetekniker åtkomst till tekniska funktioner för diagnos och reparationer av HistoCore SPECTRA ST.

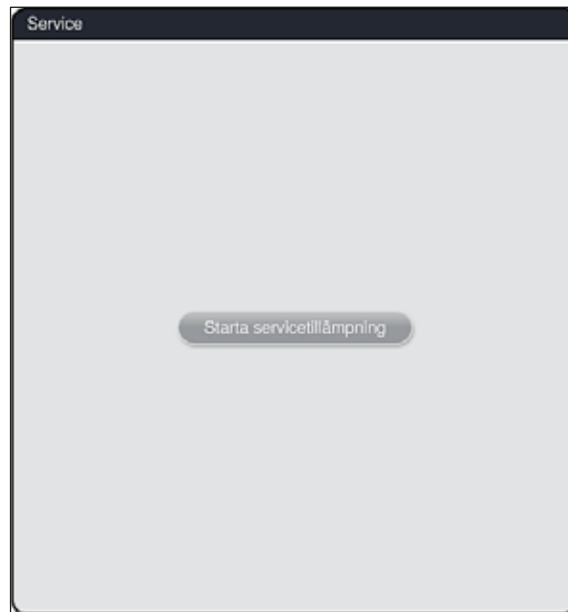



Bild 32

**Obs!**

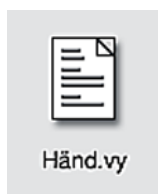Åtkomsten till servicemjukvaran är spärrad för alla andra användargrupper.



### 5.7.9 Händelsevisning



För varje dag som instrumentet har varit påslaget skapas en ny protokollfil. Öppna denna fil genom att välja filen **DailyRunLog** i **händelsevyn** (→ "Bild 33").

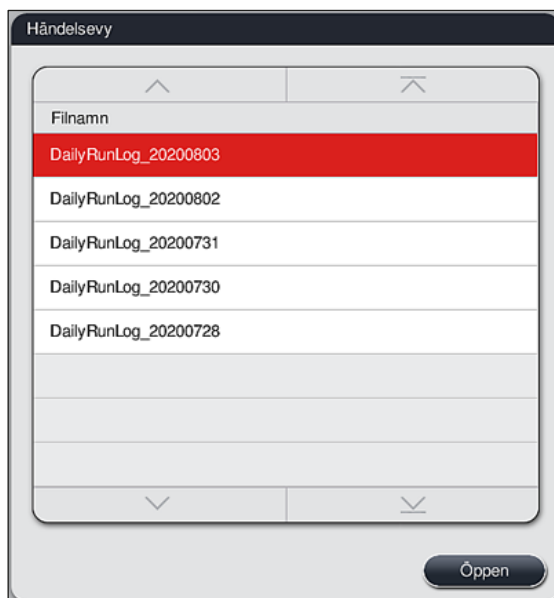


Bild 33

- I **händelsevyn** kan du välja en händelselogg från en lista med tillgängliga loggar och öppna den genom att trycka på knappen **Öppna**.



#### Obs!

Filnamnet kompletteras med datumet då filen skapades i ISO format, vilket gör det lättare att organisera filerna. Filen skapas på det språk som är inställt.

- Alla händelseposter börjar med en tidsstämpel (→ "Bild 34-1"), som visar det datum och klockslag då posten skapades.
- Namnlisterna i händelsevisningen visar också serienumret (→ "Bild 34-2") och den aktuella installerade mjukvaruversionen (→ "Bild 34-3") för HistoCore SPECTRA ST.
- Du kan bläddra uppåt och nedåt i listan och loggfilen med hjälp av piltangenterna (→ "Bild 34-4"). Genom att trycka på den vänstra knappen kan du bläddra genom händelsevisningen sida för sida. Om du trycker på den högra knappen bläddrar du till början eller slutet av händelsevisningen.

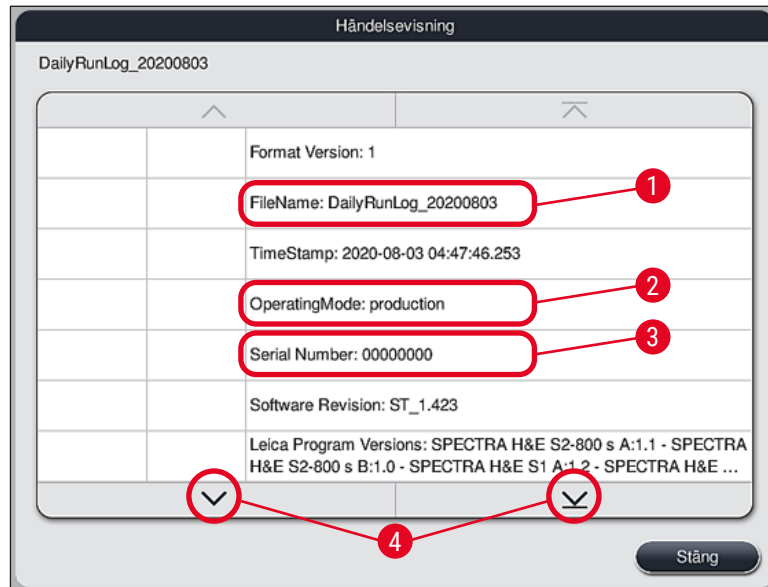


Bild 34

Inmatningarna i **Händelsevyn** får olika färgmarkeringar för att göra det enkelt för användaren att snabbt identifiera viktiga meddelanden. När man klickar på en post i listan visas det aktuella meddelandet på skärmen.

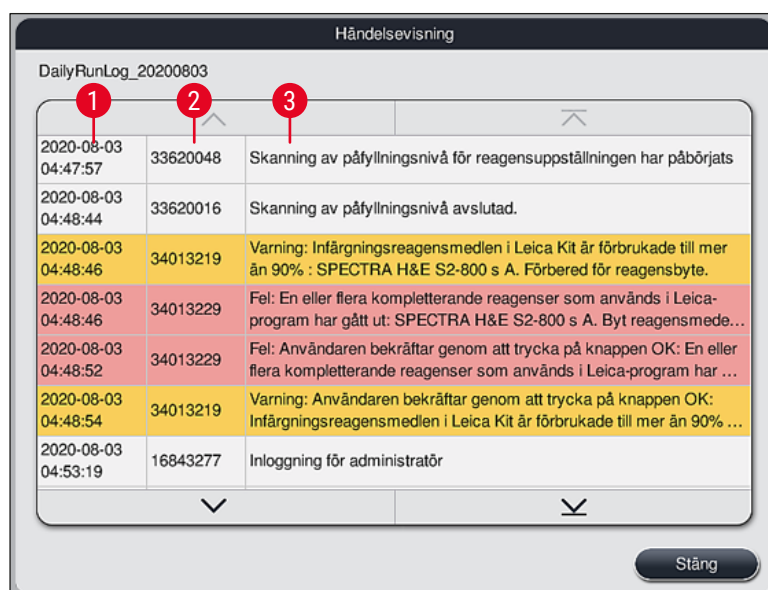


Bild 35

- 1 Tidsstämpel
- 2 Händelse-ID
- 3 Meddelande

Färg: Grå                      Indikerar en händelse eller information  
 Färg: Orange                 Indikerar ett varningsmeddelande  
 Färg: Röd                      Indikerar ett felmeddelande

## 5.8 Reagenslista



Öppna reagenslistan genom att trycka på knappen här bredvid. Listan visar alla definierade reagenser i alfabetisk ordning.

Reagens	Förk.	Klass	Ob.g	Dag	Vär.	Ins.
Acetic Acid 1%	AcetAcid1	Diff	3000	5d		
Acetic Acid 1% 2	AcetAcid12	Diff	3000	5d		
Acetic Acid 3%	AcetAcid3	Diff	3000	5d		
Acetic Acid 3%2	AcetAcid32	Diff	3000	5d		
Acid Alcohol	AcidAlc	Stain	2000	3d		
Alcian Blue	ABlue	Stain	3000	5d		✓
Alcian Yellow	AYell	Stain	3000	5d		

Bild 36

- |   |   |    |  |
|---|---|----|--|
| 1 | Reagensnamn                             | 8  | Redigera vald reagens  |
| 2 | Reagensnamnets förkortning              | 9  | Skapa en ny reagens  |
| 3 | Processklass                            | 10 | Kopiera vald reagens   |
| 4 | Maximalt antal objektglas               | 11 | Radera vald reagens  |
| 5 | Maximal användningstid                  |    |  |
|   |   | 13 | Aktivera/inaktivera <b>RHS</b>                                 |
| 7 | Mellanlägg för specialinfärgning ja/nej | 14 | Med hjälp av piltangenterna kan du bläddra genom reagenslistan |

**Obs!**

- När instrumentet installeras innehåller reagenslistan endast reagenser från de förinstallerade Leica-programmen och fyra fördefinierade utmatningsreagenser (→ Sida 71 – 5.9.5 Skapa eller kopiera ett nytt infärgningsprogram).
- Vid behov kan ytterligare reagenser läggas till i reagenslistan eller deras egenskaper ändras.
- För att skapa eller redigera en reagens måste läget "Arbetsledare" användas. I läget **Användare** är det endast möjligt att visa reagensdata.
- Reagenser som har integrerats i reagensuppställningen i aktiva program kan inte raderas från reagenslistan.

**Varning**

- **RHS**-skjutreglage: **Till – Från** (→ "Bild 36-13") gör det möjligt att slå av och på reagenshanteringssystemet = **RHS** (→ Sida 95 – 6.3 Reagenshanteringssystem (RHS)). Systemet styr övervakningen av reagensförbrukningen. Vi rekommenderar att **RHS** alltid är aktiverat och att instruktionerna för att ersätta en reagens följs. Det går inte att inaktivera reagenshanteringen för reagenser i Leica-infärgningskit.
- Om de föreskrivna intervallen inte följs kan infärgningskvaliteten påverkas negativt. **RHS** fungerar tillförlitligt endast om användaren har lagt in data korrekt i förväg.
- Tillverkaren tar inget ansvar för infärgningsresultaten om reagensdata har matats in felaktigt.
- **RHS**-data för de reagenser som är validerade av Leica samt deras beteckningar kan inte redigeras av användaren.

**Skapa en ny reagens eller kopiera en reagens****Obs!**

- En ny reagens kan skapas med knappen **Nytt** (→ "Bild 36-9") eller **Kopiera** (→ "Bild 36-10").
- För att skapa, kopiera eller redigera en reagens måste arbetsledarläget användas. I läget **Användare** är det endast möjligt att visa reagensdata.

- För att lägga till en ny reagens i reagenslistan trycker du på knappen **Nytt** (→ "Bild 36-9").
- Ett inmatningsfönster öppnas (→ "Bild 39") där du kan skapa den nya reagensen.

Bild 39

### Följande parametrar kan anges:

- Reagensnamn:** • Tryck på knappen **Reagensnamn** (→ "Bild 39-1") och använd knappsatsen på skärmen för att ange ett unikt reagensnamn som inte har använts tidigare. Du kan använda upp till 30 tecken (inklusive mellanslag).
- Förkortning:** • Tryck på knappen **Förkortning** (→ "Bild 39-2") och använd knappsatsen på skärmen för att ange en unik förkortning för reagensen (max. 10 tecken inklusive blanksteg).
- Max objektglas:** • Hjulet (→ "Bild 39-3") används för att konfigurera det maximala antalet objektglas som kan bearbetas med den här reagensen innan ett reagensbyte begärs. Med hjälp av hjulet kan värden från 1 till 3999 väljas.
- Max dagar:** • Ställ in det maximala antalet dagar (→ "Bild 39-4") som reagensen får finna sig i instrumentet genom att vrida på hjulet. Värden från 1 till 99 kan anges.
- Mellanlägg:** • Om en reagenskyvett är utrustad med ett mellanlägg för specialinfärgning (→ Sida 91 – 6.2.1 Förbereda och hantera reagenskyvetter) för att möjliggöra en mindre reagensvolym, går det endast att använda ett rack för 5 objektglas i kyvetten. För att göra detta måste du dra skjutreglaget till **Ja** (→ "Bild 39-5").
- Användning av ett rack för 30 objektglas i den här kyvetten är nu inaktiverad.



### Varning

Om du vill använda mellanlägget för specialinfärgning i en eller flera reagenskyvetter måste du dra skjutreglaget till läget **Ja**. Om skjutreglaget inte är korrekt inställt för den berörda reagenskyvetten kan det leda till att ett rack för 30 objektglas används i kyvetten, vilket orsakar allvarliga fel på utrustningen och möjlig förlust av preparat.

- Processklass:**
- Reagenserna måste tilldelas till processklasser (→ "Bild 39-6") (→ Sida 63 – 5.8.3 Processklasser) eftersom detta, tillsammans med prioritering av program, är avgörande för den automatiska beräkningen av de enskilda positionerna i reagensuppställningen (→ Sida 77 – 5.9.8 Prioritera program för att skapa reagensuppställningen).
  - Spara inmatningarna med knappen **Spara** (→ "Bild 39-7") eller stäng inmatningsfönstret med knappen **Avbryt** (→ "Bild 39-8") utan att spara ändringarna.



### Obs!

Det går inte längre att ändra processklassen i efterhand när man har sparat första gången. Reagensen kan bara raderas och skapas på nytt, eller kopieras och sedan ändras.

#### 5.8.1 Kopiera en reagens



### Obs!

Om en reagens med olika parametrar används i HistoCore SPECTRA ST kan en befintlig reagens kopieras.

- Markera den reagens som ska kopieras i reagenslistan (→ "Bild 36") genom att trycka lätt på den. Tryck sedan på knappen **Kopiera** (→ "Bild 36-10").
- Ett inmatningsfönster öppnas (→ "Bild 39") där du kan skapa den nya reagensen.
- Använd det föreslagna reagensnamnet eller skriv över det med ett nytt reagensnamn.
- Den föreslagna förkortningen kan användas eller skrivas över med en ny förkortning.
- Ändra parametrarna för reagenserna vid behov på motsvarande sätt eller använd de befintliga.
- Spara inmatningarna med knappen **Spara** (→ "Bild 39-7") eller stäng inmatningsfönstret med knappen **Avbryt** (→ "Bild 39-8") utan att spara ändringarna.

#### 5.8.2 Ändra RHS-data för en reagens



### Obs!

Om du ska göra ändringar i **RHS**-data (**Max objektglas** och/eller **Max dagar**) måste du utföra följande steg så att ändrade inställningar visas korrekt i stationsinformationen (→ Sida 102 – Bild 78).

- Markera den reagens som ska ändras i reagenslistan (→ "Bild 36") genom att trycka lätt på den. Tryck sedan på knappen **Redigera** (→ "Bild 36-8").
- Använd hjulen för att ange nya värden för **Max objektglas** (→ "Bild 39-3") och/eller **Max dagar** (→ "Bild 39-4") och bekräfta ändringarna med **Spara**.
- Observera efterföljande informationsmeddelande och bekräfta med **OK**.
- Öppna sedan reagensuppställningen och tryck på den tillhörande reagensstationen för att välja den.
- I stationsinformationen som visas, tryck på knappen **Uppdatera reagens** (→ "Bild 78-10").
- Visningen av stationsinformationen stängs, **RHS**-data har sparats.

## 5.8.3 Processklasser

**Varning**

Processklasser måste tilldelas korrekt. Annars finns det en risk för fördröjda arbetsflöden i infärgningsprocesserna samt avvikande eller bristfälliga infärgningsresultat.

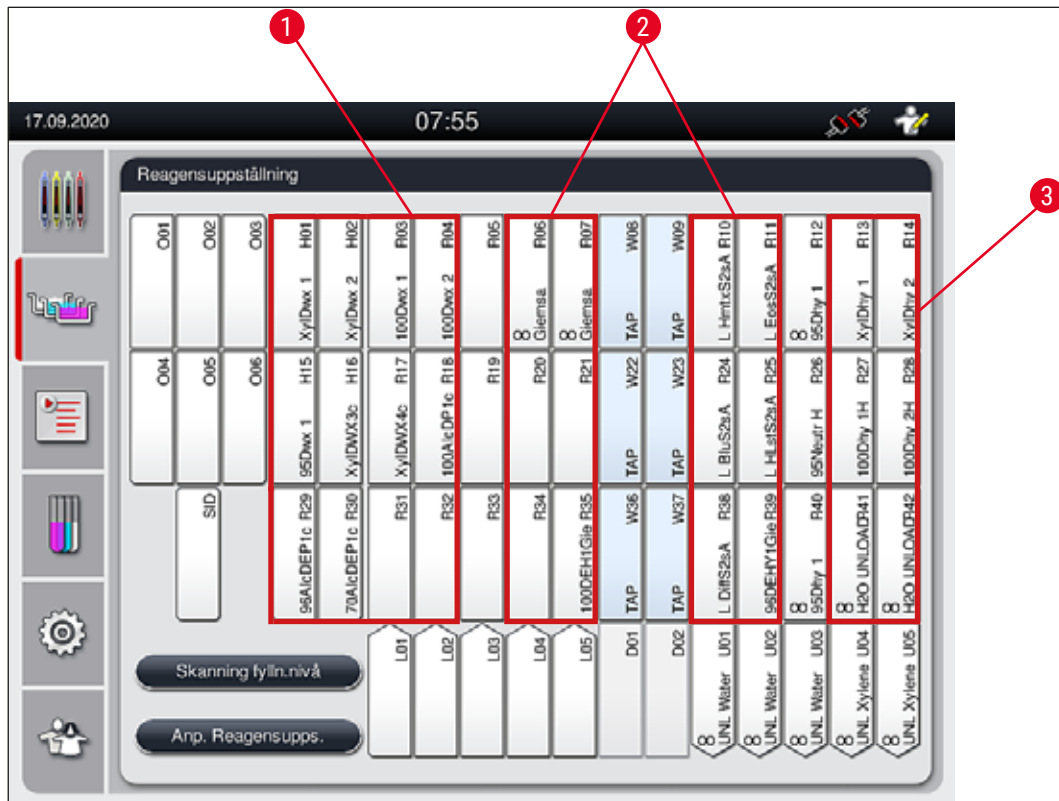


Bild 40

- 1 Den föredragna zonen för avväxningsreagenser är vänster sida av reagensuppställningen.
- 2 Den föredragna zonen för infärgningslösningar eller differentieringslösningar är de två raderna till vänster och höger om sköljvattenstationerna.
- 3 Den föredragna zonen för dehydratiserande reagenser är höger sida av reagensuppställningen.

**Obs!**

Det går inte att programmera två på varandra följande sköljvattensteg (sköljvattensteg till destillerat vatten eller omvänt). Om denna ordningsföljd ska gälla för programstegen måste ett av stegen definieras som reagens med processklasstilldelning (t.ex. neutralisering).

## 5 Användning

Processklass	Beskrivning	Exempel på reagenser
Avvaxning (Dewaxing)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lösningsmedel som avlägsnar paraffinet eller som hör till den efterföljande sjunkande alkoholserien, i början av ett infärgningsprogram.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Xylen</li><li>• Xylensubstitut</li><li>• Sjunkande alkoholserie: 100 %, 95 %, 70 % alkohol</li></ul>
Neutraliserande (Neutralising)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reagenser som har ingen eller endast liten påverkan på färgbeläggningen respektive färgutvecklingen och som är närmast pH-neutrala.</li><li>• Exempel: Steg med destillerat vatten före ett infärgningssteg.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Destillerat (avjoniserat)/ färskvatten (inte i kranvattenstationer!)</li><li>• Thinner med destillerat vatten</li><li>• Vattenhaltiga alkohollösningar (t.ex. 70 % etanol)</li></ul>
Infärgning (Staining)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Infärgningslösningar</li><li>• Betning</li><li>• Oxidationsmedel (t.ex. PAS-infärgningens perjodsyra)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alla infärgningslösningar</li><li>• Betning och oxidationsmedel</li></ul>
Differentiering (Differentiating)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Reagenser som avlägsnar överflödigt färg från produkten.</li><li>• Reagenser som är nödvändiga för färgutvecklingen eller ett färgomslag.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• HCL-lösning (alkohol- eller vattenhaltig)</li><li>• Ättiksyra</li><li>• Ammoniakvatten</li><li>• Scott´s Tap water</li><li>• Bluing Solution</li><li>• Blue Buffer</li><li>• Litiumkarbonat</li><li>• Alkoholer (olika koncentrationer)</li></ul>



Processklass	Beskrivning	Exempel på reagenser
Dehydratiserande (Dehydrating)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reagenser i den stigande alkoholserien, i slutet av ett infärgningsprogram.</li> <li>Efterföljande steg med lösningsmedel (xylen eller xylensubstitut) i slutet av ett infärgningsprogram, för förberedelse av täckglasappliceringen.</li> </ul>	Dehydratisering: <ul style="list-style-type: none"> <li>Stigande alkoholserie: 70 %, 95 %, 100 % alkohol</li> </ul> Förberedelse av täckglasappliceringen: <ul style="list-style-type: none"> <li>Xylen</li> <li>Xylensubstitut</li> </ul>
Utmatare (Unloader)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reagens som särskilt har definierats av användaren som ett sista programsteg och som kan tilldelas en utmatningsstation (t.ex. för ett xylensubstitut och/eller ytterligare en alkohol etc.). Det rekommenderas att använda <b>UNL</b> i reagensnamnet och förkortningen för att göra den enklare att identifiera.</li> </ul>	Fördefinierade i reagenslistan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Alkohol (<b>UNL Alcohol</b>)</li> <li>Xylen (<b>UNL Xylene</b>)</li> <li>Vatten (<b>UNL Water</b>)</li> <li>Tom (<b>UNL Empty</b>)</li> </ul> Andra användardefinierade: <ul style="list-style-type: none"> <li>Xylensubstitut</li> <li>och andra reagenser</li> </ul>
Ingen klass (no class)	Reagenser som inte kräver någon särskild tilldelning i reagensuppställningen	



### Varning

Observera följande när du förbereder täckglasappliceringen:

- Det lösningsmedel som används i slutet av programmet och i den följande bearbetningen måste vara kompatibelt med monteringsmedlet.



### Obs!

Det är viktigt att tilldelningen till processklasserna är korrekt för att kunna beräkna en optimal reagensuppställning och för att undvika långa transportsträckor och -tider.

Följande grundläggande riktlinjer för att skapa en reagensuppställning automatiskt bör följas:

- Överföringen från det vänstra till det högra kyvettfältet ska om möjligt ske via en sköljvattenstation.
- Program som inte innehåller något steg med en sköljvattenstation använder sig av den torra överföringsstationen för denna överföring.
- Infärgningsreagenser som kräver ett efterföljande sköljvattensteg ska placeras nära sköljvattenkyvetterna (→ "Bild 40").
- Reagenser som har tilldelats **Ingen klass** som processklass kan placeras i vilken position som helst när reagensuppställningen skapas automatiskt.
- I stället för tilldelningen **Ingen klass** rekommenderar vi att dessa reagenser tilldelas till processklassen **Different**. eller **Neutralis**. så att angränsande stationer i reagensuppställningen kan tas med i beräkningen för programstegsserier.

## 5 Användning

### 5.9 Infärgningsprogram



Listan över infärgningsprogram som är installerade på HistoCore SPECTRA ST kan öppnas med hjälp av knappen **Program**.

Det finns två olika typer av infärgningsprogram:

- Förinstallerade Leica-infärgningsprogram (→ Sida 68 – 5.9.2 Leica-infärgningsprogram (förinstallerade))
- Användardefinierade infärgningsprogram (→ Sida 71 – 5.9.4 Användardefinierade infärgningsprogram)



Bild 41

- 1 En bock i den här kolumnen innebär att programmet tas med i den aktuella reagensuppställningen.
- 2 Tilldelad programfärg
- 3 Programförkortning
- 4 Programnamn
- 5 Förinstallerat Leica-program
- 6 Redigera program
- 7 Skapa nytt program
- 8 Kopiera valt program
- 9 Radera valt program
- 10 Tilldela valt program en färg
- 11 Definiera reagensuppställning

## 5.9.1 Tilldela ett infäringsprogram en rackhandtagsfärg

**Obs!**

Varje program måste tilldelas en rackhandtagsfärg.  
För att tilldela rackhandtagsfärger till program krävs användarläget **Arbetsledare**.

- För att tilldela en rackhandtagsfärg till ett program trycker du på motsvarande program i programlistan (→ "Bild 41") för att markera det.
- Om du trycker på knappen "Färg" (→ "Bild 41-10") visas ett urvalsfält (→ "Bild 42") där du kan tilldela det valda programmet en rackhandtagsfärg.



Bild 42

**Obs!**

Alla tillgängliga färger visas i (→ "Bild 42"). Om det står en förkortning i färgfältet har ett program redan tilldelats den färgen.

Om en redan tilldelad färg väljs visas en dialogruta med en säkerhetsfråga om den befintliga tilldelningen ska upphävas. Detta kan bekräftas med **OK** eller avbrytas med **Avbryt**.

- Välj en färg som ännu inte har tilldelats genom att trycka på den.
- Med **Spara** tilldelar du färgen och stänger dialogrutan.
- Med **Avbryt** stängs dialogrutan utan att ändringarna tillämpas.

**Obs!**

Om det inte finns tillräckligt många tillgängliga rackhandtag i en färg kan ett rackhandtag i vitt, den så kallade **JOKERFÄRGEN**, användas.

När du lägger in ett rack med ett vitt handtag öppnas ett programvalsfönster där ett färgprogram som är aktiverat i reagensuppställningen måste tilldelas till det vita handtaget (endast för detta program).

Om överföringsstationen är definierad som den sista stationen i det tilldelade programmet måste det vita racket också tilldelas en lämplig parameteruppsättning för täckglasappliceringen i HistoCore SPECTRA CV. Användaren uppmanas att göra så i ett parametervalsfönster.

När det valda programmet är avslutat slocknar denna tilldelning igen.

## 5 Användning

### 5.9.2 Leica-infärgningsprogram (förinstallerade)

#### Beteckningar på reagenskiten



#### Obs!

I följande avsnitt förenklas HistoCore SPECTRA ST-infärgningssystemen och programmen som tillverkas av Leica i enlighet med användargränssnittet och namnges med beteckningen på Leica Reagent Kit och Leica-infärgningsprogrammen.

Nya Leica-infärgningsprogram kan beställas från den ansvariga Leica-försäljningsavdelningen.



#### Varning

Bruksanvisningen som medföljer Leica Reagent Kit innehåller viktig information om förinställda värden, loggar och nödvändiga tillägg till reagensuppställningen som måste följas noggrant. Följ bruksanvisningen.

För att importera nya Leica-infärgningsprogram följer du instruktionerna i kapitel (→ Sida 52 – 5.7.7 Datahantering). Nya Leica-program läggs till i den befintliga programlistan (→ Sida 66 – 5.9 Infärgningsprogram). Ingen data raderas.

- Leica-infärgningsprogram förinstalleras på fabriken, där deras funktion och infärgningsegenskaper testas. Programmen garanterar en jämn infärgningskvalitet för ett angivet antal objektglas.
- Leica-infärgningsprogram markeras med ett kursivt Leica-*L* (→ "Bild 41-5") i kolumnen längst till höger.



Bild 43

**Obs!**

- Med Leica-infärgningsprogram måste det specifika Leica Reagent Kit användas.
- Leica-infärgningsprogram kan inte kopieras, vilket innebär att ett Leica-infärgningsprogram endast kan läggas till i programlistan en gång.
- De enskilda programstegen i Leica-infärgningsprogrammet kan inte visas, redigeras, kopieras eller raderas.
- En rackhandtagsfärg (→ "Bild 43-3") kan tilldelas till Leica-infärgningsprogrammet.
- Om Leica-infärgningsprogrammet tillåter det kan ugnsstegets aktiveras eller inaktiveras i Arbetsledarläget (→ "Bild 43-1") och utmatningsstation eller överföringsstation (→ "Bild 43-2") kan definieras som sista steg. **Överföringsstation** visas endast om HistoCore SPECTRA ST används med en HistoCore SPECTRA CV som arbetsstation.
- Reagenser (t.ex. xylen, alkohol) som används i ett Leica-infärgningsprogram kan inte raderas.

**Varning**

- Om ett steg för avlägsnande av paraffin inte är det första steget i Leica-infärgningsprogrammet får ugnsstegets (→ "Bild 43-1") (→ "Bild 44-1") inte aktiveras, eftersom det kan leda till att preparaten förstörs!
- Den fastställda ugnstemperaturen för Leica-infärgningsprogrammen används för användardefinierade infärgningsprogram och kan inte anpassas individuellt.

**Flera installationer och användning av Leica-infärgningsprogram****Obs!**

Vissa av Leica-infärgningsprogrammen kan användas parallellt med olika inställningar (infärgningsintensitet, ugnssteg) (→ Sida 69 – 5.9.3 Anpassa Leica-H&E-infärgningsprogram). De här programmen har förinstallerats två gånger i programlistan (→ "Bild 41"). Förkortningarna för dessa dubbelt förinstallerade hematoxylin-eosin-infärgningsprogram från Leica är S1A och S1B, eller S2A och S2B. Detta för att lättare kunna skilja dem åt. Dessa program innehåller exakt samma programsteg. Om två identiska program integreras i reagensuppställningen måste även två identiska Leica-infärgningskit skannas och fyllas på.

**5.9.3 Anpassa Leica-H&E-infärgningsprogram****Obs!**

- Med Leica-H&E-färgningsprogrammet kan infärgningsintensiteten för hematoxylin och eosin justeras i Arbetsledarläget. Andra Leica-infärgningsprogram tillåter inga justeringar av infärgningsintensiteten.
- Om Leica-infärgningsprogrammet tillåter det kan ugnsstegets aktiveras eller inaktiveras (→ "Bild 44-1").
- För Leica-infärgningsprogram kan överföring till en ansluten automatisk täckglasapplikator HistoCore SPECTRA CV väljas som sista steg om man väljer **Överföringsstation** (→ "Bild 44-4") eller **Utmatare** och överför det redan infärgade racket till utmatningsfacket (→ "Bild 44-3").
- Justeringar och ändringar av Leica-infärgningsprogram och användardefinierade program kan endast konfigureras om inga infärgningsprocesser är aktiva och alla rack har avlägsnats från instrumentet.



Bild 44



### Varning

När användaren har justerat infärgningsintensiteten måste infärgningsresultaten kontrolleras med ett kontrollobjektglas med representativa vävnadsprover innan inställningarna används för att utföra kliniska diagnoser av patientpreparat.

Välj Leica-programmet i programlistan och tryck på **Redigera** (→ "Bild 41-6"). En dialogruta öppnas där du kan konfigurera inställningarna.

- Ställ in värdena för infärgningsintensitet genom att vrida på hjulen (→ "Bild 44-2"). Lägre numeriska värden ger en ljusare infärgningsintensitet; högre numeriska värden ger en mörkare infärgningsintensitet.
- En handtagsfärg måste tilldelas till programmet (→ Sida 67 – 5.9.1 Tilldela ett infärgningsprogram en rackhandtagsfärg).
- Använd **Spara** för att spara inställningarna och stänga dialogrutan.
- Använd **Avbryt** för att stänga dialogrutan utan att spara ändringarna.

### 5.9.4 Användardefinierade infärgningsprogram



#### Varning

- Leica kan varken kontrollera eller ansvara för användardefinierade program.
- Användaren måste testa dessa infärgningsprogram i labbet med de olika reagenser som används och de inställda temperaturerna. För detta ändamål måste infärgningsresultatet först kontrolleras med ett provförlopp (testsnitt) innan programmet används på patientprover för klinisk diagnostik.



#### Obs!

Ett nytt program kan skapas med knapparna **Nytt** (→ "Bild 45-1") och **Kopiera** (→ "Bild 45-2"). För att skapa, kopiera eller redigera ett program måste läget "Arbetsledare" användas. I läget **Användare** kan man endast visa programstegen.

### 5.9.5 Skapa eller kopiera ett nytt infärgningsprogram

- Tryck på **Nytt** (→ "Bild 45-1") i listvyn för program.



Bild 45

- Ett fönster för ett nytt program öppnas (→ "Bild 46").

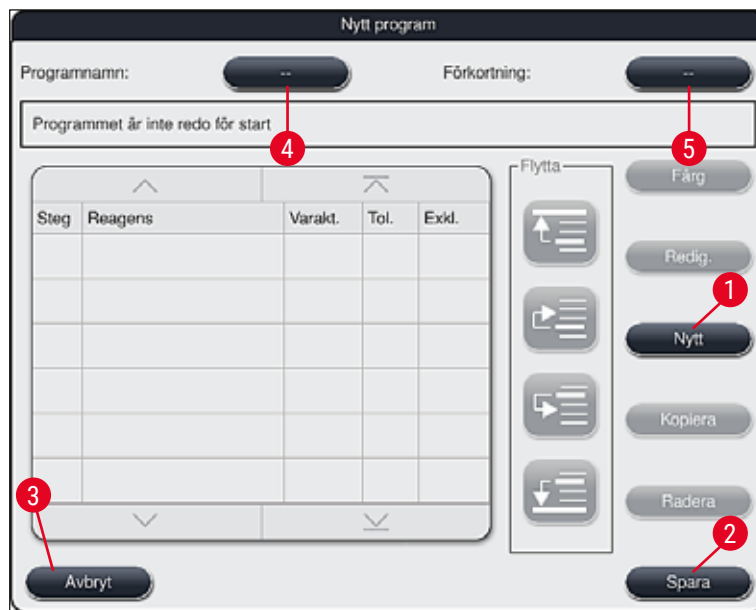


Bild 46

Upptill i detta fönster är två tomma tangenter avbildade som är avsedda för programnamnet och dess förkortning.

- Tryck på knappen -- bredvid **Programnamn**. beteckning (→ "Bild 46-4"). Ett inmatningsfönster med knappsats visas.
- Ange programnamnet och bekräfta namnet med **OK**.

Gör på samma sätt som ovan för **Förkortning** (→ "Bild 46-5").



### Obs!

- För att skapa ett nytt infärgningsprogram lägger du till flera programsteg efter varandra till programmet.
- Obs! Användardefinierade program kan inte sparas med beteckningen **SPECTRA** som programnamn. Ett informationsmeddelande informerar användaren om detta om hen försöker spara. Det går att spara först när ett annat programnamn har angetts.



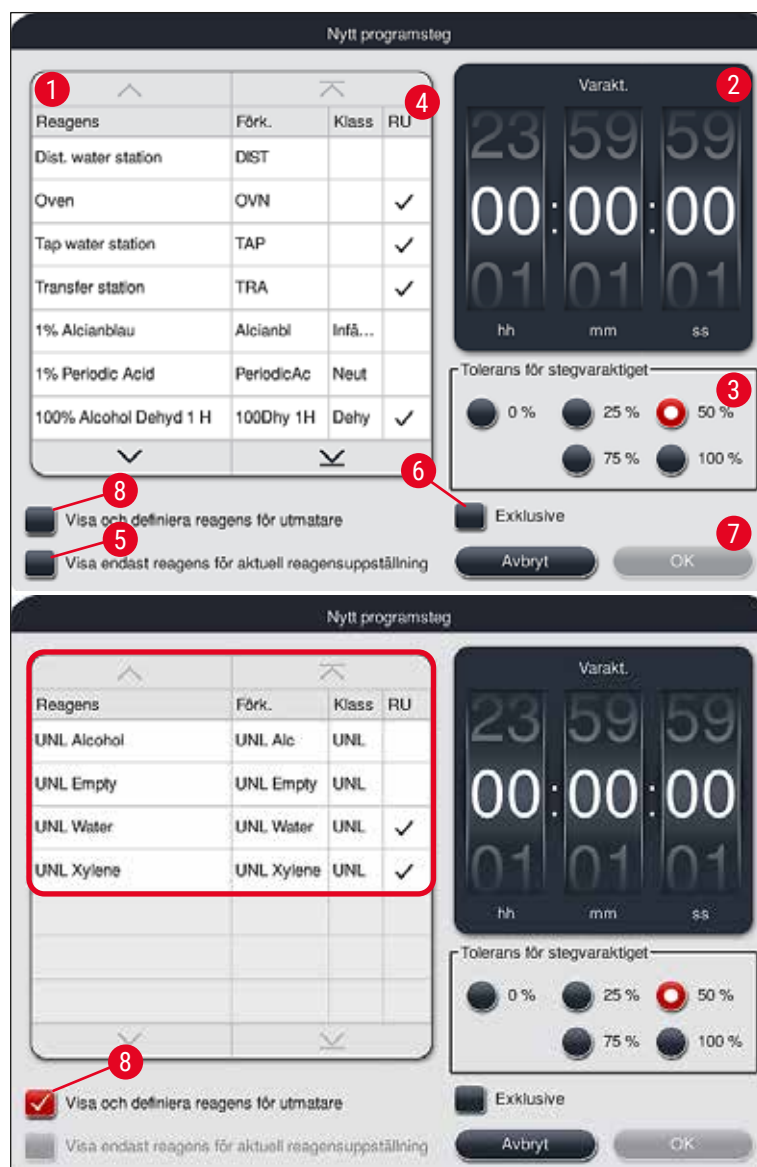


Bild 47

- När ett nytt program har skapats trycker du på knappen **Nytt** (→ "Bild 46-1").
- Ett fönster öppnas där du kan ange programsteget (→ "Bild 47").
- De reagenser som redan har definierats av användaren visas i en lista till vänster (→ "Bild 47-1"). Om du väljer en reagens markeras den.
- Vrid på hjulen (→ "Bild 47-2") till höger för att ange reaktionstiden (tt/mm/ss) för preparaten i reagensen.
- Det giltiga inställningsområdet sträcker sig från 1 sek. upp till 23 tim. 59 min. och 59 sek.
- Här konfigureras den tillåtna **Toleransen** (→ "Bild 47-3") för steget. Om ett exakt programsteg krävs som inte tillåter någon tidsmässig utökning av den angivna tiden måste toleransen ställas in på 0 %. Toleransen kan väljas i steg om 25 % upp till ett maximalt överskridande med 100 %, dvs. instrumentet kan vid behov låta steget ta dubbelt så lång tid som den angivna tiden.



### Obs!

De enskilda programstegens varaktighet består av de programmerade stegtiderna plus de inställda toleranserna. Om toleranser > 0 % ställs in för ett program kan återstående stationstider och programmets preliminära återstående tid komma att överskridas.

### Kopiera ett program



### Obs!

Om ett befintligt program med andra parametrar ska användas kan programmet kopieras.

- Markera det program som ska kopieras i listvyn (→ "Bild 45") genom att trycka lätt på det. Tryck sedan på **Kopiera** (→ "Bild 45-2").
- Ett inmatningsfönster öppnas (→ "Bild 46") där du kan skapa det nya programmet.
- Använd det föreslagna programnamnet eller skriv över det med ett nytt programnamn.
- Ange därefter en förkortning.
- Ändra/redigera de enskilda stegen eller lägg till nya programsteg efter behov (→ "Bild 46-1") (→ Sida 74 – 5.9.6 Infoga eller kopiera ett nytt programsteg).
- Spara inmatningarna med knappen **Spara** (→ "Bild 46-2") eller stäng inmatningsfönstret med knappen **Avbryt** (→ "Bild 46-3") utan att spara ändringarna.

### 5.9.6 Infoga eller kopiera ett nytt programsteg

#### Infoga ett nytt programsteg



### Obs!


En hög tidstoleransinställning rekommenderas om det inte förväntas leda till några negativa effekter på infärgningsresultatet. Det innebär nämligen att instrumentet ges större utrymme att tidsmässigt stämma av steg i flera program som pågår samtidigt.

- Om det finns en bock i kolumnen **RU** (→ "Bild 47-4") innebär det att reagensen redan är integrerad i reagensuppställningen.
- För att endast visa reagenser som redan används aktivt i reagensuppställningen markerar du radioknappen **Visa endast reagens för aktuell reagensuppställning** (→ "Bild 47-5").
- För att endast visa reagenser för utmatningsfack markerar du radioknappen **Visa och definiera reagens för utmatare** (→ "Bild 47-8").
- Om kryssrutan **Exklusiv** (→ "Bild 47-6") är markerad kan den valda reagensen endast användas för det skapade programmet och inte i andra program.
- Programstegets inmatning slutförs med **OK** (→ "Bild 47-7").
- Allt efter behov kan ytterligare programsteg läggas till på samma sätt tills samtliga infärgningsprocessteg i programmet är avbildade.

**Obs!**

Ett program måste alltid avslutas med ett sista målstationssteg. Som sista steg måste utmatningsfacket eller, om HistoCore SPECTRA ST är permanent ansluten som arbetsstation med en HistoCore SPECTRA CV, överföringsstationen väljas.

Ett informationsmeddelande (→ "Bild 48") indikerar att det inte går att spara programmet utan att ange målstationen som det sista steget.

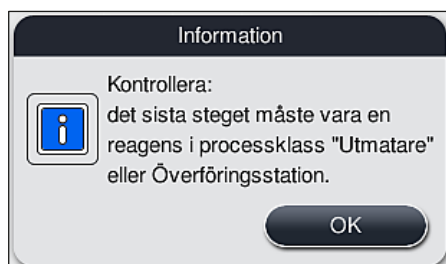**Bild 48****Kopiera ett programsteg****Obs!**

När ett nytt program skapas eller ett befintligt ändras kan ett programsteg med redan inställda parametrar kopieras och anpassas, om reagensen förekommer mer än en gång i reagenslistan.

- Markera respektive programsteg genom att trycka lätt på det och sedan trycka på knappen **Kopiera** (→ "Bild 49-5").
- Fönstret **Redigera program** (→ "Bild 49") öppnas.
- Om en reagens har valts som endast förekommer en gång informerar ett informationsmeddelande användaren om detta. I detta fall måste en annan reagens väljas för programsteget.
- Parametrarna (Tolerans, Varaktighet och Exklusiv) för det ursprungligen valda programsteget bibehålls.
- Ändra vid behov parametrarna för programsteget på motsvarande sätt eller använd de befintliga och tryck på knappen **OK**.
- Programsteget placeras i slutet av programmet.
- Sortera om programsteget enligt beskrivningen i (→ Sida 76 – 5.9.7 Sortera om programsteg).

## 5 Användning

### 5.9.7 Sortera om programsteg

- När ett programsteg väljs blir det rödmarkerat. Nu är **Flytta**-knapparna (→ "Bild 49-1") (→ "Bild 49-2") (→ "Bild 49-3") (→ "Bild 49-4") aktiva.

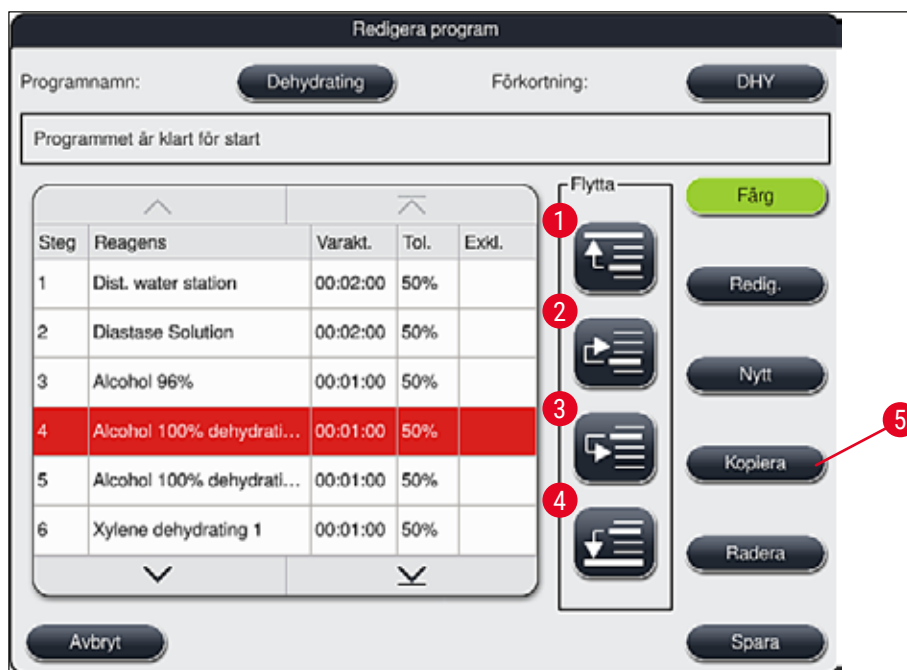


Bild 49

- Tryck för att flytta det valda programsteget till första raden.
- Tryck för att flytta det valda programsteget en rad uppåt.
- Tryck för att flytta det valda programsteget en rad nedåt.
- Tryck för att flytta det valda programsteget till sista raden.



#### Varning

Om ett ugnssteg används som första programsteg får det under inga omständigheter finnas något lättantändligt lösningsmedel i laddningsfackets laddningsstation.

Det kan nämligen medföra brand i ugnen och leda till brännskador på användaren, förlust av prover och skador på instrument och utrustning.

- Ändringarna kan sparas med knappen **Spara** (→ "Bild 49"). Om man trycker på knappen **Avbryt** raderas ändringarna.

## 5.9.8 Prioritera program för att skapa reagensuppställningen

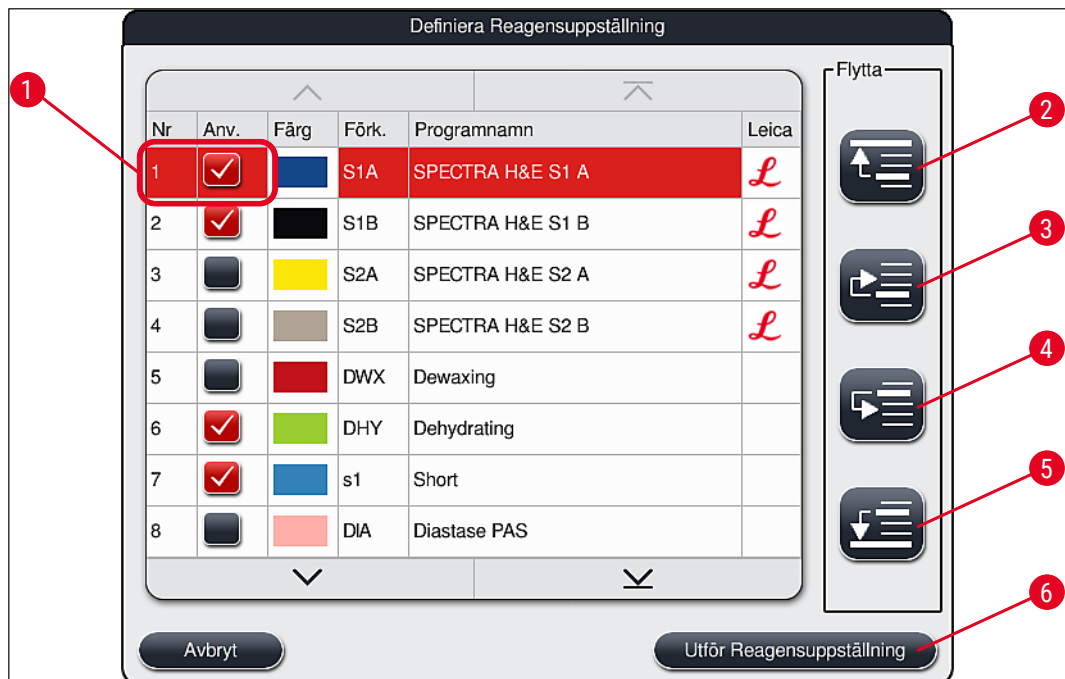


Bild 50

När alla önskade infärgningsprogram har matats in måste reagensuppställningen genereras. För att göra detta går du tillväga på följande sätt:

- I det första steget anger **arbetsledaren** vilka program som ska inkluderas i reagensuppställningen. Programmen aktiveras med hjälp av radioknapparna (→ "Bild 50-1").
- Programmets position avgör dess prioritet för integreringen i reagensuppställningen.

**Obs!**

## Prioritet:

- Det är bara positioner för användardefinierade program som kan flyttas. Leica-infärgningsprogram står alltid på de översta positionerna i reagenslistan.
- De användardefinierade programmen med låga positionsnummer är lättare att inkludera än program med höga positionsnummer när reagensuppställningen skapas.
- Det rekommenderas att användardefinierade program med hög provgenomströmning placeras i början av programlistan, i anslutning till Leica-infärgningsprogrammen.

Om ett infärgningsprogram ska tilldelas en högre eller lägre prioritet markerar du programmet i listan och flyttar det högre upp eller längre ner i listan med hjälp av **Flytta**-knapparna:



- Programmet flyttas till högst upp i listan (→ "Bild 50-2")



- Programmet flyttas en rad uppåt (→ "Bild 50-3")

## 5 Användning



- Programmet flyttas en rad nedåt (→ "Bild 50-4")



- Programmet flyttas till sist i listan (→ "Bild 50-5")

- Reagensuppställningen måste skapas om utifrån den nya prioriteringsordningen (→ Sida 78 – 5.9.9 Skapa reagensuppställningen).

### 5.9.9 Skapa reagensuppställningen



#### Obs!

Placeringen av reagensstationerna i instrumentet beräknas med hjälp av de prioriterade infärgningsprogrammen (→ Sida 77 – 5.9.8 Prioritera program för att skapa reagensuppställningen).

I samband med det tas hänsyn bland annat till att

- Leica-infärgningsprogram inkluderas först,
- infärgnings- och differentieringslösningar placeras så nära sköljvattenkyvetterna som möjligt,
- programprioriteringen och processklasstilldelningen beaktas,
- sekventiella processreagenser måste placeras i närheten av varandra.

- Välj de program som ska ingå i reagensuppställningen genom att trycka på knappen **Definiera Reagensuppställning** (→ "Bild 45-3").
- Markera och ange prioritet för respektive program. Tryck sedan på knappen **Utför Reagensuppställning** (→ "Bild 50-6") eller på knappen **Avbryt** för att återgå till val av program.



#### Varning

Läs det informationsmeddelande (→ "Bild 51") som visas efter det att knappen **Definiera Reagensuppställning** har tryckts in. Tryck på **Fortsätt** för att visa resultatet av beräkningen i reagensuppställningen.

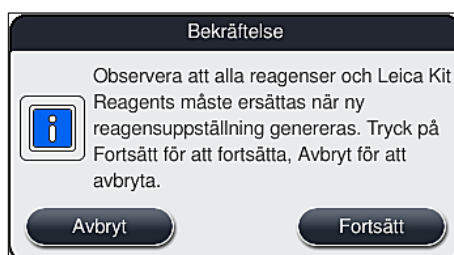


Bild 51

**Obs!**

- Om fler program har valts än vad som kan integreras i reagensuppställningen informeras användaren i fönstret **Resultat av reagensuppställningsgenerering** (→ "Bild 52"). Program som har integrerats markeras med en bock i kolumnen **Redo** (→ "Bild 52-1").
- För program som inte kan integreras anges orsaken (→ "Bild 52-2") i kolumnen **Ej redo, orsak** (→ "Bild 52-3").
- Observera att listan måste kontrolleras ända till slutet.

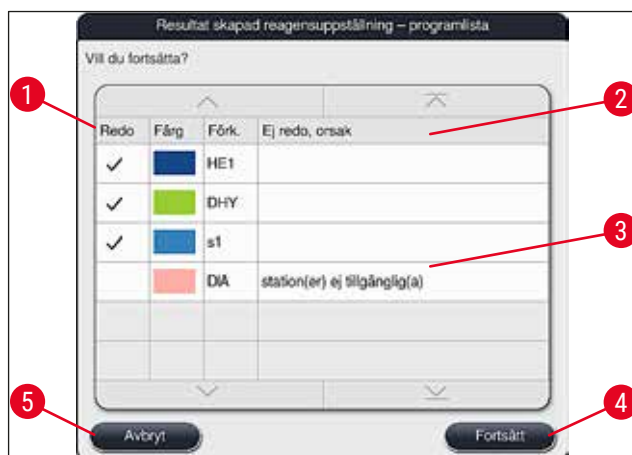


Bild 52

- Tryck på knappen **Fortsätt** (→ "Bild 52-4") för att gå vidare eller på knappen **Avbryt** (→ "Bild 52-5") för att återgå till val av program (→ "Bild 50").

**Varning**

Även bruksanvisningen som medföljer Leica Reagent Kit måste läsas innan Leica-reagenser skannas!

**5.9.10 Fylla på reagenser efter det att reagensuppställningen har skapats****Obs!**

- Skapa reagensuppställningen och fortsätt enligt beskrivningen (→ Sida 78 – 5.9.9 Skapa reagensuppställningen).
- Om reagensuppställningen som visas ska sparas utan konfigurering av reagenspåfyllning trycker du på knappen **Spara** (→ "Bild 53-3"). Den sparade reagensuppställningen kan sedan öppnas i reagensuppställningsmenyn. Vid behov kan ytterligare justeringar göras i den här meny (→ Sida 86 – 5.9.11 Anpassa en reagensuppställning). Fyllningen av reagenskyvetten kan också konfigureras så att den sker vid en önskad tidpunkt med hjälp av reagensuppställningsmenyn (→ Sida 97 – 6.4 Stationsinformation).

## 5 Användning



### Varning

- Det är obligatoriskt att alla kyvetter, i synnerhet de för utmatningsstationerna, fylls över den lägsta fyllnadsnivån (→ Sida 91 – 6.2.1 Förbereda och hantera reagenskyvetter). Undantaget är utmatningsstationerna, med tilldelningen UNL Empty.
- Om man använder duplicerade utmatningsstationer kan programmet dock vara startklart om endast en station är tillräckligt fylld. Detta kan ha en negativ inverkan på utmatningskapaciteten och leda till störningar av infärgningsprocessen.
- Tillgängligheten för utmatningsstationerna måste kontrolleras efter skanning av påfyllningsnivå och korrigeras vid behov.

- Efter att mjukvaran har beräknat reagensuppställningen med hjälp av de prioriterade programmen visas en översikt över resultaten på skärmen (→ "Bild 53").



### Obs!

- Om inga Leica-program har integrerats i reagensuppställningen ser skärmen (→ "Bild 53") annorlunda ut än den som visas här. I detta fall kan reagenserna fyllas på enligt beskrivningen (→ Sida 82 – Fylla på reagenser).
- Om Leica-program ska integreras i reagensuppställningen tas minst 2 utmatningsstationer med tilldelningen **UNL Xylene** i position **U04** och **U05** med i beräkningen när reagensuppställningen genereras.
- Om Leica-program har integrerats i reagensuppställningen måste reagensen **95 % alkoholdehyd 1** först dupliceras. Den berörda stationen är markerad med en blå ram i reagensuppställningen (→ "Bild 53-1").
- Reagensen **95 % alkoholdehyd 1** som ska dupliceras visas med förkortningen **"95Dhy1"** i reagensuppställningen.

Resultat av reagensuppställninggenerering

96AcDEP1c R29	H15	Xy/Dwv 1	H01
70AcDEP1c R30	H16	Xy/Dwv 2	H02
R31	Xy/Dwv 4c	100Dwv 1	R03
R32	100AcDP1c	100Dwv 2	R04
R33	R19		R05
R34	R20	Gemssa	R06
R35	R21	Gemssa	R07
TAP	W36	TAP	W08
TAP	W37	TAP	W09
L DIFS2sA	R38	L HmixS2sA	R10
UNL Water	U01	L Blus2c	R24
UNL Water	U02	L HListS2sA	R05
UNL Water	U03	95Neutr H	R26
UNL Xylene	U04	100Dhy 1H	R27
UNL Xylene	U05	100Dhy 2H	R28

För godkända HistoCore SPECTRA H&E-program måste 95% Alcohol Dehyd 1 (95Dhy 1) dupliceras funktionen Anp. Reagensups.

2

3

Avbryt Anp. Reagensups. Fyll reagens Spara

Bild 53



Duplicera reagensen 95Dhy1**Obs!**

Om det inte finns någon tillgänglig reagensstation baserat på de valda programmen kan du ta hjälp av Leicas försäljningsavdelning och försöka optimera användardefinierade program.

Så här gör du för att duplicera reagensen **95Dhy1**:

1. Tryck på knappen **Anp. Reagensupps.** (→ "Bild 53-2").
2. Observera alltid det efterföljande informationsmeddelandet och bekräfta det med **OK**. Ett nytt fönster, **Urklipp** (→ "Bild 54"), öppnas.

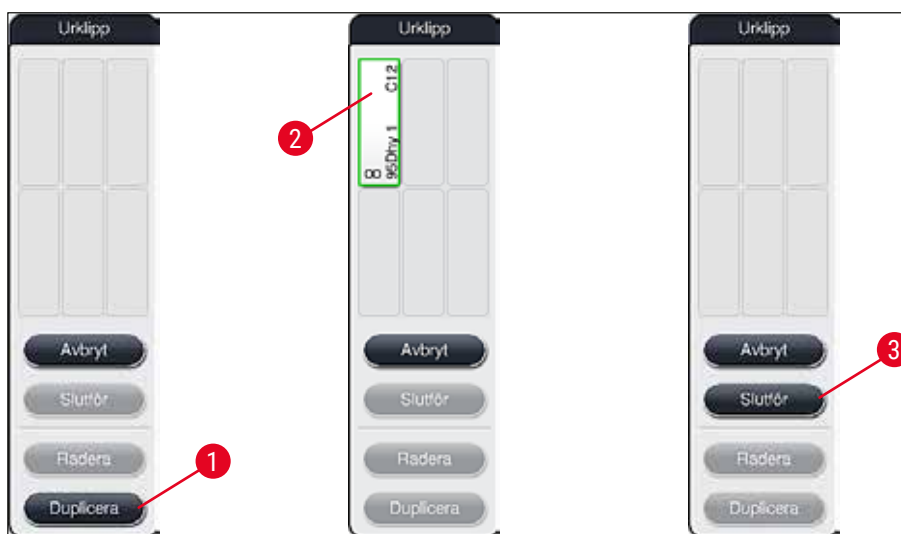


Bild 54

3. Markera stationen **95Dhy1** (→ "Bild 53-1") i reagensuppställningen genom att trycka lätt på den (stationen är markerad i grönt). Klicka sedan på **Duplicera** (→ "Bild 54-1") i fönstret **Urklipp**. En identisk kopia av den valda stationen visas nu i **Urklipp** (→ "Bild 54-2").
4. Markera stationen i "**Urklipp**" och klicka sedan på en ledig position i "**Reagensuppställning**". Den duplicerade stationen flyttas från urklippsfönstret till reagensuppställningen (→ "Bild 55-1").

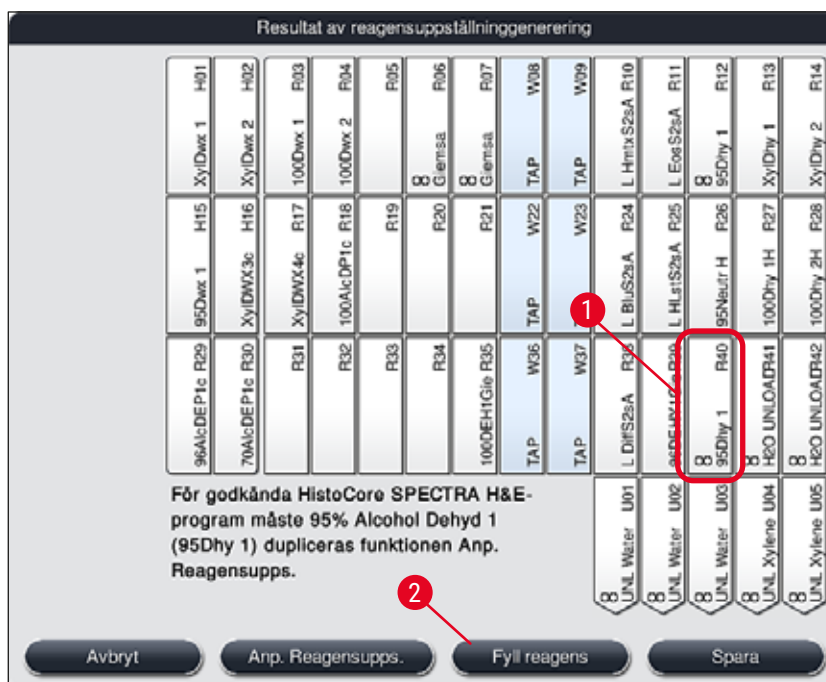


Bild 55

5. Tryck på **Slutför** (→ "Bild 54-3") i **Urklipp** och bekräfta det efterföljande informationsmeddelande med "Ja" för att tillämpa ändringen och stänga urklippsfönstret.

✓ Den duplicerade stationen **95Dhy1** och den ursprungliga stationen markeras med en oändlighetssymbol (∞) i reagensuppställningen (→ "Bild 55-1").

### Fylla på reagenser

1. Tryck på knappen **Fyll reagens** (→ "Bild 55-2").
2. I det nya fönstret **Fyll reagens** (→ "Bild 56") är de stationer som ska fyllas markerade med orange (→ "Bild 56-1").



### Obs!

Endast användardefinierade och tillagda reagenser från Leica-infärgningsprogram får en orange markering (→ "Bild 56"). Därefter skannas reagenserna från Leica Reagent Kit (→ Sida 83 – Fylla på reagenser från Leica Reagent Kit).

3. Fyll de markerade reagenskyvetterna en och en med respektive reagens utanför instrumentet och sätt tillbaka dem i rätt position i instrumentet.
4. Bekräfta att reagenskyvetterna har fyllts och satts tillbaka genom att trycka på respektive station (→ "Bild 56-1") på skärmen.
5. Upprepa dessa steg för alla stationer som är markerade med orange, inklusive utmatningsstationerna (→ "Bild 56-2").

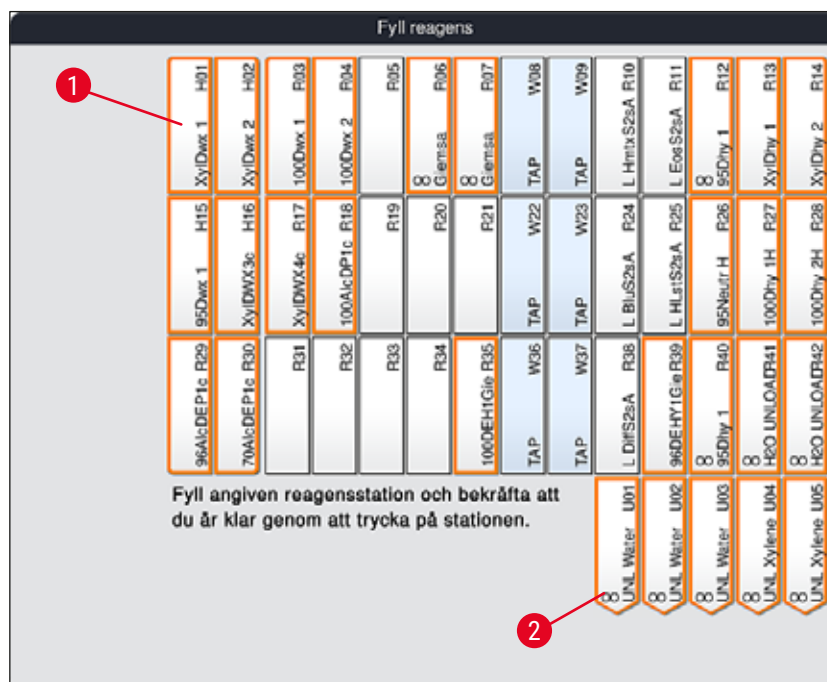


Bild 56

**Varning**

Ordningen i tilldelningsplanen ska följas exakt. En avvikelse kan leda till oönskade infärgningsresultat.

### Fylla på reagenser från Leica Reagent Kit

**Obs!**

När reagensstationen **95 % Alkoholdehyd1** (→ Sida 81 – Duplicera reagensen 95Dhy1) har duplicerats och reagenserna har fyllts på (→ Sida 82 – Fylla på reagenser), skannas Leica Reagents Kit.

1. Om ett informationsmeddelande (→ "Bild 57") visas på skärmen ska du placera förpackningens etikett framför RFID-sensorn på instrumentets framsida (→ "Bild 58-1") för att skanna den.
2. Börja sedan med att skanna den första Leica reagensflaskan när ett informationsmeddelande om detta visas (→ "Bild 58-2"). Håll etiketten på reagensflaskan framför RFID-sensorn på instrumentets framsida (→ "Bild 58-1") för att skanna den.
3. I det nya fönstret **Byt Leica Kit Reagent** (→ "Bild 59"), är den station som ska fyllas markerad med orange (→ "Bild 59-1").
4. Fyll den markerade reagenskyvetten med respektive Leica-reagens utanför instrumentet och sätt tillbaka den i rätt position i instrumentet.
5. Bekräfta att reagenskyvetten har fyllts och satts tillbaka genom att trycka på respektive station (→ "Bild 59-1") på skärmen.
6. Skanna sedan etiketterna på de enskilda reagensflaskorna när du uppmanas att göra det (→ "Bild 58-2") och upprepa steg 2-5.

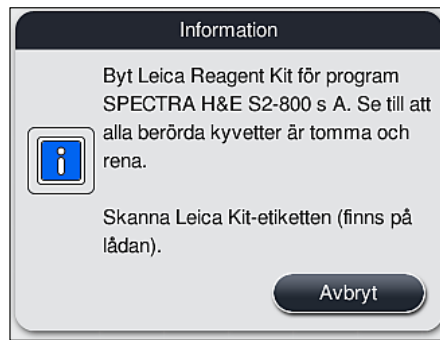


Bild 57

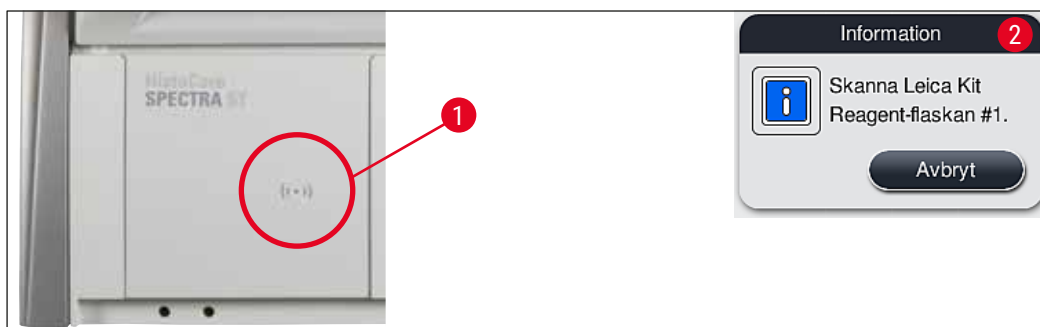


Bild 58

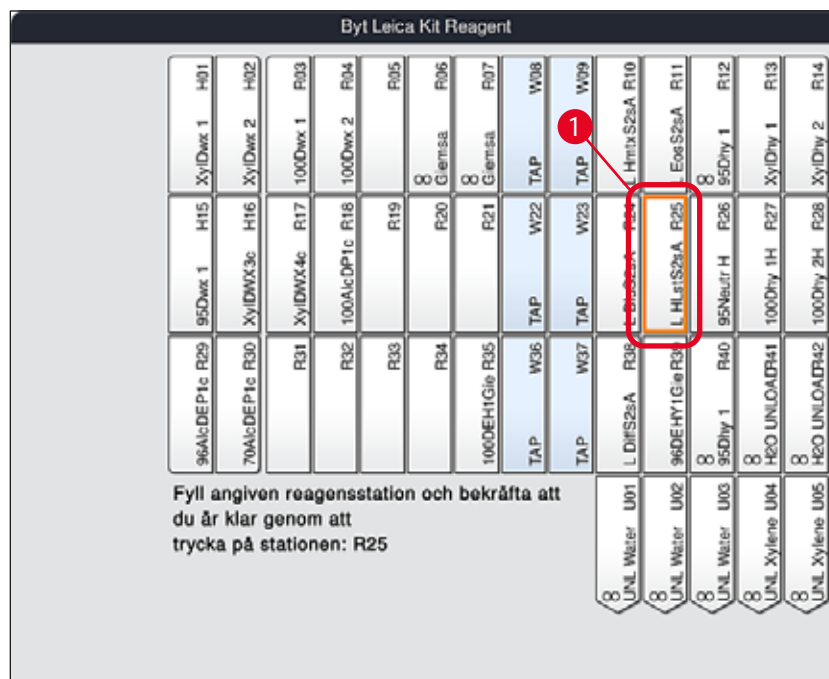


Bild 59

**Obs!**

Användaren har 5 minuter på sig att skanna reagenser med hjälp av förpackningens etikett och 5 minuter per reagensflaska.

Om skanningen av en reagensflaska eller etikett misslyckas har användaren ytterligare två försök på sig innan reagensetiketten blir ogiltig.

**Varning**

Varje Leica Reagent Kit kan endast skannas en gång!

- Skanningen av Leica Reagent Kit kan endast avbrytas med knappen **Avbryt** i informationsmeddelandet som visas i (→ "Bild 57"). Den måste avbrytas innan förpackningens etikett börjar läsas in för att inte Leica Reagent Kit ska förfalla.
- Skanningen kan utföras senare. Mer information som kan behövas för denna åtgärd finns i (→ Sida 103 - Reagensbyte) (→ "Bild 78") och (→ "Bild 80").
- Om åtgärden inte avbryts förrän efter det att den första etiketten (förpackning av kartong) har skannats förfaller Leica Reagent Kit.

**Obs!**

Reagenshanteringssystemet (**RHS**) tillämpar automatiskt följande data för Leica-reagenserna:

- Bäst före-datum (efter öppnande)
- Kvarstående antal objektglas
- Högsta antal objektglas
- Utgångsdatum
- Partinummer

**Varning**

- Ordningen i reagensuppställningen ska följas exakt. En avvikelse kan leda till oönskade infärgningsresultat.
- Alla Leica Reagent Kit-flaskor ska skannas.
- Se till att inga Leica-reagenser från andra Leica Reagent Kit används.
- Reagenskyvetter ska alltid fyllas på utanför instrumentet och i enlighet med säkerhetsanvisningarna.

**Obs!**

Slutligen får användaren ett informationsmeddelande på skärmen med en uppmaning om att starta skanning av påfyllningsnivån. Tryck på knappen **OK** i informationsmeddelandet (→ "Bild 60") för att starta skanningen.

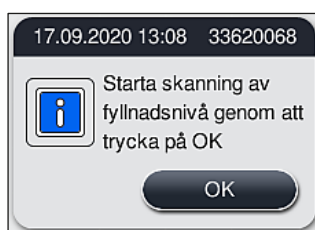


Bild 60

### 5.9.11 Anpassa en reagensuppställning



#### Varning

Den automatiskt genererade reagensuppställningen är optimerad och ska endast anpassas om det finns specifika användarbehov eller om detta krävs av ett Leica-program. I detta fall måste bruksanvisningen som medföljer Leica Reagent Kit följas! Arbetsledarlaget krävs för att anpassa reagensuppställningen. Alla anpassningar av reagensuppställningen kan påverka preparatgenomströmningen och infärgningsresultatet negativt!

Följande regler måste följas när reagensuppställningen anpassas:

- Undvik att flytta reagensstationer från ena sidan av kyvettfältet till den andra, eftersom detta medför onödigt långa överföringstider.
- Duplicerade stationer måste befinna sig på samma sida i kyvettfältet (→ "Bild 40") (→ "Bild 65"), annars kan inte anpassningen av reagensuppställningen sparas.
- För att inte störa utmatningskapaciteten och för att förhindra oväntade störningar av infärgningsprocessen måste en utmatningsreagens tilldelas var och en av de 5 utmatningsstationerna (→ Sida 71 – 5.9.5 Skapa eller kopiera ett nytt infärgningsprogram).
- Om en utmatningsstation används för utmatning till en ofylld kyvett måste korrekt tilldelning alltid ske i slutet av programmet till **UNL Empty** (→ Sida 63 – 5.8.3 Processklasser). Under inga omständigheter får en oanvänd position i de 5 utmatningsstationerna skapas genom att man raderar en reagens som redan tilldelats utmatningsstationen. Detta kan ha en negativ inverkan på utmatningskapaciteten och leda till störningar av infärgningsprocessen.



#### Obs!

När en reagensuppställning genereras tilldelas de valda reagenserna för det sista programsteget (**UNL**, för utmatning) automatiskt de enskilda utmatningsstationerna. Därför är det mycket viktigt att kontrollera att det tilldelade antalet enskilda utmatningsstationer motsvarar den genomströmning som förväntas av användaren och laboratoriets arbetsflöde. Det inbördes förhållandet mellan de tilldelade utmatningsstationerna kan ändras med funktionen **Anp. Reagensupps..** Enskilda utmatningsstationer kan dupliceras eller raderas vid behov.

Om du behöver anpassa den reagensuppställning som har skapats av HistoCore SPECTRA ST, som inkluderar alla regler för optimering, kan du göra detta med hjälp av funktionen **Anp. Reagensupps.** (→ "Bild 61-1").

Med den här funktionen kan stationerna flyttas till sina positioner inom reagensuppställningen och/eller dupliceras.

För att göra detta går du tillväga på följande sätt:

1. I reagensuppställningsvyn (→ "Bild 61"), trycker du på knappen **Anp. Reagensupps.** (→ "Bild 61-1").
2. Observera de informationsmeddelanden som följer (→ "Bild 62") (→ "Bild 63") och bekräfta dem eller tryck på **Avbryt** (→ "Bild 63") för att återgå till reagensuppställningsvyn.
3. När du har bekräftat kommer **Urklipp** (→ "Bild 64") att öppnas. Upp till 6 reagensstationer (→ "Bild 64-1") kan flyttas hit.



Bild 61



Bild 62

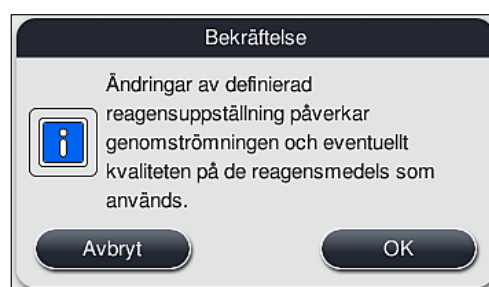


Bild 63

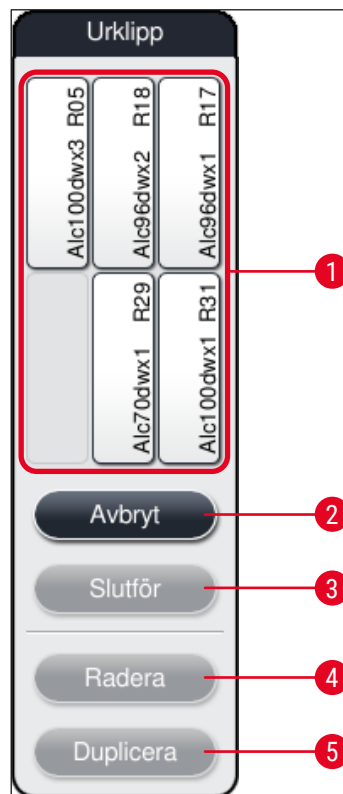


Bild 64



### Obs!

- Leica-reagensstationer med ett L före reagensnamnet (→ "Bild 61-3") kan flyttas men inte dupliceras.



### Obs!

- Urklippsfönstret kan stängas först när det inte längre finns några reagensstationer i det.
- Efter varje ändring som utförs med funktionen **Anp. Reagenssupps.** visas ett informationsmeddelande på skärmen som uppmanar användaren att starta den automatiska skanningen av påfyllningsnivån. Tryck på knappen **OK** i informationsmeddelandet för att starta skanningen.



### Det finns två alternativ för att ändra reagensuppställningen:

#### Flytta reagensstationer:

1. För att flytta reagensstationer markerar du dem en och en i reagensuppställningen (→ "Bild 61") genom att trycka på skärmen och sedan trycka lätt på en ledig position i urklippsfönstret (→ "Bild 64-1").
2. Reagensstationen flyttas då till urklippsfönstret (→ "Bild 64-1").
3. Markera slutligen reagensstationen i urklippsfönstret genom att trycka lätt på den och dra den sedan till önskad (ledig) station (→ "Bild 61-2") i reagensuppställningen.
4. För att spara ändringarna trycker du på knappen **Slutför** (→ "Bild 64-3"). Bekräfta efterföljande informationsmeddelande med **Ja** eller återgå till urklippsfönstret med **Nej**.
5. För att ångra ändringarna trycker du på **Avbryt** (→ "Bild 64-2") och bekräftar det efterföljande informationsmeddelandet med **Ja**.

#### Duplicera en reagensstation

1. För att duplicera en reagensstation markerar du den i reagensuppställningen genom att trycka på skärmen.
  2. Därefter trycker du på knappen **Duplicera** (→ "Bild 64-5").
  3. Reagensstationen dyker då upp i urklippsfönstret. Denna station och den ursprungliga stationen markeras med en oändlighetssymbol (→ "Bild 61-4").
  4. Markera därefter den duplicerade reagensstationen i urklippsfönstret genom att trycka på skärmen och placera den sedan i önskad (ledig) station, i närheten av den ursprungliga stationen, i reagensuppställningen.
  5. För att spara ändringarna trycker du på knappen **Slutför**. Bekräfta efterföljande informationsmeddelande med **Ja** eller återgå till urklippsfönstret med **Nej**.
- För att ångra ändringarna trycker du på **Avbryt** och bekräftar det efterföljande informationsmeddelandet med **Ja**.



#### **Obs!**

- Duplicerade reagensstationer är lämpliga för programsteg med reagenser som har en lång verkningstid. Duplicerade stationer innebär att ett programsteg har tillgång till två likvärdiga reagensstationer, vilket garanterar en hög reagensgenomströmning.
- Duplicerade reagensstationer kan raderas med hjälp av knappen **Radera** (→ "Bild 64-4"). För att göra detta markerar du dem i reagensuppställningen genom att trycka på dem och därefter på **"Radera"**.

## 6 Daglig inställning av instrumentet

### 6. Daglig inställning av instrumentet

#### 6.1 Förbereda instrumentet för den dagliga inställningen



#### Obs!

- (→ "Bild 65") visar en översikt över de olika stationerna i kyvettfältet.
- Kyvettfältet består av totalt 36 reagensstationer och 6 sköljvattenstationer.
- Varje reagenskyvett rymmer max. 380 ml.

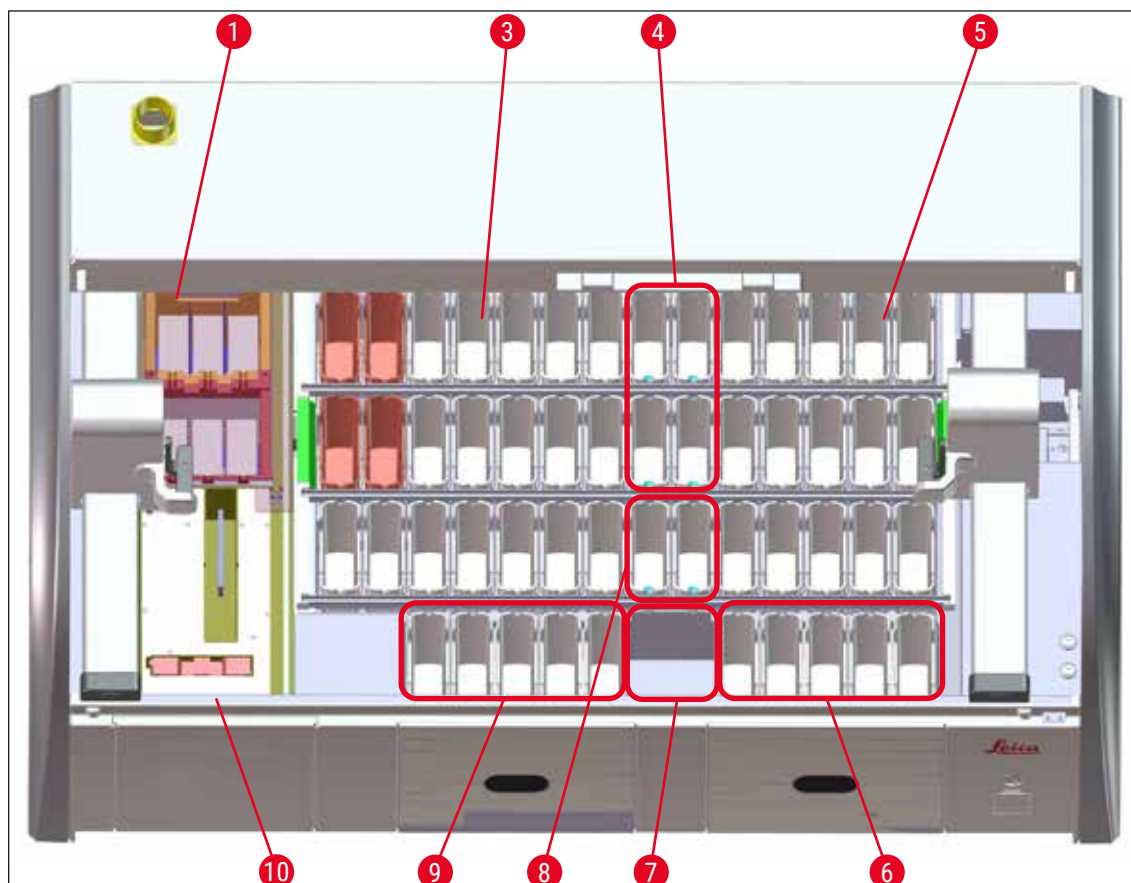


Bild 65

- 1 6 ugnstationer
- 3 Vänster kyvettfält
- 4 Sköljvattenstationer (grupp om fyra)
- 5 Höger kyvettfält
- 6 5 utmatningsstationer
- 7 Torr överföringsstation
- 8 Sköljvattenstationer (grupp om två)
- 9 5 laddningsstationer
- 10 Streckkod (tillval)

## 6.2 Daglig inställning av instrumentet



### Obs!

Före den dagliga uppstarten av instrumentet ska vattentillförseln till instrumentet kontrolleras och vid behov kopplas till.

- Öppna instrumentets kåpa och ta bort locken från reagenskyvetterna.
- Starta instrumentet.

### Automatisk skanning av fyllnadsnivå i samband med att instrumentet initieras

Under initieringen utförs skanningen av fyllnadsnivå automatiskt i följande områden:

- Reagenskyvetter
- Sköljvattenkyvetter
- Laddnings- och utmatningsstationens reagenskyvetter
- Ugnstation



### Obs!

Om instrumentet fortfarande innehåller rack, reagenskyvetter som inte är tillräckligt fyllda eller fortfarande täckta, och/eller sköljvattenkyvetter som inte är redo att användas, upptäcks detta under den automatiska skanningen av fyllnadsnivån och visas när denna är slutförd.

### 6.2.1 Förbereda och hantera reagenskyvetter

För att säkerställa att allt fungerar som det ska i instrumentet ska du följa anvisningarna nedan och gå tillväga på följande sätt.

#### Sätta fast reagenskyvetthandtaget

Kontrollera att reagenskyvetthandtaget är korrekt fastsatt på reagenskyvetten. Om detta inte är fallet ska handtaget sättas fast enligt (→ "Bild 66").

#### Fylla på och tömma reagenskyvetter



### Varning

Reagenskyvetterna ska normalt fyllas på eller tömmas utanför instrumentet för att undvika eller minska risken för att spilla reagenser i andra reagenskyvetter eller på instrumentets invändiga delar. Var försiktig när du fyller eller tömmer reagenskyvetterna och följ de gällande laboratorieföreskrifterna. Om reagenser har spillts ut eller om andra reagensstationer har kontaminerats måste dessa rengöras och fyllas på igen. För att undvika onödig avdunstning av reagenser ska kyvetterna täckas över när de inte används.

## Korrekt fyllnadsnivå i reagenskyvetter

- Observera nivåmarkeringen på insidan av reagenskyvetten när du fyller den, oavsett typ av kyvett (→ "Bild 66") (→ "Bild 67").
- En tillräcklig fyllnadsnivå garanteras om reagensernas nivå ligger mellan markeringarna för högsta (→ "Bild 66-1") och lägsta (→ "Bild 66-2") fyllnadsnivå.
- Om mellanlägg för specialinfärgning (→ "Bild 67") används i reagenskyvetterna för att reducera reagensvolymen ska dessa sättas i reagenskyvetten innan reagensen fylls på (minst upp till den markerade lägsta fyllnadsnivån (→ "Bild 67-2"), men inte över den högsta fyllnadsnivån (→ "Bild 67-1")).

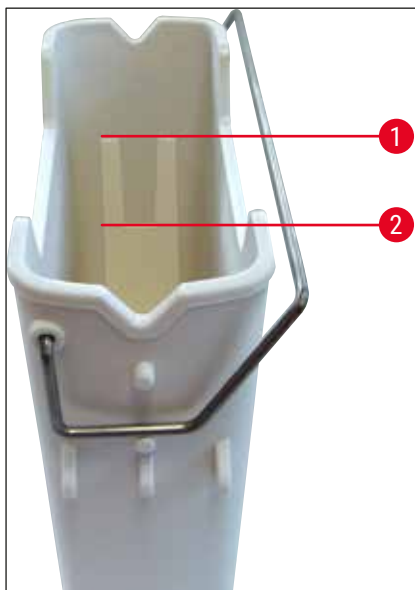


Bild 66

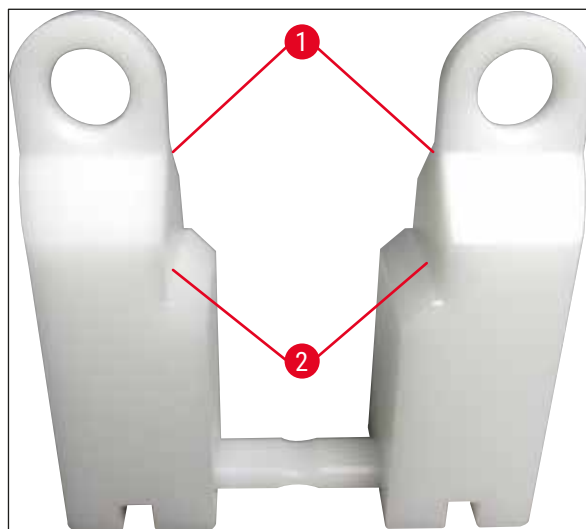


Bild 67

## Sätta i reagenskyvetten i kyvettfältet

- Välj **Reagensuppställning** (→ Sida 40 – 5.5 Huvudmeny – Översikt) i huvudmenyn och placera reagenskyvetten i rätt position enligt ordningen i reagensuppställningen.

**Obs!**

Sätt försiktigt i reagenskyvetten med handtaget i kyvettfältet så att handtaget sitter på höger sida om reagenskyvetten när du tittar på kyvettfältet (→ "Bild 68-1"). Denna riktning på handtaget rekommenderas också för placeringen av reagenskyvetterna i laddnings- eller utmatningsstationen

**Obs!**

Rackhandtaget för 5 objektglas har en specialbeläggning som förhindrar kemiska interaktioner med reagenser för särskilda användningsområden (t.ex. berlinerblå infärgning för att upptäcka järn eller silverinfärgning som Grocott eller Gömöri). För mer information om reagenser som ska användas med belagda tillbehör, se (→ Sida 168 – A1. Bilaga 1 – Godkända reagenser).

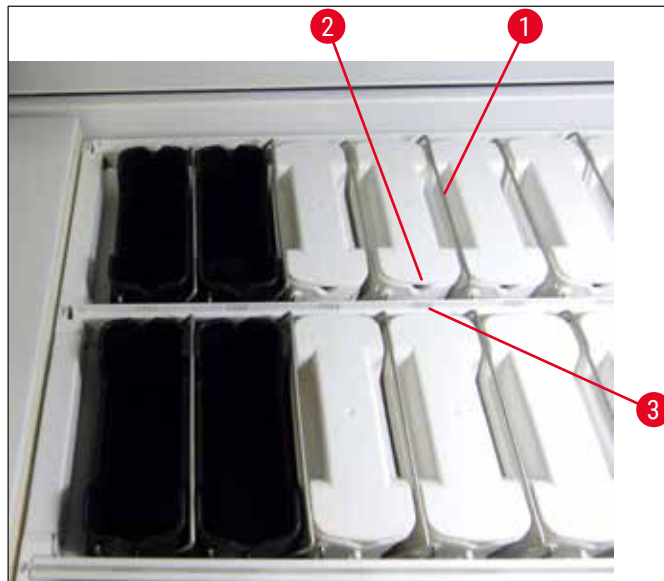


Bild 68

**Varning**

Reagenskyvetterna får inte stå vridna i sidled i förhållande till stationsnumret. Se till att skåran på reagenskyvettens framsida (→ "Bild 68-2") och stationsnumret (→ "Bild 68-3") är på samma höjd.

**6.2.2 Ihopsättning av insatsen för särskilda infärgningar**

Insatsen för särskilda infärgningar består av två vätskeundanträngare (→ "Bild 69-1") och ett kopplingsstycke (→ "Bild 69-2"). Dessa delar måste sättas ihop (→ "Bild 69-4") innan insatsen kan sättas in i en reagenskyvett.

- » För att sätta ihop insatsen för särskilda infärgningar, sätt in kopplingsstyckets ändar (→ "Bild 69-2") i respektive ovvalt hål (→ "Bild 69-3") på vätskeundanträngarna (→ "Bild 69-1").

Insatsen för särskilda infärgningar kan enkelt tas isär för rengöring efter användning.

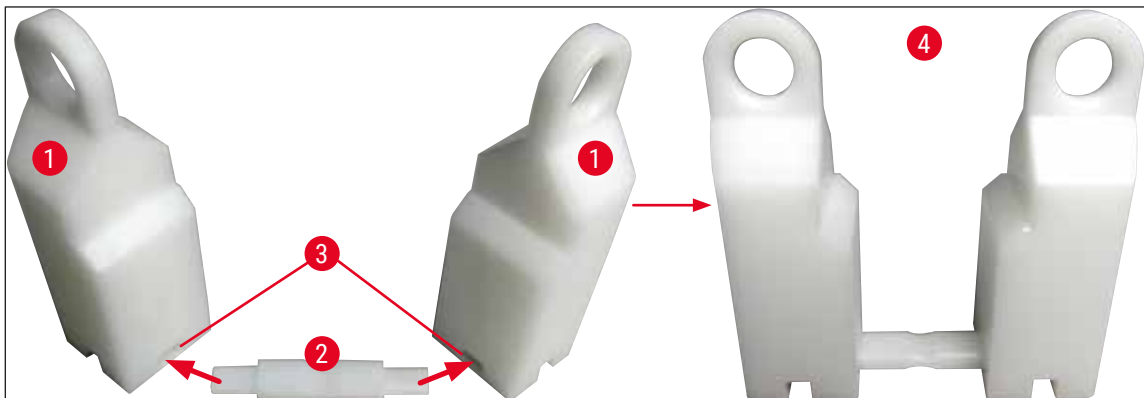


Bild 69

### 6.2.3 Automatisk skanning av påfyllningsnivå

När reagenskyvetten har fyllts och satts i ska den automatiska skanningen av påfyllningsnivån (→ "Bild 71-1") utföras för att bekräfta att alla reagenser som används har rätt påfyllningsnivå.



#### Obs!

- Laddnings- och utmatningsstationerna tas inte med i beräkningen när reagensuppställningen skapas. Reagenser i in- och utmatningsstationerna måste definieras och övervakas av användaren.
- Reagenserna i laddnings- och utmatningsstationerna övervakas inte av reagenshanteringssystemet. Därför ansvarar användaren för att reagenserna i dessa stationer är i ett felfritt skick.

Skanningen av påfyllningsnivån startas på följande sätt:

1. Öppna **Reagensuppställning** (→ Sida 40 – 5.5 Huvudmeny – Översikt) i huvudmenyn.
2. Knappen **Skanning fylln.nivå** (→ "Bild 71-1") finns nere till vänster på menyskärmen.
3. Tryck på den knappen för att starta skanningen av påfyllningsnivån.



#### Obs!

Avvikelser under skanningen visas på bildskärmen. Följ meddelandena och korrigerar till exempel påfyllningsnivåer, ta bort lock, lägg till reagenskyvetter osv.

### 6.2.4 Streckkod (tillval)



#### Obs!

- Om en streckodsläsare installerats, får inga vätskor (vatten, reagenser) fyllas på i inmatningsfackets reagenskyvett för att undvika en situation där enskilda objektglas inte detekteras och skannas av streckodsläsaren. Enheten kontrollerar kyvetten under uppstartprocessen. Om påfyllda reagenskyvetter detekteras i inmatningsfacket, uppmanar ett meddelande användaren att tömma dem och starta om skanningen av påfyllningsnivån.
- För närvarande är det inte möjligt att processa extra-stora objektglas genom räknarstationen för objektglas om en streckodsläsare är installerad, på grund av metallsvärdet som stör adaptorn för extra-stora objektglas.

Om tillvalet streckodsläsare installerats, ska den startas i följande ordning.

1. Först ansluter du streckodsläsaren (→ "Bild 70-1") till strömförsörjningen (→ "Bild 70-2").
2. Vänta sedan tills den röda lampan på skannern lyser kontinuerligt (→ "Bild 70-3").
3. Slutligen ansluter du streckodsläsaren till USB-porten för önskat gränssnitt (t.ex. PC) (→ "Bild 70-4").

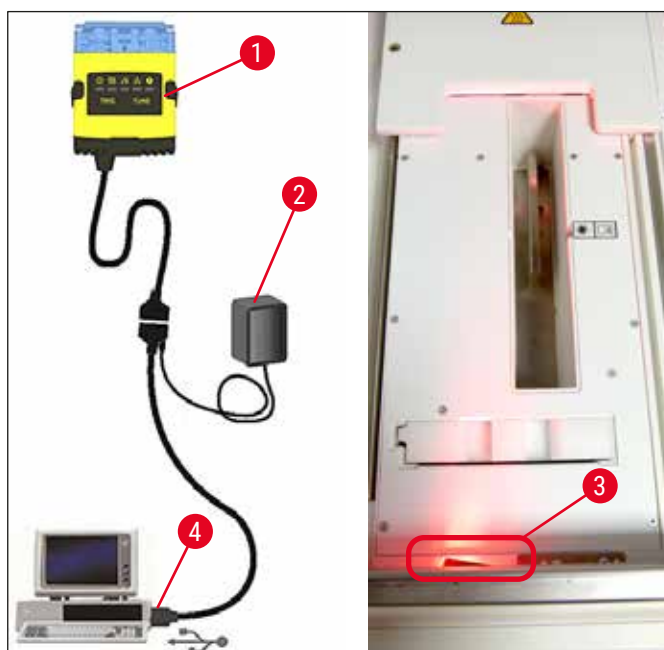


Bild 70

**Obs!**

Se medföljande bruksanvisning från tillverkaren för ytterligare information och detaljer om den installerade streckodsläsaren.

**6.3 Reagenshanteringssystem (RHS)**

Reagensuppställningen (→ "Bild 71") i instrumentet visas när du trycker på motsvarande menyknapp. Denna visning återger den aktuella uppställningen av reagensstationerna, skölvattenstationerna samt laddnings- och utmatningsstationerna i instrumentet.



Bild 71

Reagensuppställningen är tom när instrumentet levereras eftersom reagenserna inte har angetts ännu och ingen reagensuppställning har skapats.

När reagenser (→ Sida 60 – Skapa en ny reagens eller kopiera en reagens) och program (→ Sida 71 – 5.9.5 Skapa eller kopiera ett nytt infärgningsprogram) har angetts och reagensuppställningen har skapats (→ Sida 78 – 5.9.9 Skapa reagensuppställningen), visar översikten (→ "Bild 71") alla stationer i instrumentet i rätt ordning.

**Varje reagenskyvett som visas i reagensuppställningen innehåller ytterligare information:**

- Stationsnummer (→ "Bild 71-2")
- Reagensnamnets förkortning (→ "Bild 71-3")
- En bakgrundsfärg (→ "Bild 72")
- Oändlighetssymbol för en duplicerad reagensstation (→ "Bild 71-4")



**Obs!**

- Bakgrundsfärgen anger reagensens förbrukningsstatus (→ "Bild 72"). När reagensen är förbrukad stiger färgpelaren nedifrån och upp och ändrar färg beroende på förbrukningsstatus.
- En reagens måste bytas ut så snart dess förbrukningsstatus blir **RÖD** (→ "Bild 72-3") och absolut senast när stationen blinkar rött. Om detta inte görs kan inga Leica-infärgningsprogram startas.
- För mer information om RHS, se (→ Sida 59 – 5.8 Reagenslista).

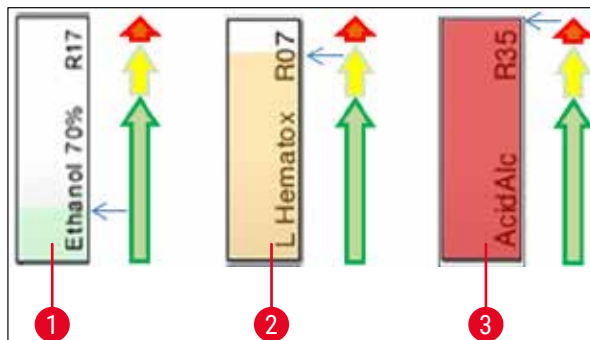


Bild 72

- 1 Grön: Förbrukningsstatus 0-80 % av den maximala förbrukningsnivån
- 2 Gul: Förbrukningsstatus 80-95 % av den maximala förbrukningsnivån
- 3 Röd: Förbrukningsstatus 95-100 % av den maximala förbrukningsnivån

#### 6.4 Stationsinformation

Om du trycker på en station i reagensuppställningen visas mer information (stationsinformation). Man skiljer mellan följande stationstyper med hjälp av deras förkortningar:

<b>L01-L05</b>	Laddningsstationer
<b>SID</b>	Räknarstation för objektglas och skrivfälts-ID (tillval)
<b>001-006</b>	Ugnsstationer för torkning av objektglas och smältning av paraffin
<b>R01-R42</b>	Reagensstationer
<b>W08-W09</b>	Sköljvattenstationer (grupp om fyra)
<b>W22-W23</b>	
<b>W36-W37</b>	Sköljvattenstationer (grupp om två)
<b>D01-D02</b>	Torra överföringsstationer
<b>U01-U05</b>	Utmatningsfackets utmatningsstationer

#### Räknarstation för objektglas (SID):

Om du trycker på den här stationen visas ett meddelande som indikerar att detta är räknarstationen för objektglas. Använd knappen **Stäng** (→ "Bild 73") för att stänga visningen.



Bild 73

### Ugnsstationer:

Den detaljerade visningen (→ "Bild 74") för en ugnsstation innehåller:

- Aktuell temperatur (→ "Bild 74-1"),
- Den inställda måltemperaturen (→ "Bild 74-2") och
- Driftläget (→ "Bild 74-3") för de 6 ugnsstationerna.

Använd knappen **Stäng** (→ "Bild 74-4") för att stänga visningen.

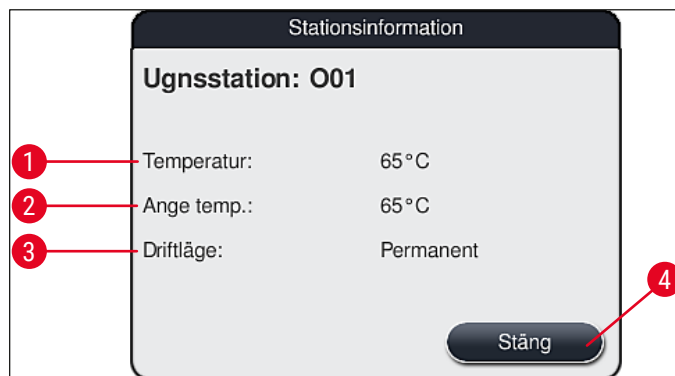


Bild 74

### Sköljvattenstationer (grupp om fyra):

Den detaljerade visningen för en sköljvattenstation (→ "Bild 75") visar alla sköljvattenstationer som är anslutna till samma vattenkrets. Använd knappen **Stäng** för att stänga visningen.



Bild 75

**Skölvattenstationer (grupp om två):**

När du trycker på en skölvattenstation som ingår en grupp av två öppnas ett informationsfönster som visar de 2 vattenstationerna som är anslutna till den andra vattenkretsen med till exempel destillerat vatten, avjoniserat vatten (→ "Bild 76-1") eller kranvatten (→ "Bild 76-2").

**Obs!**

Beroende på anslutningen (→ Sida 29 – 4.2.1 Anslutning av samtliga 6 skölvattenstationer) (→ Sida 30 – 4.2.2 Kombinerad anslutning 4+2 skölvattenstationer), måste du göra ett motsvarande val i den här menyn.

Skölvattenstationerna (grupp med två) kan endast programmeras i **arbetsledar-läge**.

**Varning**

Rätt tilldelning och korrekt anslutning av skölvattenkyvetterna är ett krav för att uppnå en god infärgningskvalitet.

- Tryck på knappen **Spara** (→ "Bild 76-3") för att tillämpa inställningarna eller på **Avbryt** (→ "Bild 76-4") för att stänga fönstret utan att tillämpa eventuella ändringar.



Bild 76

**Laddningsfackets laddningsstationer**

När instrumentet levereras till kund har laddningsstationen ännu inte tilldelats några reagenser.

Utför följande steg för att tilldela en reagens till en laddningsstation:

1. Markera stationen i reagensuppställningen (→ "Bild 19-1") genom att trycka lätt på den.
2. I fönstret **Stationsinformation** trycker du på den svarta knappen **Reagensnamn** (→ "Bild 77-1") för att öppna listan med tillgängliga reagenser (→ Sida 59 – 5.8 Reagenslista).
3. Välj önskad reagens genom att trycka lätt på den och tryck sedan på **Tillämpa**.

## 6 Daglig inställning av instrumentet

- Tryck på knappen **Spara** (→ "Bild 77-2") för att tillämpa inställningarna eller på **Avbryt** (→ "Bild 15-3") för att stänga fönstret utan att tillämpa eventuella ändringar.

✓ Det tilldelade reagensnamnet visas i reagensuppställningen.

Om en reagens inte längre behövs i den valda laddningsstationen kan tilldelningen till respektive reagens tas bort med hjälp av knapparna **Rensa** (→ "Bild 77-4") och **Spara** (→ "Bild 77-2") i fönstret **Stationsinformation**.



Bild 77



### Obs!

Laddningsstationerna tas inte med i beräkningen när reagensuppställningen skapas. Reagenser i laddningsstationerna måste definieras och övervakas av användaren.

### Utmatningsfackets utmatningsstationer

Tilldelningen av reagenserna till de 5 utmatningsstationerna beror på tilldelningen av de sista stegen i de valda program som implementerats i reagensuppställningen. Programmets sista steg måste vara antingen en utmatningsstation i utmatningsfacket eller överföringsstationen till HistoCore SPECTRA CV i arbetsstationsläge. Om programmet ska avslutas i en av de 5 utmatningsstationerna är det obligatoriskt att tilldela en skapad eller fördefinierad reagens med processklass **UNL** som det sista programsteget.



### Varning

Racken transporteras antingen till överföringsstationen i slutet av programmet eller till en ledig utmatningsstation fylld med korrekt utmatningsreagens som definierats i programmet som det sista steget. Om detta inte följs kan det leda till att proverna skadas.

Eftersom utmatningsstationerna kan ha olika tilldelningar måste färdiga rack avlägsnas från utmatningsstationerna i tid. Detta kan annars ha en negativ inverkan på utmatningskapaciteten och leda till störningar av infäringsprocessen.

## Reagensstationer och utmatningsstationer

När du trycker på reagensstationen eller utmatningsstationen öppnas ett informationsfönster. Det visar ytterligare relevant information om stationstypen (reagensstation (→ "Bild 78"), Leica-reagensstation (→ "Bild 80") eller utmatningsstation).

<b>Reagensnamn</b> (→ "Bild 78-1"), <b>Förkortning</b> (→ "Bild 78-2")	(→ Sida 60 – Skapa en ny reagens eller kopiera en reagens)
<b>Reagensnamn, utmatningsstation</b> (→ "Bild 79-1")	
<b>Förbrukningsstatus</b> (→ "Bild 78-3")	(→ Sida 95 – 6.3 Reagenshanteringssystem (RHS))
<b>Återstående objektglas</b> (→ "Bild 78-4"), <b>Max objektglas.</b> (→ "Bild 78-6")	Visar antalet återstående objektglas som kan behandlas. När ett rack sätts i instrumentet räknas objektglasen i racket av räknarstationen för objektglas och subtraheras från antalet återstående objektglas.
<b>Objektglas ef. utbyte</b> (→ "Bild 78-5")	Visar antalet objektglas som har bearbetats sedan det senaste reagensbytet.
<b>Längsta lagringsdatum efter bruten förpackning</b> (→ "Bild 78-7")	Visar lagringsdatumet för den reagens som reagenskyvetten har fyllts med.
<b>Mellanlägg Ja/Nej</b> (→ "Bild 78-8")	<b>Ja</b> indikerar att mellanlägget för specialinfärgning och rack för 5 objektglas används. Den här stationen kan inte användas för program med rack för 30 objektglas (→ Sida 59 – 5.8 Reagenslista).
<b>Exklusive Ja/Nej</b> (→ "Bild 78-9")	Inställningen <b>Ja</b> innebär att reagensen enbart tilldelas till ett enda program. <b>Nej</b> gör det möjligt att använda den med flera program (→ Sida 74 – 5.9.6 Infoga eller kopiera ett nytt programsteg).
<b>Utgångsdatum</b> (→ "Bild 80-1"), <b>Partinummer</b> (→ "Bild 80-2")	läggs in automatiskt när förpackningen till Leica Reagent Kit skannas.

## Detaljerad visning av reagensstation

Stationsinformation

**Reagensstation: R04**

1 Reagensnamn: 100% Alcohol Dewax 2

2 Förkortning: 100Dwx 2

3 Reagensanvändn.status: 0%

4 Återstående objektglas: 800

5 Objektglas ef. utbyte: 0

6 Max objektglas: 800

7 Längsta lagring-datum: 22.09.2020

8 Insats: Nej

9 Exklusive: Nej

10 Uppdatera reagens

11 Stäng

Bild 78

## Detaljerad visning av utmatningsstation

Stationsinformation

**Reagensstation: U01**

1 Reagensnamn: UNL Water

Förkortning: UNL Water

Reagensanvändn.status: 1%

Återstående objektglas: 1200

Objektglas ef. utbyte: 0

Max objektglas: 1200

Längsta lagring-datum: 23:41

Insats: Nej

Exklusive: Nej

Uppdatera reagens

Stäng

Bild 79

## Detaljerad visning av Leica-reagensstation

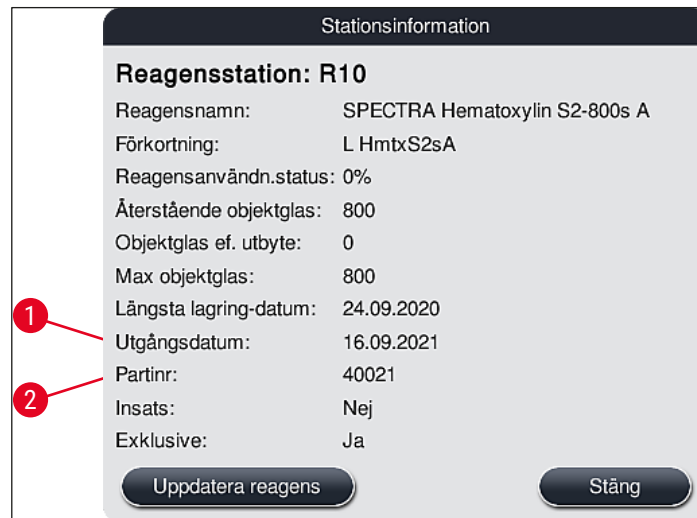


Bild 80

## Reagensbyte

- Om reagenshanteringssystemet RHS visar att en reagens är nästan eller helt förbrukad måste ett reagensbyte göras. Detta byte måste bekräftas med en tryckning på knappen **Uppdatera reagens** (→ "Bild 78-10").
- När du byter ut Leica-reagenser ska du trycka på **Uppdatera reagens** och sedan följa instruktionerna för fyllning och skanning som visas på skärmen (→ Sida 83 – Fylla på reagenser från Leica Reagent Kit).
- Använd knappen **Stäng** (→ "Bild 78-11") för att stänga visningen.



## Obs!

- Obs! Ett byte av reagenser följt av en uppdatering av RHS-data är endast möjligt om instrumentet befinner sig i ett driftläge och det inte längre finns några rack i instrumentet (inklusive laddnings- och utmatningsfacken).
- Om ett användardefinierat infärningsprogram fortfarande används trots att ett reagensbyte måste utföras, kommer antalet objektglas att överstiga värdet **Max objektglas** (→ "Bild 78-6"). Det överskridna antalet objektglas kan avgöras genom att man jämför informationen på raderna **Objektglas ef. utbyte** och **Max objektglas** i stationsinformationen (→ "Bild 78-5").
- För reagenser i Leica Reagent Kit gäller ett gränsvärde på 30 överskridande objektglas. Detta gränsvärde gäller inte övriga reagenser som hör till Leica-programmet (t.ex. alkohol, xylen).



## Varning

- En uppdatering av reagensstatusen utan att motsvarande reagens har bytts kommer att påverka infärningskvaliteten negativt.
- Tryck **ALDRIG** på knappen **Uppdatera reagens** om inte reagensen har bytts ut.

**Obs!**

Varje Leica Reagent Kit kan endast skannas en gång!  
Redan tillagda Leica-reagenser går ut innan bäst före-datumet om en reagensuppställning skapas på nytt.

**6.5 Förbereda racket****Varning**

- Varje rackhandtag (→ "Bild 82-1") innehåller 2 RFID-chip. Därför kan rackhandtagen fästas på racket (→ "Bild 82-2") först efter ett mikrovågssteg för förberedelse av preparat.
- Om objektglasracken ska överföras till Leica CV5030 för täckglasapplicering, måste ett klipp fästas på racket. Klippet är för att hålla objektglasen i en position som tillåter Leica CV5030 att applicera täckglas på objektglasen. Klippet ska endast fästas efter att objektglasracket tagits bort från HistoCore SPECTRA ST. Användning av klippet under infärgningsprocessen kan orsaka kollisioner inuti enheten i alla konfigurationer (inklusive tillvalet streckkodsläsaren), vilket kan leda till skador på objektglasen och proverna.

Det finns två olika typer av rack med kompatibla handtag som kan användas i infärgaren HistoCore SPECTRA ST:

- Rack för 30 objektglas för vanlig infärgning (→ "Bild 82").
- Rack för 5 objektglas för specialinfärgning (→ "Bild 83").

**Obs!**

Om en täckglasapplicator från en annan tillverkare används för täckglasapplicering av HistoCore SPECTRA ST-infärgade rack kan HistoCore SPECTRA ST användas med rack från andra tillverkare. Dessa rack måste vara försedda med rackhandtag från Leica och vara godkända för tillverkaren. Rack från andra tillverkare överförs normalt till utmatningsfacket i HistoCore SPECTRA ST efter infärgningen, och användaren måste ta bort dem därifrån.

Tillgängliga rackhandtag anges i (→ Sida 157 – Rackhandtag för rack från andra tillverkare).

De färgade handtagen måste sättas fast korrekt innan racket används i instrumentet.

Rackhandtagen måste sättas fast i enlighet med den fördefinierade programfärgen (→ Sida 67 – 5.9.1 Tilldela ett infärgningsprogram en rackhandtagsfärg).

Objektglashandtagen finns i 9 färger (8 programfärger & vit) (→ Sida 155 – 9.2 Valbara tillbehör).



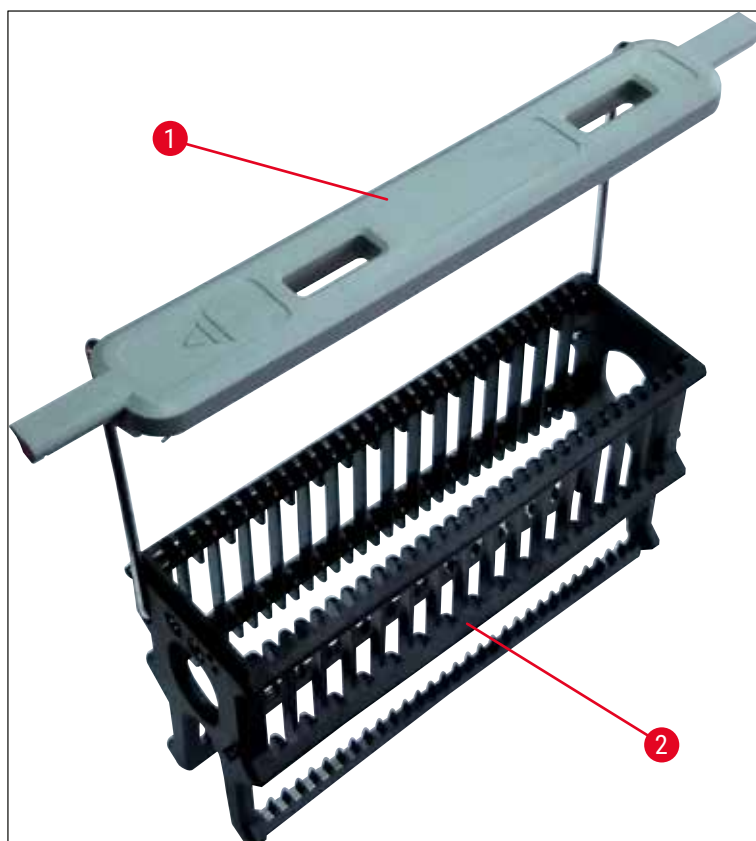


Bild 82



Bild 83

**Obs!**

Rackhandtaget för 5 objektglas har en specialbeläggning som förhindrar kemiska interaktioner med reagenser för särskilda användningsområden (t.ex. berlinerblå infärgning för påvisning av järn eller silverinfärgning som Grocott eller Gömöri). För mer information om reagenser som ska användas med belagda tillbehör, se (→ Sida 168 – A1. Bilaga 1 – Godkända reagenser).

Det vita handtagets specialfunktion:

- Det vita handtaget kan inte tilldelas till ett infärgningsprogram permanent.
- På grund av handtagets **JOKERFUNKTION** måste en programfärg tilldelas det vita handtaget på nytt vid varje programstart.
- För detta ändamål öppnas en urvals meny automatiskt på skärmen när racket har satts i.

**Gör på följande sätt för att sätta fast eller byta ut rackhandtagen:**

Lossa ett handtag från racket:

- Dra handtaget lätt åt sidorna (→ "Bild 84") så att ståltrådarna kan dras ut ur hålen i racket.

Sätta fast ett handtag på racket:

- Dra handtaget lätt åt sidorna och lyft racket så att ståltråden snäpper fast i hålen på höger och vänster sida i racket (→ "Bild 84-1") (→ "Bild 84-2").



Bild 84

**Obs!**

- Se till att handtaget sitter korrekt i den övre positionen, centrerat ovanför racket (→ "Bild 84").
- För att göra racket stabilare vid fyllning (→ "Bild 85-3") kan du vika handtaget (→ "Bild 85-1") åt sidan så långt det går (→ "Bild 85-2") så att det fungerar som ett ytterligare skydd och gör att racket inte tippar.

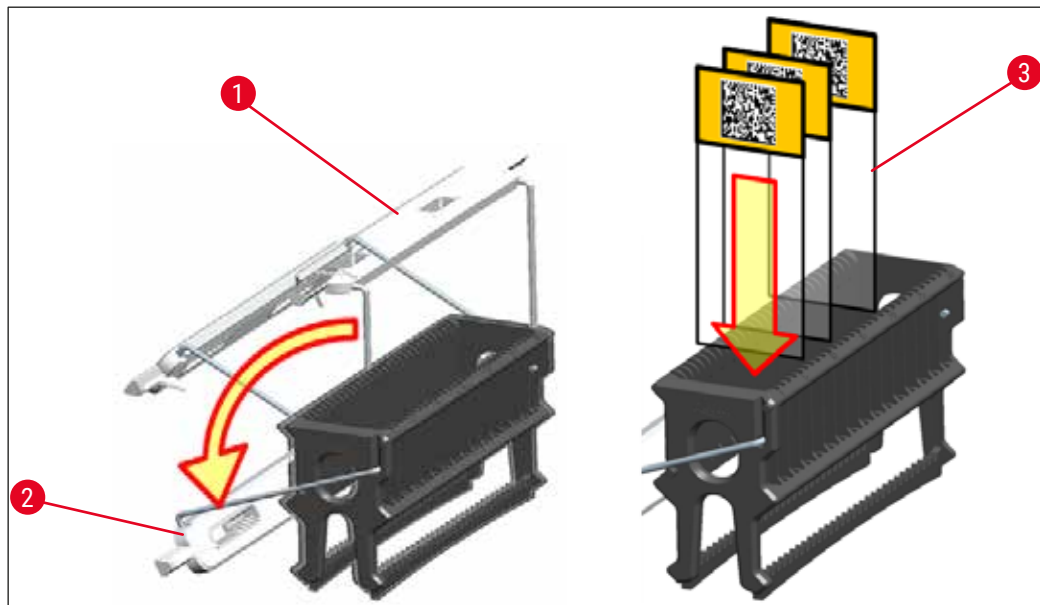


Bild 85

**Varning**

- När du sätter i objektglaset (→ "Bild 85-3"), måste du se till att objektglasetiketten pekar uppåt och är vänd mot användaren. Sidan av glaset med preparatet på måste vara vänd mot rackets framsida.
- Rackets framsida är markerad med Leica-logotypen. När handtaget är fastsatt går det att läsa texten **FRONT** på handtaget (→ "Bild 85").
- Om objektglaset inte sätts i korrekt kan proverna skadas under den fortsatta processen.
- Etiketterna och/eller den skriftliga märkningen som används på objektglas måste tåla de lösningsmedel som förekommer i instrumentet.

**Obs!**

- Endast objektglas som motsvarar standarden DIN ISO 8037-1 305 får användas med rack med 30 objektglas och rack med 5 objektglas..
- Om tomma eller handskrivna etiketter används på rackhandtagen och objektglaset måste du kontrollera att de tål lösningsmedel innan de används.
- När du sätter i objektglaset i racket måste du se till att glaset placeras i respektive fack för det önskade infärgningsprogrammet. De färgade rackhandtagen gör att de kan tilldelas till respektive infärgningsprogram på ett tillförlitligt sätt.
- Se till att endast ett objektglas placeras i varje utrymme och att glaset inte fastnar.
- Extra-stora objektglas med specialstorlek 76 x 52 mm kan därför endast användas i rekommenderad kombination med tillvalda Leica-tillbehör (→ Sida 157 – För speciella applikationer (extra-stora objektglas)).

**6.6 Infärgningsprocessen**

För att infärgningsprocessen ska kunna genomföras måste följande förutsättningar vara uppfyllda:

- Alla inställningar har optimerats (parametrar för ugn, etc.).

- De program som krävs för infärgningen har skapats (→ Sida 71 – 5.9.5 Skapa eller kopiera ett nytt infärgningsprogram).
- Reagensstationerna är fyllda med rätt reagenser (→ Sida 91 – 6.2.1 Förbereda och hantera reagenskyvetter).
- En skanning av fyllnadsnivån har utförts (→ Sida 91 – 6.2 Daglig inställning av instrumentet).
- De rack som är avsedda för infärgning är fyllda och rätt handtag är fästa på dem (→ Sida 104 – 6.5 Förbereda racket).



### Obs!

En kontrollerad avstängning av instrumentet inleds om **driftströmbrytaren** (→ "Bild 13") trycks in under en pågående infärgningsprocess (→ Sida 117 – 6.6.6 Slutföra den dagliga användningen). Användaren måste bekräfta avstängningen av instrumentet genom att trycka på **driftströmbrytaren** två gånger.

### 6.6.1 Starta infärgningsprocessen



### Varning

- Sträck dig inte in i laddningsfackets rörelseområde. Då kan du skada dig.
- Racket kan endast sättas i med hjälp av laddningsfacket. Det är inte tillåtet att sätta i det direkt i en reagens eller ugnstation genom att öppna instrumentets kåpa. Rack som sätts i på detta sätt kan inte identifieras av instrumentet och därmed orsaka kollisioner!
- Om kåpan öppnas medan infärgningsprogram är aktiva fördröjs respektive bearbetningssteg, eftersom det inte sker några överföringsrörelser under denna tidsperiod. Detta kan leda till förändringar av infärgningskvaliteten.
- Låt alltid kåpan vara stängd under tiden infärgningsprogram är aktiva. Leica tar inget ansvar för kvalitetsförsämringar som uppstår på detta sätt.
- Om rack med vita handtag har placerats i laddningsfacket och tilldelats till ett program, måste programmets tilldelning göras om efter det att facket och/eller kåpan har öppnats igen. Följ informationsmeddelandena som visas på bildskärmen när det ska göras.

### Starta infärgningsprocessen

1. Fäll upp rackhandtaget så att det är upprätt (→ "Bild 85").
2. Om laddningsfacket lyser grönt (→ "Bild 86-1") trycker du på det och öppnar facket.
3. Sätt i racket i en ledig position i laddningsfacket enligt (→ "Bild 86-2").



Bild 86

4. Sätt i racket så att både Leica-logotypen på rackets framsida och markeringen "Front" (Framsida) på det färgade handtagets ovansida pekar mot användaren. Pilen på ovansidan av det färgade handtaget ska peka in mot instrumentet.
5. Tryck på laddningsfackets knapp igen för att stänga det.
6. Om laddningsfacket är öppet i mer än 60 sekunder informerar ett informationsmeddelande användaren om detta.

**Varning**

Se upp när facken öppnas eller stängs. Klämrisk! Facken är motordrivna och öppnas automatiskt när knappen trycks in. Blockera inte fackens rörelseområde.

7. När laddningsfacket stängs känner instrumentet av RFID-chipet i det färgade handtaget.
8. Den identifierade handtagsfärgen och den tilldelade programförkortningen visas på respektive station i reagensuppställningen (→ "Bild 87").

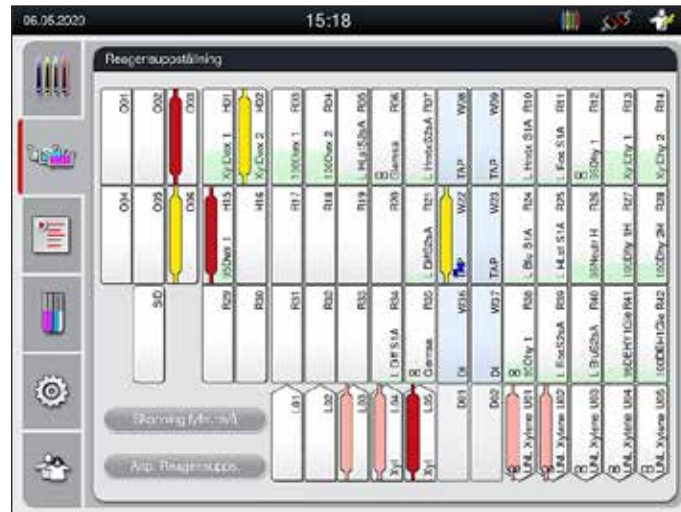


Bild 87

**Obs!**

- Instrumentet upptäcker och indikerar när ett rack har satts i på fel sätt och måste korrigeras av användaren.
- Om ett rack har satts i laddningsfacket med en rackhandtagsfärg för vilken det inte finns något angett program i reagensuppställningen (→ "Bild 88") upptäcker instrumentet detta och informerar användaren genom att visa ett informationsmeddelande. Racket måste avlägsnas från instrumentet. Fäst ett handtag med rätt färg enligt programmen (→ Sida 71 – Bild 45) och sätt tillbaka det i laddningsfacket.

SPECTRA ST **LHE** **DWX** **DHY** **TS1**

Bild 88

**Obs!**

För de isatta racken beräknar instrumentet genomströmningsoptimerade starttider som kan avvika från de isatta rackens ordningsföljd, och som orsakas av stegtoleranserna som anges i det specifika programmet.

På grund av faktumet att starttiderna är optimerade för genomströmning, kan en något annorlunda användning av **DUPLICERADE** reagensstationer förekomma.

- Före det första programsteget räknar instrumentet de objektglas som har satts i racket i räknarstationen för objektglas (→ "Bild 3-2").
- Det fastställda antalet objektglas registreras och bearbetas i **RHS** och förbrukningsstatusen för respektive reagens uppdateras.
- Därefter transporteras racket till en ugnstation eller reagensstation, beroende på vad som har angetts som första programsteg.

**Varning**

Om laddningsfacket och instrumentets kåpa har öppnats samtidigt innan en infärgningsprocess startas (t.ex. för okulärbesiktning av reagenserna), visar instrumentet efter 60 sekunder ett informationsmeddelande som uppmanar användaren att stänga laddningsfacket. Om racket sätts i innan laddningsfacket stängs måste du se till att kåpan är stängd och att programmen startar. Om programmet inte startas automatiskt ska laddningsfacket öppnas och stängas igen.

**6.6.2 Övervaka infärgningsprocessen**

Med hjälp av följande menyer kan användaren öppna eller kontrollera övervaka information om program som är i gång:

- Reagensuppställning med stationsinformation (→ "Bild 87").
- Visning av processtatus med beräknade kvarvarande programtider och stegtider (→ Sida 37 – 5.3 Processtatusvisning).
- Statusrad (→ Sida 36 – 5.2 Element på statusskärmen) med datum, tid och symboler gällande informationsmeddelanden och varningar som har visats.

**Obs!**

De 20 senaste aktiva informationsmeddelandena och varningarna kan öppnas genom att man trycker på respektive symbol i statusraden (→ "Bild 16-2") (→ "Bild 16-3"). På så vis kan användaren hålla sig informerad om aktuella situationer när han eller hon har varit borta från instrumentet, och vidta nödvändiga åtgärder vid behov.

**6.6.3 Infärgningsprocess slutförd**

- När ett rack har gått igenom infärgningsprocessen transporteras det till utmatningsfacket (→ "Bild 19-4") och placeras i en ledig position (→ "Bild 89"). Användaren informeras om detta via ett informationsmeddelande och en ljudsignal.

**Bild 89**

- För att avlägsna racket från utmatningsstationen trycker du på knappen på utmatningsfacket (→ "Bild 19-4") för att öppna det och ta bort racket.
- Tryck sedan på knappen igen för att stänga utmatningsfacket.

**Varning**

- Tillgängligheten för och valt antal olika utmatningsstationer är inte synliga för användaren i processtatusvisningen. Det rekommenderas att använda reagensuppställningsmenyn för processövervakning (→ "Bild 87") när olika reagenser används i utmatningsstationerna, för att man ska kunna reagera i tid när utmatningskapaciteten nås.
- Om färdiga rack inte avlägsnas från utmatningsstationerna i tid kan detta leda till störningar i infärgningsprocessen och kan påverka infärgningsresultaten.
- Sträck dig inte in i utmatningsfackets rörelseområde. Då kan du skada dig.
- Utmatningsfacket måste öppnas och racken avlägsnas senast när varningsmeddelandet om att utmatningsstationen är helt full visas (→ "Bild 90"). Om du inte tar hänsyn till varningsmeddelandet kan det resultera i att det inte går att transportera fler rack till utmatningsstationerna. Avvikande stegtider och fördröjningar i infärgningsprocessen kan leda till förändrade infärgningsresultat som kan vara svåra eller omöjliga att analysera.



Bild 90

- Om utmatningsfacket är öppet i mer än 60 sekunder informerar ett informationsmeddelande (→ "Bild 91") användaren om detta.



Bild 91

**Obs!**

Varningsmeddelandet uppmanar användaren att stänga utmatningsfacket för att undvika eventuella fördröjningar. När utmatningsfacket är öppet kan instrumentet inte placera färdiga rack i utmatningsstationerna. Avvikande stegtider och fördröjningar i infärgningsprocessen kan leda till förändrade infärgningsresultat som kan vara svåra eller omöjliga att analysera.

- Tryck på knappen på utmatningsfacket för att stänga det.



## 6.6.4 Avbryta infärgningsprogrammet

**Obs!**

- Infärgningsprogram kan endast avslutas via **processtatusvisningen**.
- Ett program som redan befinner sig i räknarstationen för objektglas (→ "Bild 3-2") kan inte avbrytas.

1. För att avbryta ett infärgningsprogram markerar du motsvarande rack i **processtatusvisningen** (→ "Bild 17-3") genom att trycka lätt på det.
2. En lista med programsteg (→ "Bild 92") visas; det aktuella steget är rödmarkerat (→ "Bild 92-1").



Bild 92

3. Fönstrets ram visar färgen som har tilldelats programmet, programnamnet samt förkortningen som har lagts in.
4. Tryck på knappen **Avbryta program** (→ "Bild 92-2").
5. I det efterföljande informationsmeddelandet (→ "Bild 93") bekräftar du att programmet ska avslutas med **Ja** eller återgår till processtatusvisningen med **Nej**.

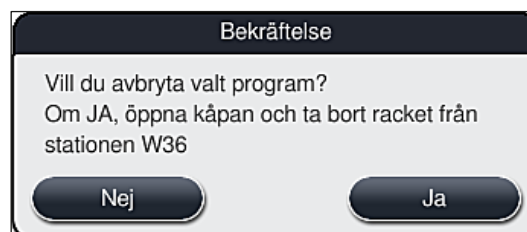


Bild 93

**Obs!**

Informationen i meddelandet (→ "Bild 93") måste följas.

6. Reagensuppställningen visas när du trycker på **Ja**. Rackets position i instrumentet är markerad med orange (→ "Bild 94-1").
7. Öppna instrumentets kåpa och ta bort racket från den markerade stationen.



### Varning

Om den markerade stationen är en ugnstation kan den vänstra överföringsarmen (→ "Bild 3-1") behöva flyttas till mitten av instrumentet.

Vidrör inte sensorn/antennen och använd inte detta område för att förflytta överföringsarmen/armarna (→ "Bild 117-6")! Använd i stället griparens metalldel (→ "Bild 117-1") och lyft den manuellt. Förflytta sedan överföringsarmen/armarna till önskad position.

Dra sedan den öppna kåpan framåt och ta bort racket.

- Bekräfta att racket har tagits bort genom att trycka på den markerade stationen (→ "Bild 94-1") och stäng sedan kåpan igen.

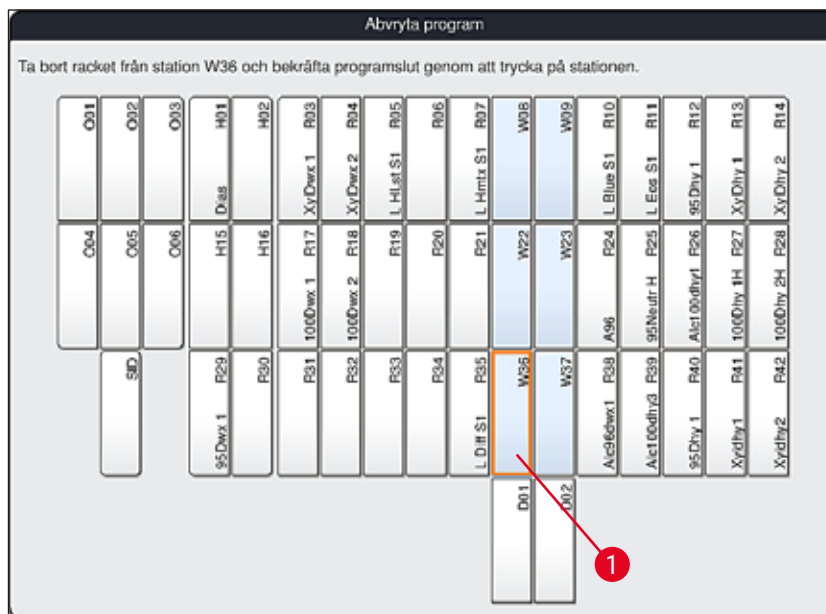


Bild 94



### Varning

- Var snabb när du tar bort racket och se till att kåpan endast är öppen en kort stund. Av säkerhetsskäl avbryts alla rörelser när kåpan öppnas och startar inte igen förrän den stängs. Att öppna kåpan under en pågående infärgningsprocess kan medföra avvikande stegtider, fördröjningar och förändrade infärgningsresultat.
- Sträck dig inte in i ugnsluckans rörelseområde (ugns svängradie).



### Obs!

Återstående infärgningsprogram fortsätter efter ett programavbrott.

### 6.6.5 Användning som arbetsstation

HistoCore SPECTRA ST kan användas som en arbetsstation tillsammans med en HistoCore SPECTRA CV automatisk täckglasapplikator. Detta möjliggör ett arbetsflöde utan avbrott, från infärgningsprocessen till avlägsnandet av de färdiga objektglasen med täckglas.

En överföringsstation finns som tillval för detta ändamål (→ Sida 155 – 9.1 Valbara komponenter till instrumentet).



#### Obs!

- Överföringsstationen (tillval) och anslutningen av en HistoCore SPECTRA CV till HistoCore SPECTRA ST kan endast installeras i efterhand av en servicetekniker certifierad av Leica.
- Alla program måste programmeras med en slutlig målstation. I arbetsstationsläge ska överföringsstationen väljas som sista steg.
- När du lägger in ett rack med ett vitt handtag öppnas ett programvalsfönster där ett färgprogram som är aktiverat i reagensuppställningen måste tilldelas till det vita handtaget (endast för detta program).
- Om överföringsstationen är definierad som den sista stationen i det tilldelade programmet måste det vita racket också tilldelas en lämplig parameteruppsättning för täckglasappliceringen i HistoCore SPECTRA CV. Användaren uppmanas att göra så i ett parametervalsfönster.

**Varning**

Användaren måste följa nedanstående punkter om instrumentet används som arbetsstation!

- Minst två utmatningsstationer i HistoCore SPECTRA ST måste vara tilldelade till och fyllda med samma kompatibla reagens (**UNL Xylene**) som laddningsstation(er) i HistoCore SPECTRA CV.
- Det är helt nödvändigt att fylla utmatningsstationerna i HistoCore SPECTRA ST och laddningsstationerna i HistoCore SPECTRA CV med samma reagens, eftersom racken överförs till utmatningsstationen efter infärgningsprocessen om HistoCore SPECTRA CV inte är tillgänglig. Denna situation kan uppstå om reagenskyvetterna i laddningsfacket i HistoCore SPECTRA CV redan är fyllda med rack, om förbrukningsartiklar inte har fyllts på i tid eller på grund av instrumentfel.
- Om HistoCore SPECTRA CV temporärt inte kan ta emot några fler rack från HistoCore SPECTRA ST på grund av att laddningsfacket i HistoCore SPECTRA CV är fullt, transporteras racken till utmatningsfacket i HistoCore SPECTRA ST.
- Om det föreligger ett instrumentfel för överföringsstationen i HistoCore SPECTRA ST eller om laddningsfacket i HistoCore SPECTRA CV inte är helt stängt, transporteras racken till utmatningsfacket i HistoCore SPECTRA ST.
- Om det föreligger ett kvarstående fel för överföringsstationen ska man försöka göra en ominitialisering efter att infärgningsprocessen har avslutats. Kontakta Leicas tekniska service om detta inte fungerar.
- Rack för 5 objektglas och 20 objektglas kan inte överföras till HistoCore SPECTRA CV. Dessa rack placeras alltid i utmatningsfacket i slutet av infärgningsprocessen, oavsett om överföringsstationen har angetts som sista station i infärgningsprogrammet eller inte.
- Om ett vitt rackhandtag används måste färgen i infärgningsprogrammet väljas när racket förs in i laddningsfacket. Därefter öppnas ett andra fönster där en parameteruppsättning måste väljas för HistoCore SPECTRA CV. Färgen i parameteruppsättningen i HistoCore SPECTRA CV behöver inte överensstämma med färgen i det valda infärgningsprogrammet. Om HistoCore SPECTRA CV-parameteruppsättningen inte tilldelas transporteras racket till utmatningsfacket i HistoCore SPECTRA ST efter infärgningen. Ett meddelande informerar användaren om det.
- Användningen som arbetsstation beskrivs i detalj i bruksanvisningen för HistoCore SPECTRA CV.

**Varning**

Om de angivna stationerna inte har fyllts enligt rekommendationerna kan det leda till skadade preparat med sämre infärgningsresultat och lägre täckglasappliceringskvalitet. Att inte fylla de angivna stationerna kan leda till att preparat förstörs på grund av att de torkar ut.

### 6.6.6 Slutföra den dagliga användningen

När den dagliga infärgningen har slutförts ska instrumentet försättas i **standby**-läge:

1. Kontrollera om det finns rack kvar i följande stationer och avlägsna dem:
  - Laddningsfack (→ "Bild 65-9")
  - Utmatningsfack (→ "Bild 65-6")
  - Ugn (→ "Bild 65-1")
  - Torr överföringsstation (→ "Bild 65-7")
  - Reagenskyvettfält (→ "Bild 65-3"), (→ "Bild 65-4"), (→ "Bild 65-5") och (→ "Bild 65-8")
2. Täck därefter över alla reagenskyvetter med reagenskyvettlocken.
3. Tryck en gång på den gröna **driftströmbrytaren** (→ "Bild 9-2").
4. Instrumentet uppmanar användaren att bekräfta att instrumentet ska stängas av genom att trycka på **driftströmbrytaren** igen.
5. Efter den andra tryckningen på **driftströmbrytaren** sker en kontrollerad avstängning av instrumentet.
6. **Driftströmbrytaren** lyser nu rött och instrumentet befinner sig i **standby**-läge.
7. Stäng avslutningsvis av vattentillförseln.



#### Varning

- Om rengöring eller underhåll ska utföras på instrumentet måste det också stängas av med hjälp av **huvudströmbrytaren** (→ "Bild 9-1").
- För att säkerställa att instrumentets mjukvara fortsatt fungerar bra måste instrumentet startas om minst var 3:e dag. Detta gäller både för HistoCore SPECTRA ST och HistoCore SPECTRA CV som fristående användning samt vid användning som arbetsstation. Detta innebär även att HistoCore SPECTRA CV måste startas om minst var 3:e dag.

## 7. Rengöring och underhåll

### 7.1 Viktig information om rengöring av instrumentet



#### Varning

Allmän information:

- Före all rengöring ska instrumentet stängas av med **driftströmbrytaren** (→ "Bild 9-2") och sedan kopplas från med **huvudströmbrytaren** (→ "Bild 9-1").
- Bär lämpliga skyddskläder (labbrock och handskar) när du rengör instrumentet för att skydda dig mot reagenser och potentiellt smittsamma mikrobiologiska föroreningar.
- Ingen vätska får komma i kontakt med de elektriska anslutningarna, komma in i instrumentet eller i höljet under överföringsarmarna.
- Om överföringsarmen/-armarna måste lyftas och förflyttas får man inte vidröra sensorn/antennen eller använda detta område för att förflytta överföringsarmen/-armarna (→ "Bild 117-6"). Använd i stället griparens metall-del (→ "Bild 117-1") och lyft den manuellt. Förflytta sedan överföringsarmen/-armarna till önskad position.
- Vid hantering av rengöringsmedel ska tillverkarens säkerhetsföreskrifter och de laborieföreskrifter som gäller i användarlandet följas.
- Kassera förbrukade reagenser i enlighet med de riktlinjer för laboratorier som gäller i användarlandet.

För alla ytor på instrumentet gäller:

- Torka genast upp utspillda lösningsmedel (reagenser). Kåpans yta tål inte att utsättas för lösningsmedel under längre tid!
- Använd inget av följande vid rengöring av instrumentets utvändiga ytor: alkohol, rengöringsmedel som innehåller alkohol (t.ex. fönsterputsmedel), rengöringspulver med slipmedel, lösningsmedel som innehåller aceton eller xylene.

### 7.2 Utvändiga ytor, lackerade ytor, instrumentets kåpa

Ytorna kan rengöras med ett mildt och pH-neutralt kommersiellt rengöringsmedel. Efter rengöringen ska ytorna torkas av med en trasa som har fuktats med vatten.



#### Varning

Lackerade instrumentytorna och ytor av plast (t.ex. instrumentets kåpa) får inte rengöras med lösningsmedel såsom aceton, xylene, toluen, xylensubstitut, alkohol, alkoholblandningar eller slipande medel! Ytorna och instrumentets kåpa tål inte att utsättas för lösningsmedel under längre tid.

### 7.3 TFT-pekkskärm

Rengör bildskärmen med en luddfri duk. Lämpliga rengöringsmedel för bildskärmar kan användas om tillverkarens anvisningar följs.

#### 7.4 Insida och avrinningskärl

- Vid rengöring av det invändiga utrymmet och avrinningskärl ska reagenskyvetterna och sköljvattenkyvetterna tas bort.

Använd ett mildt och pH-neutralt kommersiellt rengöringsmedel när du rengör dessa områden.

- När avrinningskärl har rengjorts ska det tvättas noggrant med vatten.

#### 7.5 Överföringsarmar

Rengör överföringsarmarnas ytor (→ "Bild 95-1") genom att torka av dem med en trasa fuktad med vatten eller ett mildt och pH-neutralt rengöringsmedel.



#### Varning

Se till att inga vätskor spills under höljet (→ "Bild 95-2") till överföringsarmarna eftersom det finns ömtåliga komponenter där.

#### 7.6 Räknerstation för objektglas

Kontrollera att fördjupningen och sensorerna (→ "Bild 95-4") till räknarstationen för objektglas är fria från smuts och reagensrester. Om objektglas med skadade kanter används kan små glasskärvor och flisor ha samlats upp här (→ "Bild 95-3"). Därför måste alla föroreningar avlägsnas försiktigt så att skador undviks. Rengör sensorerna med en luddfri trasa om de är täckta med reagensrester.



#### Varning

Bär lämpliga skyddskläder (labbrock och handskar) för att skydda dig mot skärsår.

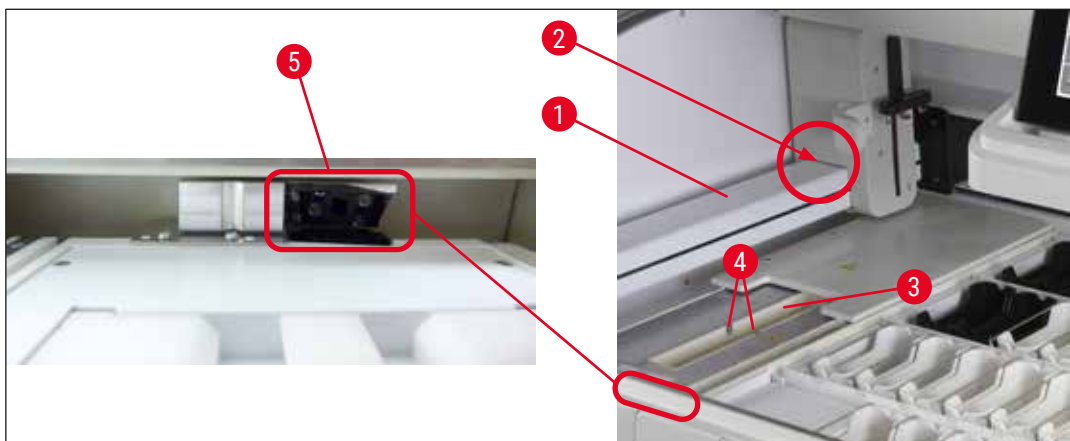


Bild 95

## 7.6.1 Streckkod (tillval)

- » För att rengöra utsidan av avläsningskåpan, använd en liten mängd mildt rengöringsmedel eller isopropylalkohol på en rengöringsduk.



## Varning

- Utför rengöring efter att reagenskvetten i instrumentet täckts över eller tagits bort från instrumentet.
- Applicera inte rengöringsmedlet direkt på avläsarkåpan.
- Försök inte rengöra streckkodsläsaren med hårda eller frätande lösningsmedel, inklusive lut, aceton och acetonliknande lösningsmedel eller rengöringsbensin.
- När du använder tillvalet streckkodsläsare, kan avnötning från objektglasracken samlas i och kring objektglasräknaren (→ "Bild 95"). Därför måste dessa områden kontrolleras noga av användaren vid den dagliga uppstarten av instrumentet och, vid behov, rengöras med en dammsugare. Rengöring med dukar rekommenderas inte för att undvika spridning av partiklar till andra kritiska områden av instrumentet.

Rengöring av avläsarens linsskydd

- » För att rengöra linsskyddets plastfönster (→ "Bild 95-5"), använd en liten mängd isopropylalkohol på en rengöringsduk. Skrapa inte plastfönstret.



## Varning

Häll inte alkoholen direkt på plastfönstret.

## 7.7 Laddnings- och utmatningsfack

- Ta ut reagenskvetterna ur båda facken och förvara dem utanför instrumentet.
- Kontrollera att det inte finns någon reagens kvar i facken. Avlägsna eventuella rester.
- Sätt avslutningsvis tillbaka reagenskvetterna på rätt plats.
- Observera märkningen (→ "Bild 96-1") för stationer i facken.

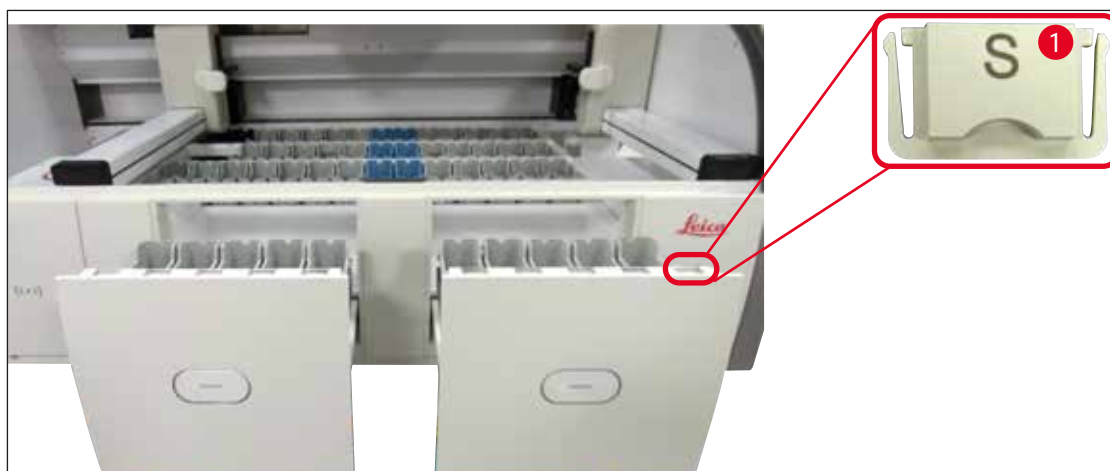


Bild 96



**Obs!**

Använd etiketterna som finns i (→ Sida 20 – 3.1 Standardleverans) för att märka reagenskyvetterna i laddnings- och utmatningsfacken. De präglade bokstäverna har följande innebörd:

- H<sub>2</sub>O = vatten eller destillerat vatten
- A = alkohol
- S = lösningsmedel (engelska: solvent), t.ex. xylene

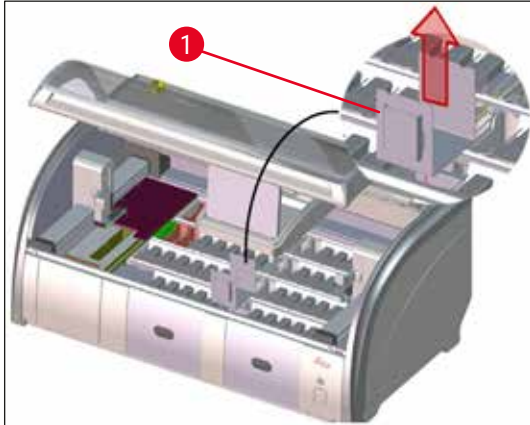
**7.8 Torr överföringsstation**

Bild 97

Reagenser kan droppa ner på den torra överföringsstationens mellanlägg. Dessa rester ska avlägsnas regelbundet.

- För att göra detta avlägsnar du mellanlägget (→ "Bild 97-1") till den torra överföringsstationen genom att dra det uppåt. Kontrollera om det är kontaminerat och rengör det vid behov.
- Sätt därefter tillbaka mellanlägget och se till att det hakar fast korrekt.

**7.9 Överföringsstation (tillval)**

- Kontrollera överföringsstationen (→ "Bild 98") regelbundet för att se om det finns kvarvarande reagenser i den. Rengör den med ett kommersiellt mildt, pH-neutralt rengöringsmedel vid behov.

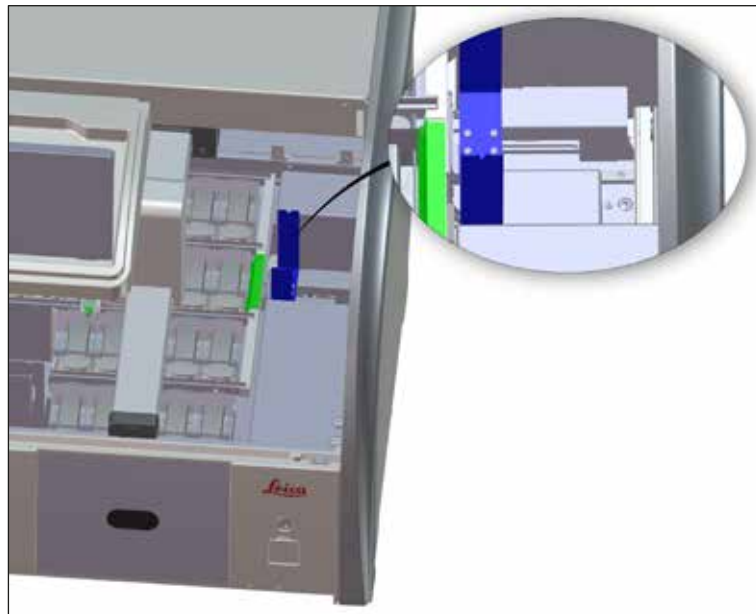


Bild 98

### 7.10 Reagenskyvetter och sköljvattenkyvetter

#### Allmänt

- Lyft ut kyvetterna en och en i handtaget. Se till att handtaget sitter i rätt position (→ Sida 91 – 6.2.1 [Förbereda och hantera reagenskyvetter](#)) för att förhindra att reagensen spills.
- Kassera reagenserna enligt de lokala laboratorieföreskrifterna.
- Reagens- och sköljvattenkyvetter kan rengöras i diskmaskin med en maxtemperatur på 65 °C och ett vanligt, kommersiellt diskmedel för laboratoriediskmaskiner. Handtagen kan sitta kvar på de olika kyvetterna när de rengörs.
- O-ringen (→ "Bild 99-1") måste sitta kvar på sköljvattenkyvetten.



#### Varning

- Rengör aldrig reagenskyvetter av plast eller insatser för särskilda infärgningar vid högre temperaturer än 65°C eftersom det kan leda till att de deformeras.

#### Reagenskyvetter



#### Varning

- För att förhindra skador på beläggningsen på tillbehör med beläggning (rackhandtag för 5 objektglas) får dessa inte rengöras i diskmaskin. Se också till att beläggningsen inte skadas när tillbehören rengörs för hand. Om belagda tillbehör är skadade kan de orsaka kemiska reaktioner med reagenser för särskilda användningsområden (→ Sida 168 – A1. [Bilaga 1 – Godkända reagenser](#)).
- Färgningsreagenskyvetter ska rengöras för hand innan de körs i diskmaskin. Färgrester ska i möjligaste mån avlägsnas så att de övriga reagenskyvetterna i diskmaskinen inte missfärgas.
- Om de rengjorda och fyllda reagenskyvetterna ska sättas tillbaka i instrumentet måste de placeras i rätt position enligt ordningen i reagensuppställningen (→ Sida 78 – 5.9.9 [Skapa reagensuppställningen](#)). Starta instrumentet och initiera instrumentet för att göra detta.

## Skölvattenkyvetter

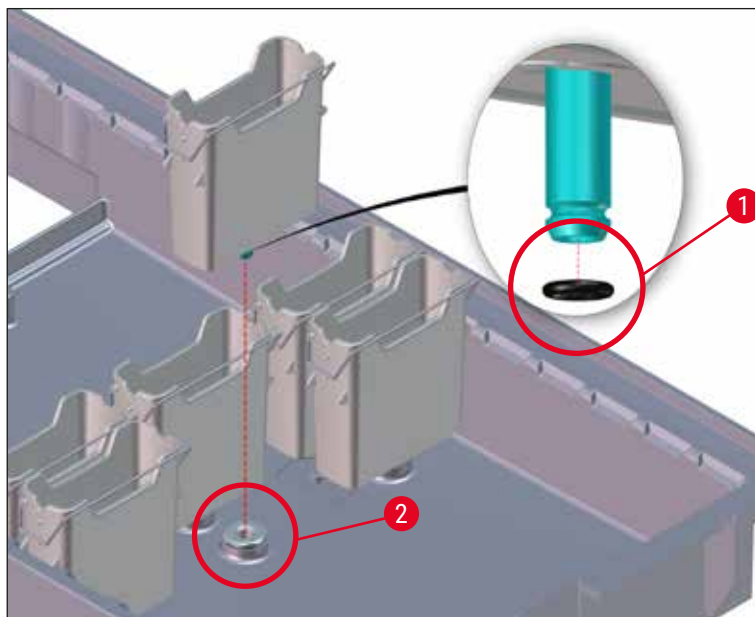


Bild 99



## Varning

- Sätt inte tillbaka skölvattenkyvetter utan O-ring eller med en skadad O-ring! Om en O-ring inte omedelbart kan bytas ut måste den aktuella skölvattenkyvetten avlägsnas från instrumentet.
- Användaren måste då göra en **Skanning av påfyllningsnivå**. Programvaran upptäcker den saknade kyvetten och markerar den som defekt. Om endast 1 eller 2 skölvattenkyvetter påverkas kan program som innehåller ett steg med skölvatten fortfarande startas.
- Om de två främre skölvattenkyvetterna definieras som avjoniserat vatten och en av de två saknas kan det ske fördröjningar i program som innehåller ett steg med avjoniserat vatten. Om båda skölvattenkyvetterna måste avlägsnas kan program som innehåller ett steg med avjoniserat vatten inte startas!
- Byt ut den saknade/defekta O-ringen och smörj med Molykote111. Sätt tillbaka skölvattenkyvetten i enheten och gör en **Skanning av påfyllningsnivå**. Programvaran känner av att skölvattenkyvetterna är redo att användas igen.

**Obs!**

- Sköljvattenkyvetterna ska kontrolleras regelbundet med avseende på kalkavlagringar, synliga mikrobiologiska bakteriebeläggning, svamp, alger samt genomsläplighet. Kalkrester kan avlägsnas med hjälp av en mild ättikslösning. Därefter ska kyvetterna sköljas med rent vatten tills inga rester av rengöringsmedlet finns kvar. O-ringar (→ "Bild 99-1") måste kontrolleras med avseende på skador. Byt ut skadade O-ringar mot nya (→ Sida 155 – 9.2 Valbara tillbehör).
- Efter att du har rengjort sköljvattenkyvetterna och innan du sätter in dem i instrumentet igen måste anslutningsstycket till vattentillförselsystemet kontrolleras så att det sitter rätt på O-ring (→ "Bild 99-1").
- Om det finns O-ringar kvar i instrumentet när en sköljvattenkyvett tas ur (→ "Bild 99-2") ska de avlägsnas försiktigt med en tång och sättas tillbaka på anslutningsstycket.
- Om en O-ring saknas eller sitter fel får sköljvattenkyvetterna inte sättas tillbaka efter rengöringen eftersom det då finns risk för att sköljningen inte fungerar som den ska under infärgningsprocessen.
- När en O-ring har satts fast eller rättats till ska den smörjas med Molykote 111 smörjfett som ingår i (→ Sida 20 – 3.1 Standardleverans).
- Därefter kan sköljvattenkyvetterna sättas tillbaka på sin plats.

**7.11 Rack och handtag**

- Racket ska kontrolleras regelbundet så att det inte finns några infärgningsrester eller andra möjliga föroreningar på det.
- Det färgade handtaget måste avlägsnas från instrumentet när det ska rengöras.
- För att avlägsna infärgningsrester från racken ska de sänkas ner i ett bad med ljummet vatten och ett mildt, pH-neutralt rengöringsmedel för laboratorier. Låt rengöringsmedlet verka. Det är viktigt att noggrant följa tillverkarens anvisningar för rengöringsmedlet samt rekommenderat användningsområde.
- Svåra infärgningsföroreningar kan avlägsnas med en borste.
- Tvätta sedan racken noggrant med rent vatten tills inga rester av infärgning eller rengöringsmedel kvarstår.
- Om det finns kvar rester av monteringsmedel på racken kan de läggas i ett bad med lösningsmedel.

**Varning**

Racken och handtagen får inte ligga kvar i lösningsmedlet för länge (t.ex. flera timmar eller över natten), eftersom det kan leda till deformationer!

Det är viktigt att säkerställa att det lösningsmedel som används är kompatibelt med monteringsmedlet. Xylen- eller toluenbaserade monteringsmedel kan avlägsnas i xylenbad. Xylensubstitutbaserade monteringsmedel kan avlägsnas i bad bestående av motsvarande xylensubstitut.

**Obs!**

Verkningsstiden i badet med lösningsmedel får vara högst en till två timmar. Därefter kan lösningsmedlet tvättas bort med alkohol. Tvätta racken noggrant med vatten och torka dem. Om en extern torkugn används för torkning får temperaturen inte överstiga 70 °C.

### 7.12 Vattenavlopp



#### Varning

Instrumentets inbyggda avloppssystem måste regelbundet rengöras och kontrolleras så att flödet är korrekt. Om denna åtgärd inte har utförts kan det bli stopp i avloppssystemet, vilket kan leda till avbrott eller fel i infärgningsprocessen.

- För att rengöra av avloppssystemet tar du bort de fyra sköljvattenkyvetterna (→ "Bild 65-4") och alla kringliggande reagenskyvetter.
- Resterande reagenskyvetter ska täckas över med lock.
- Ta bort avloppssilen och rengör den vid behov (→ "Bild 100-1").
- För att avlägsna diverse rester (reagenser, bakterier, svamp, alger): Lägg en eller två rengöringstabletter med aktivt syre (t.ex. tandprotesrengöring) i avloppet och lös upp dem med vatten.
- Rengör sedan hela det svängda avloppsområdet inuti instrumentet med en lång, böjbar borste (→ "Bild 100-2").
- Spola ordentligt med vatten för att kontrollera att genomflödet är tillräckligt.
- Sätt i avloppssilen igen och sätt tillbaka kyvetterna i deras ursprungliga, angivna position.

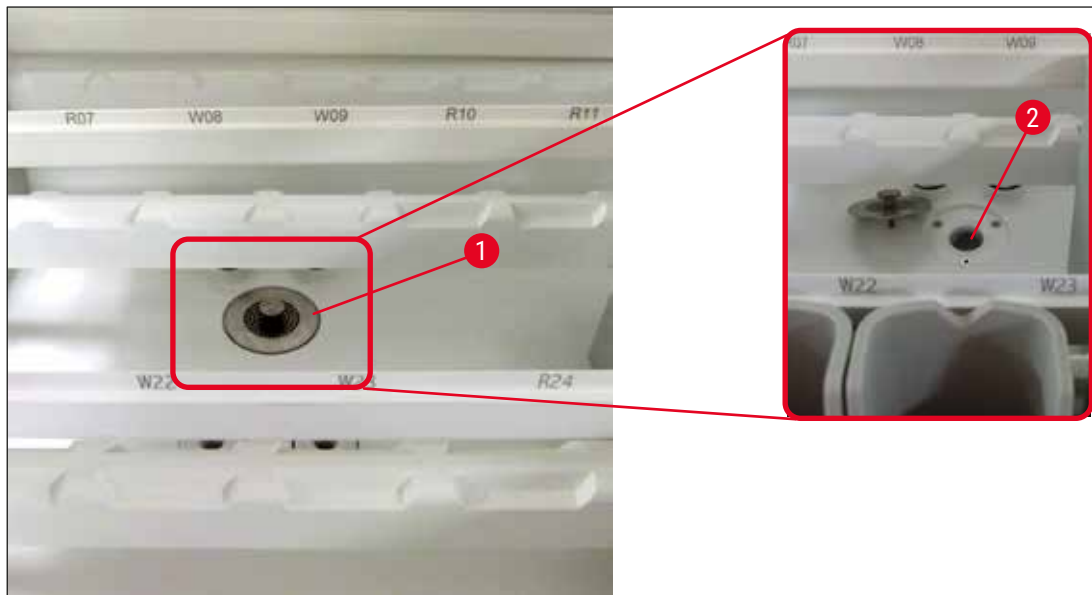


Bild 100

### 7.13 Vattenavloppsslang

Vattenavloppsslangen måste kontrolleras en gång om året av en Leica-auktoriserad servicetekniker.

### 7.14 Byta filterpatronen till vatteninloppsfiltret



#### Varning

Vattenfilterkåpan är inte lösningsmedelsbeständig och kan därför bli skör och gå sönder. Använd ingen form av alkohol eller rengöringsmedel som innehåller alkohol vid rengöring av vattenfilterkåpan (→ "Bild 101-2"). Det kan resultera i att vatten läcker ut okontrollerat och skadar laboratoriet och laboratoriemiljön.

Vatteninloppsfilteret med filterpatron bör kontrolleras och bytas en gång om året av en Leica-auktoriserad servicetekniker.

Det inbyggda vatteninloppsfilteret (→ "Bild 101") skyddar instrumentets invändiga vattenkretskomponenter mot skador som orsakas av avlagringar och mineralbeläggningar.

Vattenfilterets hållbarhet beror på vattenkvaliteten på installationsplatsen. Den maximala livslängden för vattenfilteret är ett år.

Vatteninloppsfilteret ska därför kontrolleras regelbundet genom att man tittar genom filterhuset för att se om det finns synliga föroreningar.

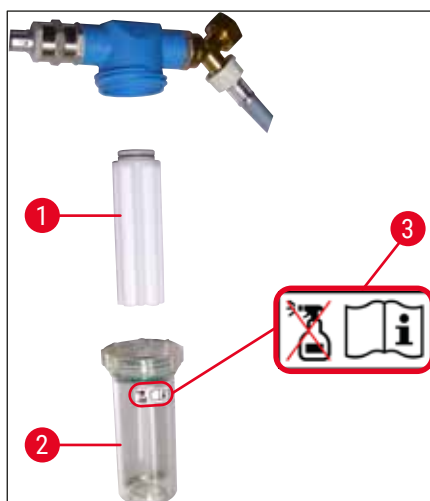


Bild 101

- 1 Filterhus
- 2 Filterpatron, Beställningsnr 14 0512 49332
- 3 Varningsetikett: Använd inte någon form av alkohol vid rengöring och följ instruktionerna i bruksanvisningen



#### Obs!

Om det finns betydande mängder synliga föroreningar i vattenfilteret innan underhållsintervallet (1 år) har passerat måste det bytas ut av en servicetekniker från Leica.

### 7.15 Byta det aktiva kolfiltret

De aktiva kolfiltren (→ "Bild 1-1") som är installerade i instrumentet bidrar till att reducera mängden reagensångor i den luft som släpps ut. Filtrets livslängd kan variera kraftigt beroende på hur ofta instrumentet används och reagenserna. Byt därför det aktiva kolfiltret regelbundet, men som minst var tredje månad, och kassera det på ett korrekt sätt enligt de laboratorieföreskrifter som gäller i användarlandet.

- Filterenheten består av två separata filterelement (→ "Bild 102-1") som användaren kommer åt från instrumentets framsida.

- Du kommer åt dem utan verktyg och avlägsnar dem genom att dra i dragflikarna (→ "Bild 102-2").
- Sätt i de nya filterelementen så att det går att komma åt dragflikarna när de är helt isatta och så att artikelnumret (→ "Bild 102-3") som är tryckt på dem går att läsa.
- Skriv isättningsdatumet för filterelementet på den vita etiketten och fäst etiketten på det aktiva kolfiltrets vänstra eller högra sida (→ "Bild 102-4").
- Båda de aktiva kolfiltren måste skjutas in tills det känns att de ligger an mot instrumentets bakvägg.



Bild 102

**Varning**

Om de sätts i fel kan de aktiva kolfiltren sticka ut i de två överföringsarmarnas rörelseområde och på så sätt hindra eller avbryta infärgningsprocessen.

**7.16 Rengöra ugnarna****Varning**

- Varning för heta ytor: När ugnen har använts i infärgningsprocessen ska instrumentet först stängas av och ugnen svalna i minst 10 minuter innan den rengörs. Vidrör bara ugnsinsetsarna på de anvisade ställena.
- Ugnens insida får inte rengöras med lösningsmedel eftersom det finns risk för att rester av lösningsmedlet tränger in i ugnen och sedan förångas när processen startar.

Kontrollera regelbundet om det finns smuts på plåtinsatserna som samlar upp paraffinrester i ugnen.

- Dra ut det rörliga locket till ugnen för hand (→ "Bild 103-1") i riktning mot instrumentets framsida. Ugnsluckan får då inte vara uppfälld i sidled.
- Vid behov kan den vänstra överföringsarmen försiktigt skjutas åt sidan så att det går att komma åt ugninsatsen utan problem.



### Varning

Om överföringsarmen/-armarna måste lyftas och förflyttas får man inte vidröra sensorn/antennen eller använda detta område för att förflytta överföringsarmen/-armarna (→ "Bild 117-6"). Använd i stället griparens metalldel (→ "Bild 117-1") och lyft den manuellt. Förflytta sedan överföringsarmen/-armarna till önskad position.

- Ta först tag i sidorna på den främre ugninsatsen (→ "Bild 103-2") och lyft den uppåt, ut ur instrumentet. Ta sedan bort den bakre ugninsatsen (→ "Bild 104-2").
- Ta isär de båda ugnskamrarna genom att dra dem uppåt, från varandra.
- Du kan sedan dra ut insatsen som samlar upp paraffinrester ur respektive ugnsinsats (→ "Bild 104-3") och (→ "Bild 104-4").
- Kontrollera om det finns paraffinrester och föroreningar på plåtmellanläggen. För att smälta paraffinet kan mellanläggen läggas i en extern laborieugn.
- När de har värmts upp kan paraffinresterna torkas bort med en luddfri trasa.
- Kontrollera att ventilationsspjällen som sitter i ugnskamrarna fungerar korrekt. Torka försiktigt bort eventuell synlig smuts med en luddfri trasa.
- Skjut tillbaka plåtmellanläggen åt rätt håll (den perforerade sidan uppåt) i respektive ugninsats.
- Efter rengöringen sätter du först tillbaka den bakre ugninsatsen (→ "Bild 104-2") i instrumentet och därefter det främre ugninsatsen (→ "Bild 103-2"). Se till att de hopsatta ugninsatserna sitter korrekt.

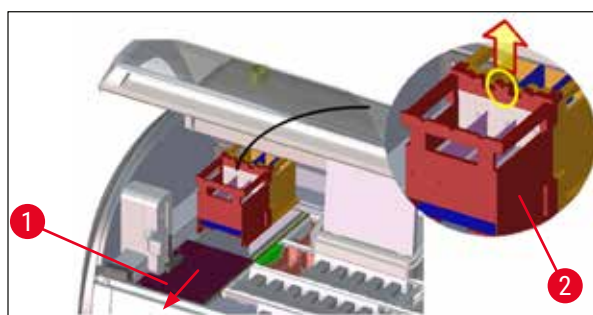


Bild 103



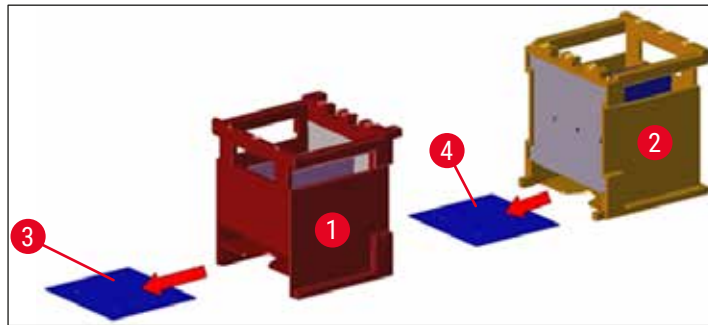


Bild 104

### 7.17 Ugnens luftfilter

Ugnens luftfilter bör kontrolleras regelbundet och rengöras eller bytas ut.

- För att göra detta tar du först bort filterinsatsen (→ "Bild 105-1") och skakar ur den eller ersätter den med en ny filterinsats (→ Sida 155 – 9.2 Valbara tillbehör).
- Efter kontroll och rengöring ska den sättas tillbaka i ugnen på samma sätt.

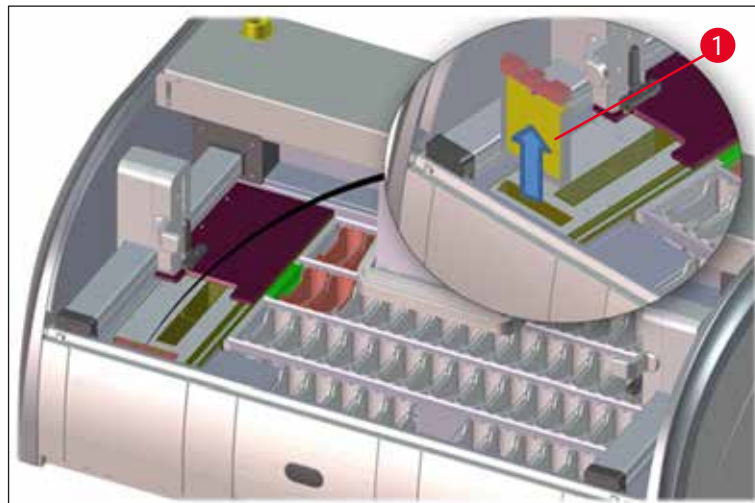


Bild 105



#### Obs!

Monteringen sker i omvänd ordning.

## 7.18 Intervall för underhåll och rengöring

**Varning**

- Följande underhålls- och rengöringsarbeten måste utföras.
- Minst en gång om året ska instrumentet kontrolleras av en Leica-auktoriserad servicetekniker för att en fortsatt funktionsduglighet ska kunna garanteras.

För att säkerställa att instrumentet fungerar felfritt på lång sikt rekommenderas följande:

- Att ett underhållsavtal tecknas efter garantitidens utgång. Mer information om detta finns hos ansvarig serviceorganisation.

## 7.18.1 Dagligt underhåll och rengöring

**Varning**

Om ömtåliga instrumentdelar och -områden blir väldigt smutsiga eller om reagenser spills på dem måste delarna rengöras direkt för att säkerställa ett driftsäkert arbetsflöde.

- |          |   |   |
|----------|---|---|
| <b>1</b> | Kontroll och fyllning/påfyllning av reagenskyvetterna.  | (→ Sida 91 – 6.2.1 Förbereda och hantera reagenskyvetter) |
| <b>2</b> | Täck över reagenskyvetterna och förvara dem övertäckta i kylskåp vid behov.   |   |
| <b>3</b> | Kontrollera om det finns paraffin- eller färgrester och krossat glas i racken och på handtagen.                         | (→ Sida 124 – 7.11 Rack och handtag)                      |
| <b>4</b> | Kontrollera hela räknarstationen för objektglas om det finns reagensrester och smuts och rengör den vid behov.          | (→ Sida 119 – 7.6 Räknarstation för objektglas)           |
| <b>5</b> | Kontrollera om det finns lösningsmedelsrester på ytorna kring laddnings- och utmatningsfacken och rengör dem vid behov. | (→ Sida 120 – 7.7 Laddnings- och utmatningsfack)          |
| <b>6</b> | Kontrollera och rengör den torra överföringsstationens mellanlägg vid behov.  | (→ Sida 121 – 7.8 Torr överföringsstation)                |
| <b>8</b> | Kontrollera om det finns reagensrester i överföringsstationen (tillval) och rengör den vid behov.                       | (→ Sida 121 – 7.9 Överföringsstation (tillval))           |

### 7.18.2 Underhåll och rengöring efter behov

- 1 Rengör bildskärmen med en luddfri trasa. Ett rengöringsmedel för bildskärmar kan användas om tillverkarens anvisningar följs. (→ Sida 118 – 7.3 TFT-pekskärm)
- 2 Rengör utvändiga/målade ytor. (→ Sida 118 – 7.2 Utvändiga ytor, lackerade ytor, instrumentets kåpa)
- 3 Rengör instrumentets kåpa. (→ Sida 118 – 7.2 Utvändiga ytor, lackerade ytor, instrumentets kåpa)
- 4 För att säkerställa att instrumentets mjukvara fortsatt fungerar bra måste instrumentet startas om minst var 3:e dag. (→ Sida 117 – 6.6.6 Slutföra den dagliga användningen)

### 7.18.3 Rengöring och underhåll varje vecka

- 1 Kontrollera sköljvattenkyvetterna och rengör om det finns bakteriella kontamineringar. Kontrollera att O-ringarna är hela och att de sitter på plats. Skadade O-ringar måste bytas ut mot nya. (→ Sida 122 – 7.10 Reagenskyvetter och sköljvattenkyvetter)
- 2 Rengör reagenskyvetterna. (→ Sida 122 – 7.10 Reagenskyvetter och sköljvattenkyvetter)
- 4 Rengör racken och handtagen. (→ Sida 124 – 7.11 Rack och handtag)
- 5 Kontrollera att vattenavloppet och silen inuti instrumentet fungerar och rengör vid behov. (→ Sida 125 – 7.12 Vattenavlopp)
- 6 Kontrollera om det finns smuts på överföringsarmarna och rengör dem vid behov. (→ Sida 119 – 7.5 Överföringsarmar)

### 7.18.4 Rengöring och underhåll varje månad

- 1 Kontrollera vattentilloppsfiltret (visuell kontroll genom filterhuset). (→ Sida 125 – 7.14 Byta filterpatronen till vatteninloppsfiltret)
- 2 Kontrollera, rengör eller byt vid behov ut luftfiltret till torkugnen. (→ Sida 155 – 9.2 Valbara tillbehör)  
(→ Sida 129 – 7.17 Ugnens luftfilter)
- 3 Rengör dräneringstråget. (→ Sida 119 – 7.4 Inside och avrinningskärl)
- 4 Kontrollera om det finns paraffinrester på torkugnsinsatsen och uppsamlingsbrickan. Rengör vid behov. (→ Sida 127 – 7.16 Rengöra ugnarna)

### 7.18.5 Rengöring och underhåll var tredje månad

- 1 Byt det aktiva kolfiltret. (→ Sida 126 – 7.15 Byta det aktiva kolfiltret)

### 7.18.6 Rengöring och underhåll varje år

- 1 Kontroll och underhåll av instrumentet som utförs av en Leica-auktoriserad servicetekniker.

## 8. Fel och felsökning

### 8.1 Åtgärder för fel på instrumentet

#### Fel/avvikelse

Stigande vattennivå i avrinningskärlet med larm.

#### Orsak

Vattenavloppet helt eller delvis blockerat

Avloppssystemet inuti instrumentet och/eller avloppssilen helt eller delvis blockerade.

Minskad tvättning under pågående infärgningsförlopp med möjliga inkonsekventa infärgningsresultat.

Vattentillförseln i sköljvattenkyvetterna reducerad/blockerad.

Möjliga orsaker:

- Sköljvattenkyvetterna sitter inte ordentligt (trasigt kontaktdon till sköljvattenkyvett eller trasig O-ring).
- Kalkavlagringar i sköljvattenkyvetterna.

Sköljvattenkyvetterna töms inte automatiskt under instrumentets driftuppehåll. Stillastående vatten kan utgöra en källa till mikrobiologisk förorening av sköljvattenkyvetterna och proverna.

Det extra avloppshålet längst ner i sköljvattenkyvetterna är blockerat av avlagringar/smuts.

#### Felsökning

Kontroll och underhåll av vattenavloppsslangen (→ "Bild 7-1"). Kontakta ansvarig Leica service för detta.

Kontroll och underhåll av avloppssystemet i instrumentet.

Se rengöringsanvisningarna i avsnittet (→ Sida 130 – 7.18 Intervall för underhåll och rengöring).

Om blockeringen kvarstår stoppas vattenflödet till sköljvattenkyvetterna och infärgningsprocessen avbryts. Därför måste preparaten avlägsnas från instrumentet och placeras på en säker plats eller på en tillfällig förvaringsplats (→ Sida 135 – 8.2 Strömavbrott och fel på instrumentet).

Kontroll och underhåll av sköljvattenkyvetterna.

Se rengöringsanvisningarna (→ Sida 122 – 7.10 Reagenskyvetter och sköljvattenkyvetter). Kontrollera O-ringen och kontaktdonet till sköljvattenkyvett.

Följ regelbundna underhållsintervall.

Kontroll och underhåll av sköljvattenkyvetterna.

Se rengöringsanvisningarna (→ Sida 122 – 7.10 Reagenskyvetter och sköljvattenkyvetter).

Följ regelbundna underhållsintervall.

Fel/avvikelse	Orsak	Felsökning
Otillräcklig sköljning under pågående infärgningsprocesser kan leda till inkonsekventa infärgningsresultat.	Vattentrycket i labbets vattensystem är för lågt eller växlar under dagen.	De angivna minimikraven för vattentryck (→ Sida 21 – 3.2 Specifikationer) måste uppfyllas (även under eventuella avvikelser under dagtid).
Reagenskyvetterna är deformerade.	Användning av otillåtna reagenser (t.ex. fenol i Ziehl-Neelsen-infärgning eller Gram-infärgning osv.).  Felaktigt utförd rengöring.	Kontrollera reagenserna med hjälp av listan över godkända reagenser (→ Sida 168 – A1. Bilaga 1 – Godkända reagenser).  Se rengöringsanvisningarna (→ Sida 122 – 7.10 Reagenskyvetter och sköljvattenkyvetter).
Inkonsekventa infärgningsresultat	Toleransen för ett programsteg för infärgningsreagenser är inte korrekt angiven.	Kontrollera infärgningsprogram och reagenser.  De flesta korta programsteg kräver att infärgningssteget följs exakt. Reagensens tolerans måste ställas in på 0 %.
Avvikande infärgningsresultat	Processklasserna (avlägsnande av paraffin, infärgning osv.) för reagenser har inte tilldelats korrekt. Det här innebär att reagensuppställningen inte har skapats på ett korrekt sätt.  Reagenser som endast ska användas i ett program används av flera program. Reagensen var förorenad eftersom den inte hade programmerats som "Exklusiv".	Kontroll och korrigerings av tilldelade reagensklasser (→ Sida 60 – Skapa en ny reagens eller kopiera en reagens).  Kontroll och korrigerings av programmeringen av berörda reagenser.
Bristfällig infärgningskvalitet	Vattenkvaliteten överensstämmer inte med: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO 3696: 1995 Typ 3/ ASTM D1193-91 Typ IV</li> <li>• Dricksvattenkvalitet, enligt tillämpliga officiella bestämmelser</li> </ul> Olämpligt surt pH-värde i den anslutna vattentillförseln kan påverka infärgningens reaktion och kan leda till avvikande infärgningsresultat.	Testa vattenkvaliteten enligt ISO 3696: 1995 Typ 3/ASTM D1193-91 Typ IV och justera vattenkvaliteten vid behov.  Om problemet kvarstår, kontakta din lokala Leica service och appliceringssupport för att diskutera ytterligare alternativ för installation och protokollanpassning.

Fel/avvikelse	Orsak	Felsökning
Otillräcklig vattenkvalitet påverkar vattenkyvetternas stigningsfunktion (instrumentdelar kan skadas)	Vattenkvaliteten överensstämmer inte med: <ul style="list-style-type: none"> <li>• ISO 3696: 1995 Typ 3/ASTM D1193-91 Typ IV</li> <li>• Dricksvattenkvalitet, enligt tillämpliga officiella bestämmelser</li> </ul>	Testa vattenkvaliteten enligt ISO 3696: 1995 Typ 3/ASTM D1193-91 Typ IV och justera vattenkvaliteten vid behov.  Om problemet kvarstår, kontakta din lokala Leica service och appliceringssupport för att diskutera ytterligare alternativ för installation och protokollanpassning.
Vävnad fäster dåligt på objektglaset efter torkning och flyter iväg under infärgningsprocessen.	Surt pH-värde kan skada instrumentdelar av rostfritt stål	Kontrollera och korrigerar uppvärmningstid och ugnstemperatur för kunddefinierade program.
Trots att infärgningsprocesserna är slutförda går det inte att utföra nya eller ytterligare programmeringar (arbetsledarläge).	Kunddefinierade program: Den valda uppvärmningstiden och/eller ugnstemperaturen är för lågt inställda.  Programmering kan endast slutföras när instrumentet befinner sig i viloläge. Detta innebär att inga rack får vara aktiva, inklusive utmatningsfacken.	Avlägsna racken från utmatningsfacket. Utför därefter programmeringen.
Initieringen av instrumentet kan inte slutföras.	Armarna är blockerade.	Kontrollera att det aktiva kolfiltret sitter korrekt.
Den automatiska skanningen av påfyllningsnivå visar felaktiga resultat.	De handtag som används till reagenskyvetterna sticker ut över reagenskyvetterna och tolkas felaktigt i skanningen av påfyllningsnivån.	Kontrollera att reagenskyvetternas handtag sitter korrekt och korrigerar vid behov.
Den automatiska skanningen av påfyllningsnivå visar felaktiga resultat för laddningsfackets stationer och/eller den torra överföringsstationen. Enstaka stationer rapporteras som "Saknas".	Avlagringar på botten av de tomma reagenskyvetterna och/eller den torra överföringsstationen påverkar mätmetoden för den automatiska skanningen av påfyllningsnivån.	Rengör reagenskyvetterna och/eller den torra överföringsstationen och avlägsna eventuella kalkrester. Upprepa därefter skanningen av påfyllningsnivån ( <a href="#">→ Sida 94 – 6.2.3 Automatisk skanning av påfyllningsnivå</a> ).
Strekkodsläsaren överför inte data till LIS.	Korta strömfel (<1 sek.) stör strekkodsläsaren medan enheten kan överbrygga sådana korta fel via intern/extern USP.	Koppla ifrån alla anslutningar till strekkodsläsaren (strömförsörjning och USB-anslutning) och återanslut den enligt beskrivning i ( <a href="#">→ Sida 94 – 6.2.4 Strekkod (tillval)</a> ).
Räkning av objektglas/strekkodsläsning fungerar inte korrekt och hoppas över, medan rack fortfarande kan integreras i processen.	Lasersensorn för räkning av objektglas är kontaminerad med reagensrester eller defekt.	Rengör sensorområdet med en luddfri duk, fuktad med vatten. Om problemet fortfarande kvarstår, kontakta din lokala Leica service.

**Obs!**

Skärmmeddelanden för vissa fel innehåller bildsekvenser för att vägleda användaren genom felsökningsprocessen (→ "Bild 122").

**8.2 Strömavbrott och fel på instrumentet****Varning**

Vid allvarligt funktionsfel hos enheten kan den reagera som vid ett strömavbrott; följ anvisningarna på displayen för att återuppta arbetet och fortsätta med infärgningen. I sällsynta fall kan det bli nödvändigt att stoppa infärgningsprocessen och ta bort objektglasracken.

**Obs!**

- I händelse av ett kortvarigt strömavbrott (några sekunder) har HistoCore SPECTRA ST en intern UPS (avbrotts säker strömkälla). Användaren informeras om det kortvariga strömavbrottet via ett informationsmeddelande på skärmen. Informationsmeddelandet försvinner så fort strömmen kommer tillbaka. Händelsen läggs till i händelseloggen.
- Att kringgå ett längre strömavbrott är endast möjligt med hjälp av en extern UPS (→ Sida 32 – 4.3.1 Använda en extern avbrottsfri strömkälla (UPS)).

Instrumentet stängs av vid ett längre strömavbrott (> 3 sekunder). Händelsen läggs till i händelseloggen.

Den interna UPS:en säkerställer att överförbara rack placeras i en säker position ovanför två reagensstationer (→ "Bild 106") för att förhindra att dessa av misstag sänks ner i en felaktig reagens.

**Varning**

Reagenser kan hamna fel till följd av att det finns reagenser kvar när ett rack flyttas. Kontrollera om det finns föroreningar i reagenskvetterna och byt ut dem vid behov innan en infärgningsprocess startas (→ Sida 103 – Reagensbyte).



Bild 106

Instrumentet startas om så fort strömmen kommer tillbaka.

Under initieringen skickar instrumentets mjukvara ut en serie meddelanden och instruktioner till användaren, vilket ger hen information om strömavbrottet samt instruktioner om åtgärder.

Användaren kan avbryta eller fortsätta infäringsprocessens mjukvara med hjälp av informationen på skärmen.



#### Varning

Rack som befinner sig i en "kritisk" position måste omedelbart avlägsnas från instrumentet av användaren.

Reagensstationer som räknas som i "kritiska" positioner är de vars överdrivet långa verkningstid kan leda till försämrade infäringskvalitet eller förstörda prover.

#### Kritiska positioner:

- » Stationer för kranvatten (→ "Bild 107-1") och avjoniserat vatten (→ "Bild 107-2")
- ① Kyvetterna kan tömmas och preparaten kan torka ut genom automatisk, kontinuerlig uttömning av vatten i kyvetternas botten. Preparaten måste avlägsnas från instrumentet och förvaras på ett säkert sätt, dvs. infärningen måste slutföras manuellt.
- » Torr överföringsstation (→ "Bild 107-3")
- ① Preparatet är inte placerat i en reagens och kan torka ut. Preparaten måste avlägsnas från instrumentet och förvaras på ett säkert sätt, dvs. infärningen måste slutföras manuellt.



- » Räknarstation för objektglas (SID) (→ "Bild 107-4")
- ① Vid strömavbrott placeras ett rack som är isatt i räknarstationen för objektglas på en säker plats mellan två reagensstationer (→ "Bild 106"). Avlägsna racket enligt beskrivningen i (→ Sida 143 – 8.2.4 Avlägsna ett rack från griparmekanismen) och sätt tillbaka det i laddningsfacket.
- » Ugnstationer: (→ "Bild 107-5")
- ① Temperaturen i ugnstationen kan sjunka under ett långvarigt strömavbrott. Det kan leda till att preparaten inte torkar ordentligt. De berörda racken måste tas bort från ugnen, och ugnslocket (→ "Bild 107-4") måste stängas ordentligt och sedan skjutas till slutligt stängt läge. Endast de rack som tagits bort från ugnen kan sättas tillbaka i laddningsfacket för att starta om det aktuella programmet.
- » Överföringsstation (→ "Bild 107-8")
- ① Preparaten är inte placerade i en reagens och kan torka ut. Preparaten ska avlägsnas från instrumentet och förvaras säkert eller sättas i manuellt och förses med täckglas i laddningsfacket i HistoCore SPECTRA CV.

**Varning**

- Användaren måste kontrollera om det finns ytterligare rack i de kvarvarande reagensstationerna (→ "Bild 107-6") i vilka för långa verkningstider kan leda till dålig infärgningskvalitet beroende på vilka reagenser som används i dessa stationer. Preparaten måste avlägsnas från instrumentet och förvaras på ett säkert sätt, dvs. infärgningen måste slutföras manuellt.
- Om rack har tagits bort från ugnen måste det säkerställas att ugnslocket (→ "Bild 107-4") stängs ordentligt och sedan skjuts till slutligt stängt läge.

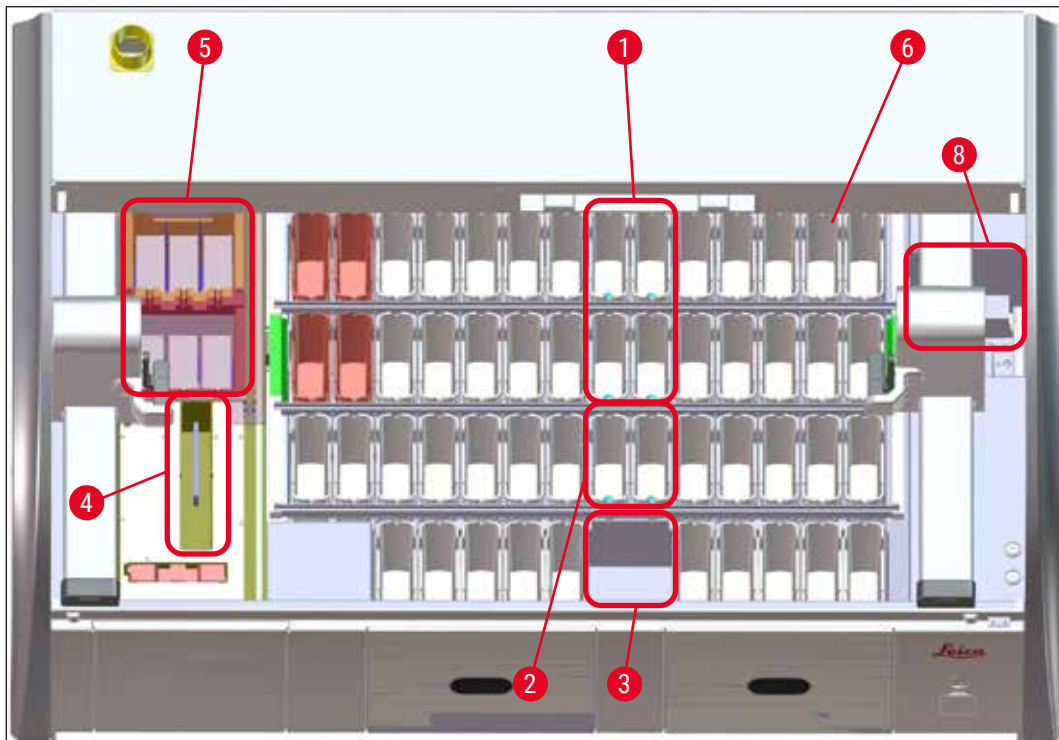


Bild 107

### 8.2.1 Rutin vid strömavbrott

- ① Det första informationsmeddelandet efter det att enheten har startats om informerar operatören om tidpunkten för strömavbrottet (→ "Bild 108"). Bekräfta informationsmeddelandet genom att trycka på **OK** för att få instruktioner för att fortsätta infärgningen.

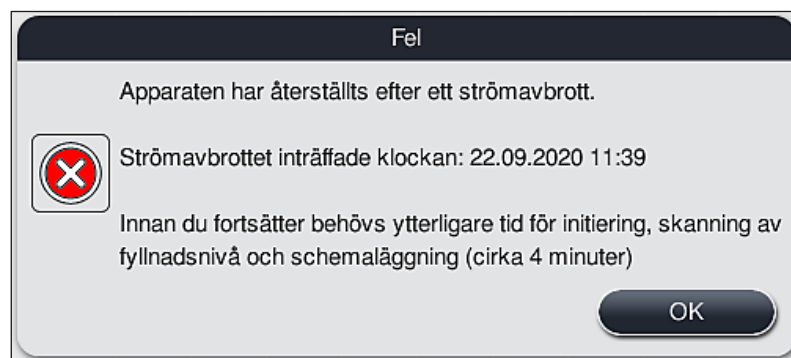


Bild 108

1. Efter det att informationsmeddelandet har bekräftats får användaren information om att infärgningsperioderna kan ha överskridits, dvs. enskilda rack kan ha legat för länge i en reagens vid vissa förhållanden eller i en kritisk station, vilket kan försämma infärgningskvaliteten. Bekräfta informationsmeddelandet (→ "Bild 109") och fortsätt genom att trycka på **OK**.



Bild 109

2. Därefter uppmanas användaren att kontrollera (→ "Bild 110") om instrumentet har placerat ett eller två rack i en säker position mellan två reagenskyvetter (→ "Bild 106").



Bild 110

3. Efter det att användaren har tryckt på knappen **OK** (→ "Bild 110") visas ett annat informationsmeddelande (→ "Bild 111") som informerar om hur respektive rack ska avlägsnas på ett korrekt sätt.

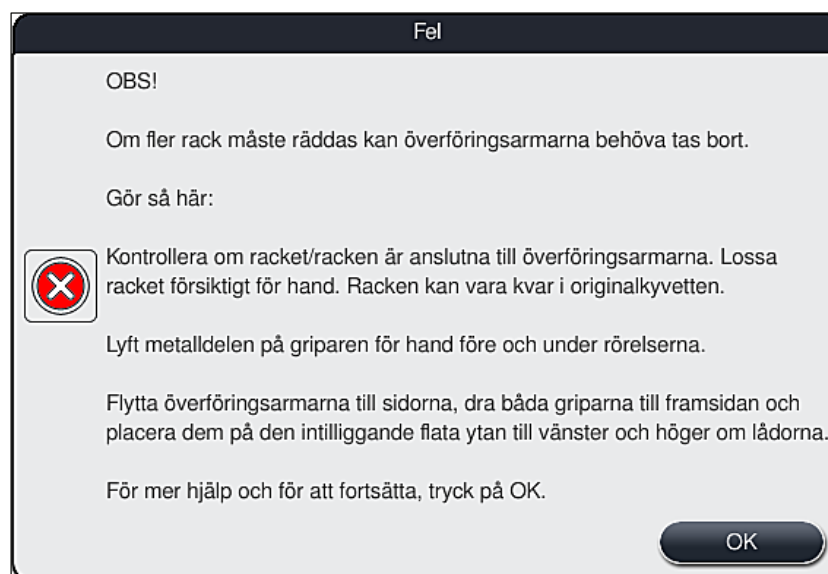


Bild 111

4. Därefter kan användaren välja att återuppta infärgningsprocessen (→ Sida 140 – 8.2.2 Återuppta infärgningsprocessen efter ett strömavbrott) eller avbryta den (→ Sida 141 – 8.2.3 Avbryta alla infärgningsprocesser vid ett strömavbrott) (→ "Bild 112").



Bild 112

### 8.2.2 Återuppta infärgningsprocessen efter ett strömavbrott

1. För att återuppta infärgningsprocessen trycker du på knappen **Ja** (→ "Bild 112-1").



#### Obs!

I följande meny visas racken som är aktiva i översikten av reagensuppställningen (→ "Bild 113").

2. Avlägsna kritiska rack från instrumentet enligt instruktionerna i det tidigare informationsmeddelandet (→ "Bild 112") och bekräfta borttagningen genom att trycka på motsvarande station (→ "Bild 113-1") på skärmen.



#### Obs!

- Vid strömavbrott kan de aktiva racken endast avlägsnas på det sätt som beskrivs här.
- Preparaten från de borttagna racken måste förvaras på ett säkert sätt utanför instrumentet, dvs. infärgningen måste slutföras manuellt.

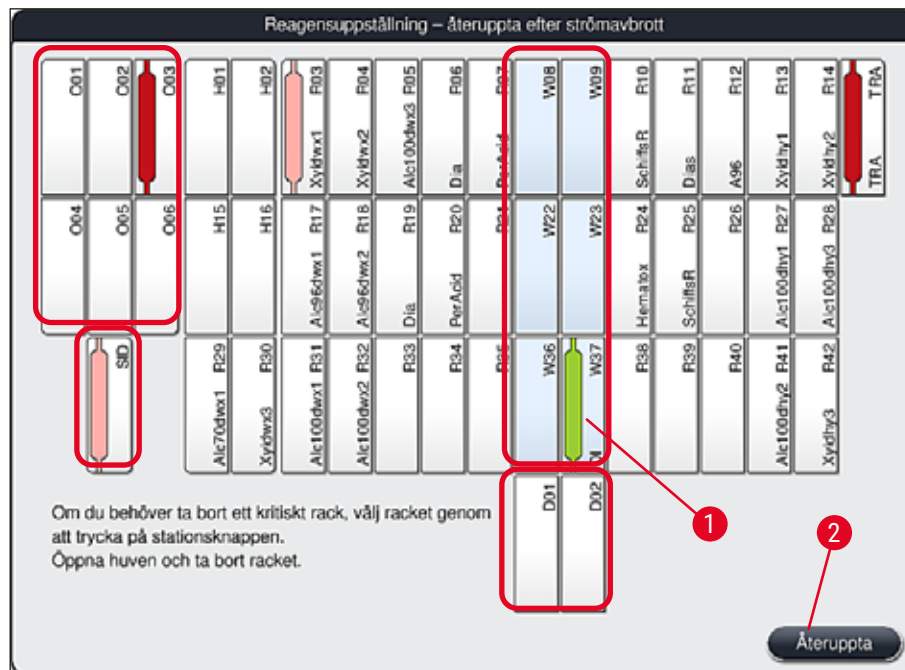


Bild 113

- När alla kritiska rack har avlägsnats trycker du på knappen **Återuppta**. Se det efterföljande informationsmeddelandet och bekräfta genom att trycka på knappen **OK**.
- Instrumentet kommer slutligen att utföra en automatisk skanning av påfyllningsnivån och återupptar infärgningsprocessen för de rack som är kvar i instrumentet.



### Varning

- De kvarvarande racken i laddningsfacket upptäcks inte under vissa omständigheter. Öppna i så fall laddningsfacket och stäng det igen.
- Ett program måste tilldelas till de vita racken igen.
- När det gäller vita rack måste laddningsfacket öppnas och objektglasmarkeringen kontrolleras för att identifiera det program som ska tilldelas igen.

### 8.2.3 Avbryta alla infärgningsprocesser vid ett strömvavbrott

- Om infärgningsprocessen ska avbrytas för alla rack trycker du på knappen **Nej** (→ "Bild 112-2") och bekräftar det efterföljande varningsmeddelandet genom att trycka på **OK** (→ "Bild 114-1") för att börja avlägsna racken.



### Obs!

Du kan ångra avbrottet av infärgningen och återgå till den tidigare urvalsmenyn (→ "Bild 112") genom att trycka på knappen **Avbryt** (→ "Bild 114-2").

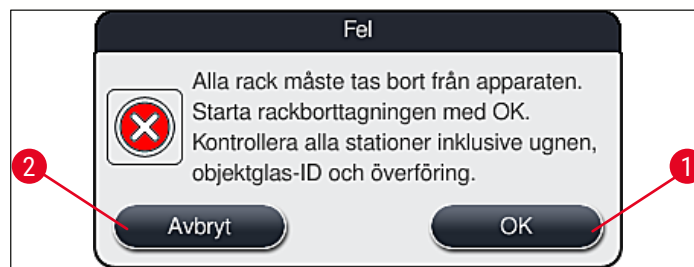


Bild 114

2. Öppna instrumentets kåpa och avlägsna alla rack.
3. Bekräfta borttagningen av rack genom att trycka på motsvarande station (→ "Bild 115-1") på skärmen.

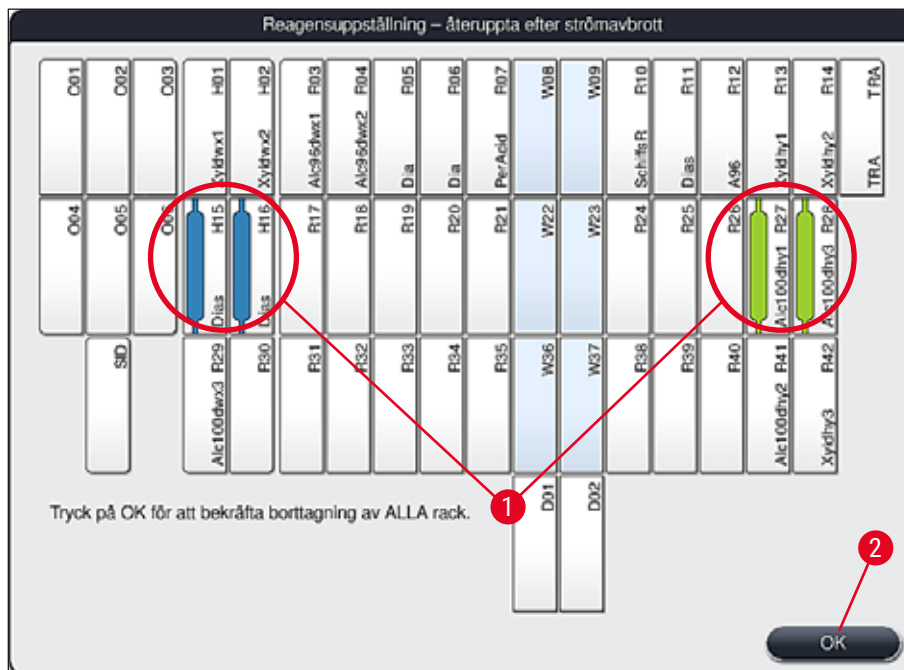


Bild 115

4. Efter att ha tagit bort alla rack trycker du på knappen **OK** (→ "Bild 115-2") för att lämna meny och återgå till instrumentets initiering.



### Varning

- De kvarvarande racken i laddningsfacket upptäcks inte under vissa omständigheter. Öppna i så fall laddningsfacket och stäng det igen.
- Ett program måste tilldelas till de vita racken igen.
- När det gäller vita rack måste laddningsfacket öppnas och objektglasmarkeringen kontrolleras för att identifiera rätt program.

- ✓ Efter det att kritiska rack har avlägsnats från instrumentet fortsätter behandlingen av kvarvarande rack och nya rack kan sättas i laddningsfacket.

### 8.2.4 Avlägsna ett rack från griparmekanismen

- ① Racken är fästa i den nedre delen av griparmekanismen med hjälp av två krokar. Vid strömavbrott måste racken avlägsnas från griparmekanismen för att kunna tas bort från instrumentet.



#### Varning

Om överföringsarmen/-armarna måste lyftas och förflyttas, observera symbolen på fronten (→ "Bild 117-7") och vidrör inte eller förflytta överföringsarmen/-armarna i området för sensorn/antennen (→ "Bild 117-6"). Använd i stället griparens metalldel (→ "Bild 117-1") och lyft den manuellt. Förflytta sedan överföringsarmen/-armarna till önskad position.

1. Ta tag i undersidan av det färgade rackhantaget med en hand (→ "Bild 117-2") och tryck det försiktigt uppåt (→ "Bild 117-3").
2. Skjut racket ca 1 cm mot preparatet (→ "Bild 117-4").
3. Ta tag i griparmekanismen (→ "Bild 117-1") med din lediga hand, skjut det uppåt (→ "Bild 117-5") och håll fast ordentligt.
4. Racket kan nu avlägsnas från instrumentet och läggas åt sidan.
5. Slutligen ska du dra griparmekanismen framåt och försiktigt lägga den på den fria ytan bredvid det vänstra laddningsfacket (→ "Bild 118-3") eller bredvid det högra utmatningsfacket (→ "Bild 118-6").

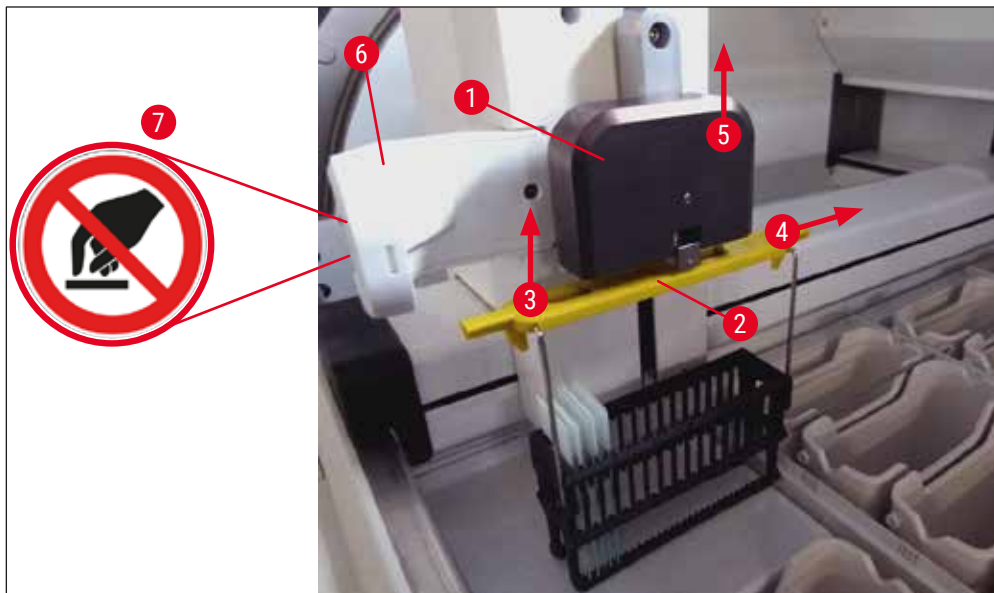


Bild 117

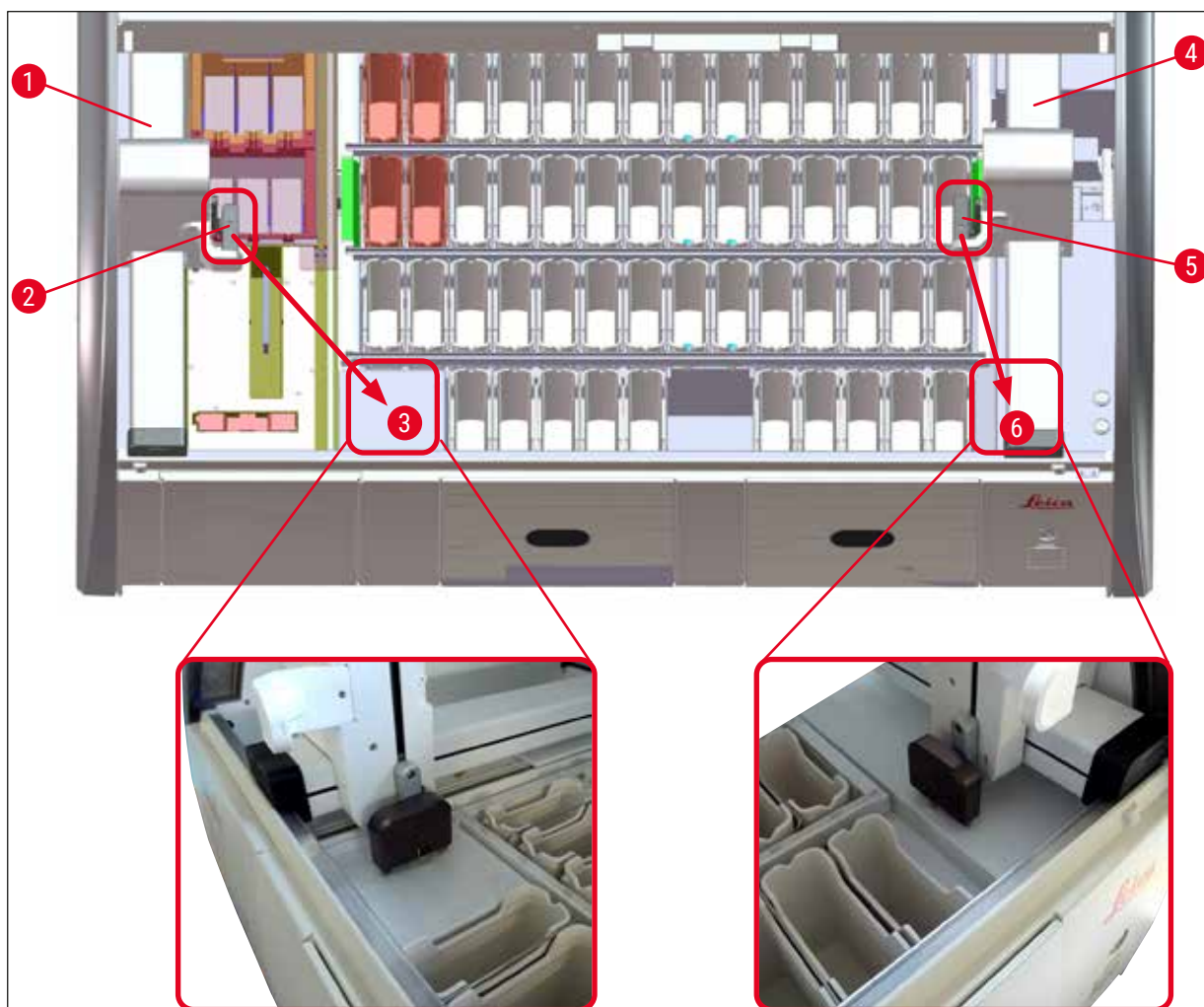


Bild 118



### Varning

När instrumentet har startats om kommer ett felmeddelande att visas, vilket kan användas för att öppna reagensuppställningen (→ "Bild 40") för att få hjälp med att ta bort det specifika racket. Alla aktiva rack måste avlägsnas manuellt från instrumentet av användaren. Kontrollera även räknarstationen för objektglas (→ "Bild 3-2") samt ugnen (→ "Bild 3-10") på racket och byt ut dem vid behov:

Preparaten måste förvaras i en lämplig reagens utanför instrumentet och de påbörjade infärgningsprogrammen måste slutföras manuellt. Användaren är ansvarig för den fortsatta bearbetningen av proverna.

- När strömförsörjningen är återställd kan instrumentet startas på nytt och laddas med nya preparat.



### Obs!

Vid allvarliga funktionsfel som kräver att proverna avlägsnas ur instrumentet på grund av att infärgningsprocessen avbryts ska anvisningarna i strömavbrottsscenarioet följas. Allvarliga instrumentfel indikeras av en särskild larmsignal (→ Sida 47 – 5.7.4 Meny för larm ljud – fel- och signalljud).



### 8.2.5 Borttagning av rack från överföringsstationen

- ① Om funktionsfel uppstår i arbetsstationsläge medan överföringsenheten i HistoCore SPECTRA ST för över rack till HistoCore SPECTRA CV med överföringsstationen, måste användaren se efter var racken är placerade.
1. Öppna kåpan på HistoCore SPECTRA ST.
  2. Se efter om något rack fortfarande syns från överföringsstationen (→ "Bild 119-1").

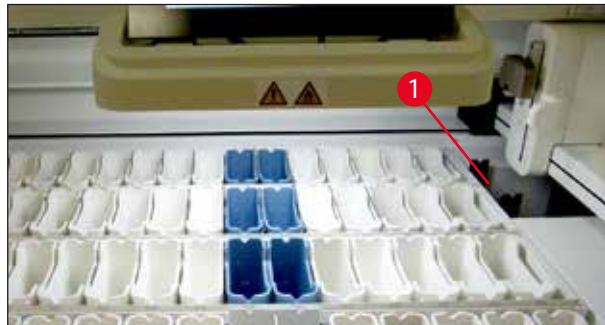


Bild 119

3. Om så är fallet, tryck tillbaka överföringsstationens släde (→ "Bild 120-1") i HistoCore SPECTRA ST manuellt (→ "Bild 120-2") och ta bort racket (→ "Bild 120-3") från hållaren (→ "Bild 120-4").

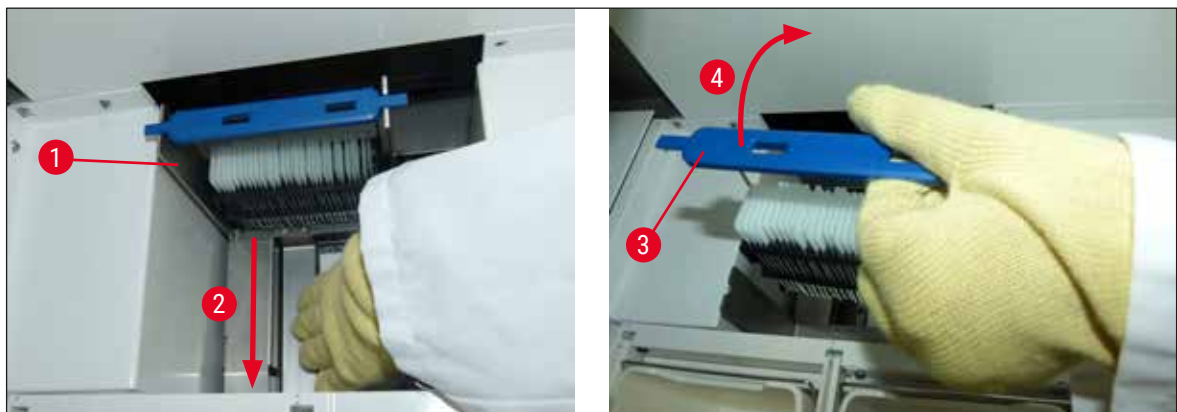


Bild 120

4. Ta därefter bort racket från instrumentet och förvara det på ett säkert sätt.
5. När instrumentets funktionsfel har åtgärdats, för in racket i laddningsfacket på HistoCore SPECTRA CV så att täckglasappliceringen startar.

## 8.3 Byta ut huvudsäkringar



## Varning

Om instrumentet slutar fungera ska det stängas av med hjälp av strömbrytaren och kopplas bort från elnätet. Huvudsäkringarna kan nu kontrolleras.

- Öppna kåpan och skruva loss de två säkringshållarna överst på höger lucka (→ "Bild 121-1") med en spårskruvmejsel och kontrollera att de är hela.



## Varning

Använd en lämplig spårskruvmejsel så att säkringshållaren inte skadas.



## Varning

Se upp om säkringen är trasig! Det kan finnas risk för skador på grund av krossat glas!



Bild 121

- Om en säkring är trasig, avlägsna den från säkringshållaren och sätt i en ny säkring (→ Sida 20 – 3.1 Standardleverans).
- Monteringen sker i omvänd ordning.

#### 8.4 Stopp i vattenavloppet

Ett stopp i vattenavloppssystemet kan orsakas av en blockerad avloppssil (→ "Bild 100-1") eller avloppsslang (→ "Bild 7-1"). Ett sådant stopp kan leda till en stigande vattennivå i avrinningskärlet. Detta kan leda till kritiska vattennivåer i instrumentet. Användaren får ett felmeddelande (→ "Bild 122") på skärmen och en larmsignal utlöses. Felmeddelandet ger användaren vägledning i hur stoppet ska lösas genom steg-för-steg-bilder (→ "Bild 124").



#### Obs!

Detta larm kan indikera en blockering i avloppssystemet eller en smutsig optisk sensor. Då måste användaren även kontrollera den optiska sensorn beträffande smuts som en möjlig orsak till överflödslarmet.



Bild 122



#### Varning

Dålig kvalitet och fördröjd infärgning kan uppstå vid kritiska vattennivåer i instrumentet till följd av ett stopp i vattenavloppssystemet. Pågående infärgningsprogram stoppas tillfälligt. Stoppet ska omedelbart åtgärdas av användaren enligt beskrivningen nedan.

## 8 Fel och felsökning

### Åtgärda ett stopp i vattenavloppssystemet

1. Öppna kåpan.
2. Kontrollera vattenavloppssystemet (→ Sida 125 – 7.12 Vattenavlopp).



#### Obs!

- Om racken är kvar i sköljvattenkyvetterna (→ "Bild 124-1") ska de avlägsnas (→ "Bild 124-2") och förvaras i vatten utanför instrumentet (→ "Bild 124-3").
- Notera det borttagna rackets position för att se till att infärgningen kan återupptas efter att stoppet åtgärdats.
- De närliggande reagenskyvetterna ska täckas över för att skyddas och kan vara kvar i instrumentet.
- Om vattennivån i avrinningskärlet sjunker under kritisk nivå under tiden man försöker lösa problemet försvinner meddelandet (→ "Bild 122") och ett annat meddelande på skärmen meddelar användaren om att infärgningsprocessen nu kan fortsättas.

3. Avlägsna försiktigt sköljvattenkyvetterna (→ "Bild 124-4") och (vid behov) de reagenskyvetter som sitter ovanför avloppssilen (→ Sida 125 – 7.12 Vattenavlopp).



#### Varning

Var försiktig när du avlägsnar sköljvattenkyvetterna. Plocka ur varje sköljvattenkyvett för sig och låt vattnet som är inuti rinna av i avrinningskärlet. Sköljvattenkyvetterna måste tömmas helt för att de ska kunna avlägsnas från instrumentet utan att vatten droppar ner i reagenskyvetterna.

4. Kontrollera om det är stopp i avloppssilen eller den böjda avloppsslangen inuti instrumentet (→ "Bild 124-5") och rengör dem enligt anvisningarna i (→ Sida 125 – 7.12 Vattenavlopp) och (→ Sida 125 – 7.13 Vattenavloppsslang) vid behov.
  5. Sätt tillbaka de borttagna sköljvattenkyvetterna (→ "Bild 124-6") och reagenskyvetterna. Sätt tillbaka racken (→ "Bild 124-7") i deras ursprungliga position (→ "Bild 124-8").
  6. Tryck på **OK** (→ "Bild 122-1") för att fortsätta.
- ✓ Om stoppet avlägsnas och vattnet rinner undan meddelar ett annat meddelande på skärmen (→ "Bild 123") att infärgningsprogrammen kan fortsättas. Tryck på **OK** (→ "Bild 123") för att fortsätta.



Bild 123

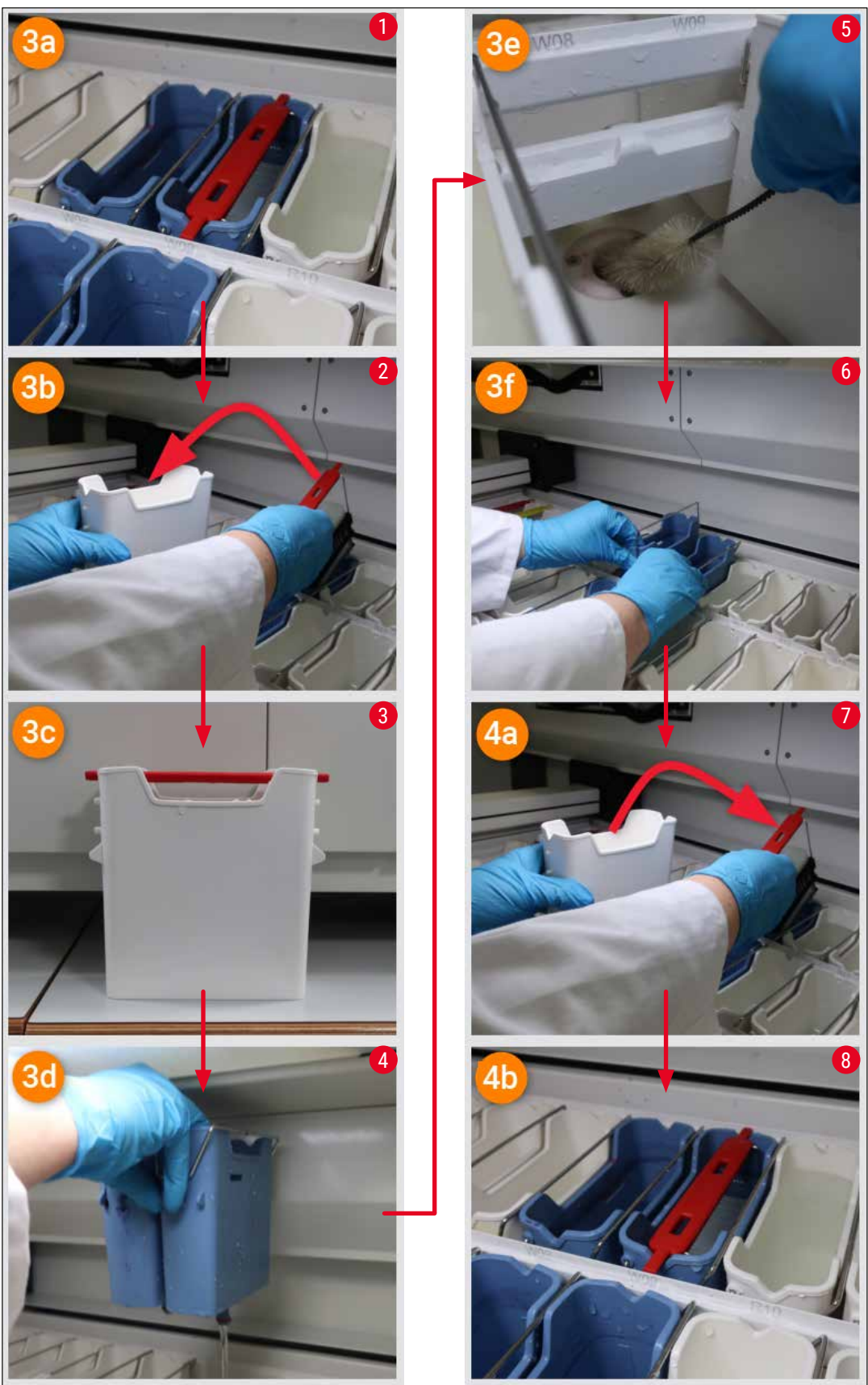


Bild 124

## 8 Fel och felsökning

Stoppet i vattenavloppssystemet har inte avlägsnats, stoppet kvarstår

Om meddelande (→ "Bild 122-1") bekräftas med **OK** men stoppet kvarstår meddelas användaren om detta genom ett nytt meddelande (→ "Bild 125") om att systemet kommer att kontrollera den fortsatt höga vattennivån i kärlet kontinuerligt i ytterligare 5 minuter. Under den här tiden kan användaren utföra fler rengöringsförsök.



### Obs!

Vid behov kan användaren avsluta alla rack som behöver ett vattensteg. Tryck då på **Avbryt** (→ "Bild 125-1") och bekräfta efterföljande meddelande genom att trycka på **Ja** (→ "Bild 125-2") för att inleda processen för kontrollerad avslutning. Tryck på **Nej** (→ "Bild 125-3") för att fortsätta väntetiden.

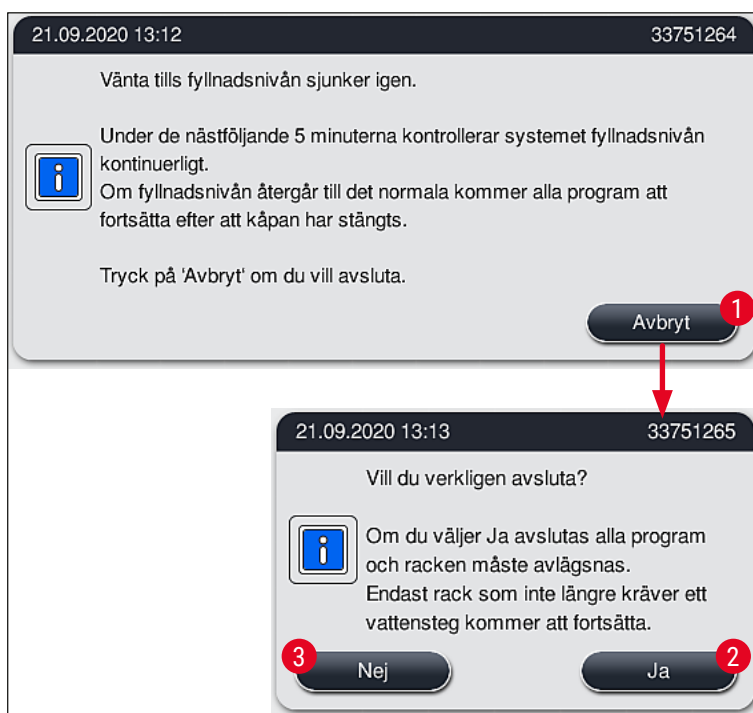


Bild 125

I det här läget finns 3 olika alternativ:

1. Om rengöringen lyckas och stoppet kan avlägsnas kommer vattennivåerna att sjunka under kritisk nivå. Ett meddelande på skärmen (→ "Bild 123") meddelar användaren att infärgningsprogrammen kan fortsättas. Tryck på **OK** (→ "Bild 123") för att fortsätta. Programmens startbarhet visas och programmen i processen kan fortsätta automatiskt.

2. När 5 minuter av ytterligare rengöringsförsök har gått och stoppet fortfarande kvarstår visas ett meddelande (→ "Bild 126") på skärmen om att vattennivån fortfarande är för hög. Genom att trycka på **Nej** (→ "Bild 126-1") kan användaren förlänga väntetiden med ytterligare 5 minuter och utföra fler rengöringsförsök. Om dessa nya rengöringsförsök lyckas kan situationen lösas på samma sätt som beskrivs i 1. Om det krävs ytterligare tid för rengöring, tryck på **Nej** (→ "Bild 126-1") igen. Detta kan upprepas flera gånger. Om stoppet inte kan lösas trots upprepade rengöringsförsök, tryck på **Ja** (→ "Bild 126-2") för att inleda en process för kontrollerad avslutning, se avsnitt 3 och 4 nedan.

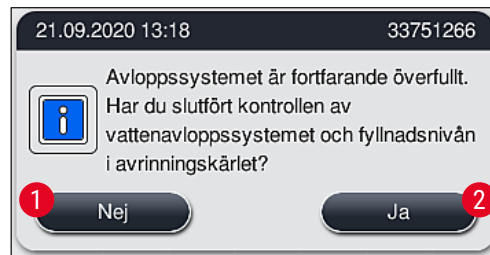


Bild 126

3. Om stoppet inte kan lösas trots upprepade rengöringsförsök avaktiveras vattenstationerna på grund av den kvarliggande kritiska vattennivån. Vattenstationerna visas som defekta på skärmen. För att avsluta ett eller flera program, tryck på antingen (→ "Bild 125-2") eller (→ "Bild 126-2") för att inleda processen för kontrollerad avslutning. Program som inte kräver ett vattensteg fortsätter till slutet av infärgningsprocessen. Eventuella kvarvarande rack som kräver minst ett vattensteg måste avbrytas och avlägsnas från instrumentet. Bekräfta meddelandet nedan (→ "Bild 127") genom att trycka på **OK**.

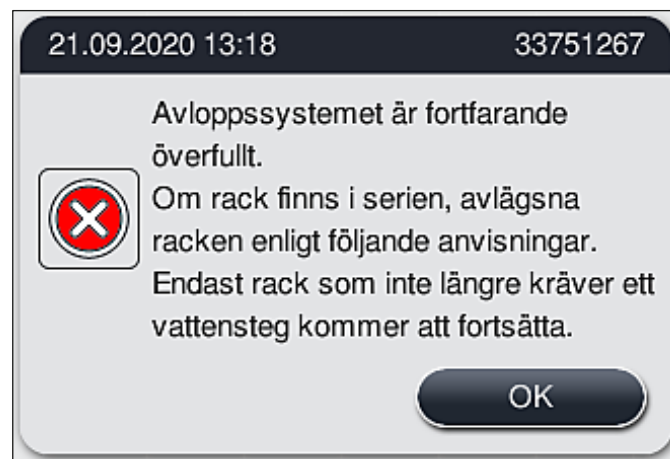


Bild 127

4. För varje rack som ska tas bort visas ett likadant meddelande på skärmen (→ "Bild 128"). Öppna kåpan och ta ut racket ur den station som visas i meddelandet. Bekräfta avlägsnandet med **OK**. Fortsätt tills alla påverkade rack har avlägsnats.



Bild 128

- ✓ När det sista racket har avlägsnats meddelas användaren om vilka program som inte längre kan startas på grund av avaktiverade vattenstationer. Tryck på **OK** (→ "Bild 129-1") för att fortsätta. Vattenstationerna visas som defekta (→ "Bild 129-2") på skärmen.

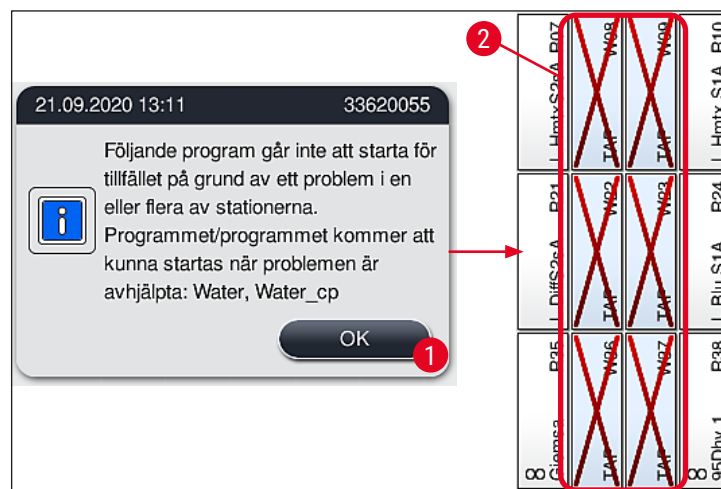


Bild 129

**Varning**

Kontakta Leicas tekniska service om problemet med kvarvarande eller frekventa stopp kvarstår.

**Obs!**

Program som inte innehåller ett vattensteg kan fortfarande startas. Det rekommenderas starkt att kontakta ansvarig Leicas tekniska service.



## 8.5 Fel vid fastsättning, avlägsnande eller transport av rack



### Varning

Om griparen och/eller överföringsarmen inte kan lyfta, placera eller transportera ett rack meddelas användaren om det genom ett varningsmeddelande på skärmen (→ "Bild 130"). Öppna **ALDRIG** kåpan i det här läget, för att undvika att alla pågående rack avslutas. Då måste de avslutade racken avlägsnas från instrumentet omedelbart och infärgningen måste avslutas manuellt!

Om överföringsarmen/-armarna måste lyftas och förflyttas får man inte vidröra sensorn/antennen eller använda detta område för att förflytta överföringsarmen/-armarna (→ "Bild 117-6"). Använd i stället griparens metalldel (→ "Bild 117-1") och lyft den manuellt. Förflytta sedan överföringsarmen/-armarna till önskad position.

1. Meddelandet upplyser om var felet uppstått. Kontrollera platsen genom den stängda kåpan för att se om det föreligger stopp eller hinder.
2. Om man inte kan se några stopp eller hinder, tryck på **OK** (→ "Bild 130-1") för att försöka lyfta, placera eller transportera racket igen.

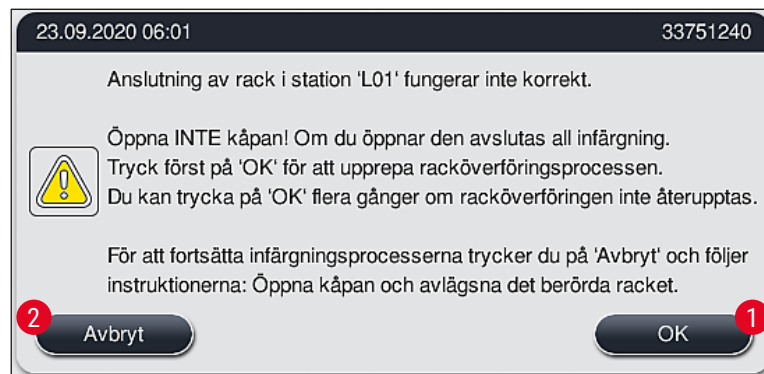


Bild 130



### Obs!

Man kan trycka på knappen **OK** (→ "Bild 130-1") flera gånger om racköverföringen inte fortsätter.

3. Om man upptäcker ett stopp/hinder eller om man har tryckt på **OK** upprepade gånger utan framgång, tryck på **Avbryt** (→ "Bild 130-2") för att avsluta det enskilda racket på ett säkert sett och fortsätta infärgningsprocessen för de kvarvarande racken.
4. **NU** kan man öppna instrumentets kåpa och ta bort racket från instrumentet.
5. Bekräfta genom att trycka på **OK** (→ "Bild 131").



Bild 131

**Obs!**

- Observera att det rack som tagits bort inte kan fortsätta bearbetas! Alla andra pågående rack kommer att slutföras.
- Förvara det avlägsnade racket utanför instrumentet i lämplig reagens. Infärgningen av objektglaset i detta rack måste slutföras manuellt.

## 9. Instrumentets komponenter och specifikationer

### 9.1 Valbara komponenter till instrumentet

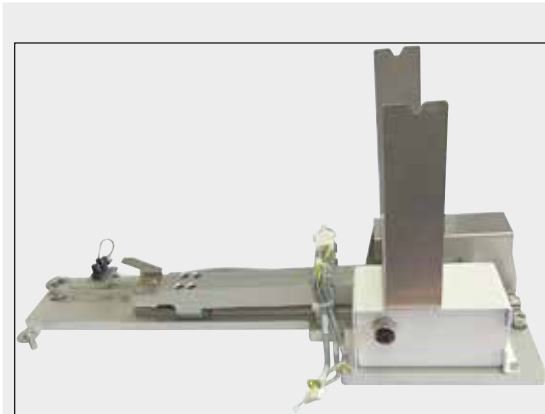


Bild 133

#### HistoCore arbetsstationssats

Till för användning i HistoCore SPECTRA ST för att överföra provet till en ansluten automatisk täckglasapplikator, HistoCore SPECTRA CV. De två instrumenten bildar en arbetsstation efter det att satsen har installerats.

Satsen innehåller överföringsmodulen och alla delar som behövs för integrering i HistoCore SPECTRA ST.

**Beställningsnr:**

**14 0512 54355**

### 9.2 Valbara tillbehör

Beteckning	Beställningsnr
Ventilationsslang, 2 m	14 0512 54365
Sats med aktiva kolfilter (2 st.)	14 0512 53772
Reservfilter till ugnens luftfilter (3 st.)	14 0512 54943
Avloppsvattenslang, 2 m	14 0512 55279
Tilloppsslang	14 0474 32325
Reagenskyvett, komplett, inklusive reagenskyvettlock	14 0512 47086
Sats med kyvettlock, 3 stycken per sats	14 0512 57846
<b>Vattenanslutningssats:</b>	14 0512 49324
2 st. vattentillförselslang, 10 mm, 2,5 m	14 0474 32325
1 st. förlängningsslang 1,5 m	14 0512 49334
1 st. Y-koppling G3/4	14 3000 00351
1 st. dubbelnippel G3/4 G1/2	14 3000 00359
1 st. filterhus	14 0512 49331
1 st. filterpatron	14 0512 49332
1 st. rörkoppling G3/4	14 3000 00360
1 st. blindkåpa G3/4	14 3000 00434
1 st. packningsbricka	14 0512 54772
1 st. skiftnyckel SW30 DIN894	14 0330 54755

Beteckning	Beställningsnr
HistoCore arbetsstationssats	14 0512 54355
Streckkodsläsarens montering	14 0512 61249
<b>OBS!</b> Detta tillbehör är inte tillgängligt i alla regioner/länder. Kontakta din lokala Leica-försäljare.	
Mellanlägg för speciell infärgning	14 0512 60339
Vattenfilterhållare	14 0512 59363
Sköljvattenkyvett, blå, sats	14 0512 47087
Molykote 111 smörjfett, 100 g	14 0336 35460
Sats med etiketter för matnings- och utmatningsfack (10 blanka, 5 st "H2O"=vatten, "A"=alkohol och "S"=lösningsmedel, t.ex. xylen)	14 0512 55161
O-ringar 7x2, för anslutningsstycke till sköljvattenkyvett (12 st. per förpackning)	14 0253 54716
Rack för 30 objektglas* (3 st. per förpackning)	14 0512 52473
Rack för 5 objektglas* (3 st. per förpackning)	14 0512 52475
Handtag till rack för 30 objektglas* (gula, 3 st. per förpackning)	14 0512 52476
Handtag till rack för 30 objektglas* (ljusblå, 3 st. per förpackning)	14 0512 52477
Handtag till rack för 30 objektglas* (mörkblå, 3 st. per förpackning)	14 0512 52478
Handtag till rack för 30 objektglas* (rosa, 3 st. per förpackning)	14 0512 52479
Handtag till rack för 30 objektglas* (röda, 3 st. per förpackning)	14 0512 52480
Handtag till rack för 30 objektglas* (gröna, 3 st. per förpackning)	14 0512 52481
Handtag till rack för 30 objektglas* (svarta, 3 st. per förpackning)	14 0512 52482
Handtag till rack för 30 objektglas* (grå, 3 st. per förpackning)	14 0512 52483
Handtag till rack för 30 objektglas* (vita, 3 st. per förpackning)	14 0512 52484
Handtag till rack för 5 objektglas* (gula, 3 st. per förpackning)	14 0512 52494
Handtag till rack för 5 objektglas* (ljusblå, 3 st. per förpackning)	14 0512 52495
Handtag till rack för 5 objektglas* (gröna, 3 st. per förpackning)	14 0512 52499
Handtag till rack för 5 objektglas* (svarta, 3 st. per förpackning)	14 0512 52500
Handtag till rack för 5 objektglas* (grå, 3 st. per förpackning)	14 0512 52501
Handtag till rack för 5 objektglas* (vita, 3 st. per förpackning)	14 0512 52502

(\* Objektglas)



#### Obs!

- Information om tillgängliga Leica Reagent Kit och godkända Leica-program kan fås på begäran av ansvarig försäljningsavdelning på Leica.
- Dessutom medföljer en bruksanvisning varje Leica Reagent Kit, där källan för import av godkända Leica-program anges.

## Rackhandtag för rack från andra tillverkare



### Obs!

Användning av den här rackadaptorn har kontrollerats en gång i HistoCore SPECTRA ST tillsammans med Sakura-objektglashållare (Sakura 20 objektglaskorg, produktkod 4768) finns från och med oktober 2017.

Eftersom objektglashållarens tillverkare kan ha ändrat hållarens utformning efter det att Leica provat den, rekommenderar vi att kunden testkör hållaren innan adaptorn används för kliniska prov.

Adapterhandtag för Sakura 20-rack (gula, 3 st per förpackning)	14 0512 55661
Adapterhandtag för Sakura 20-rack (ljusblå, 3 st per förpackning)	14 0512 55662
Adapterhandtag för Sakura 20-rack (mörkblå, 3 st per förpackning)	14 0512 55663
Adapterhandtag för Sakura 20-rack (röda, 3 st per förpackning)	14 0512 55665
Adapterhandtag för Sakura 20-rack (ljusgröna, 3 st per förpackning)	14 0512 55666
Adapterhandtag för Sakura 20-rack (vita, 3 st per förpackning)	14 0512 55669

## För speciella applikationer (extra-stora objektglas)

Adapterhandtagen för Sakura rack för 20 objektglas kan användas för den speciella applikationen för infärgning av extra-stora objektglas (specialstorlek 76 mm x 52 mm).

Den speciella applikationen kräver en kombination av följande tillvalda Leica-tillbehör:



### Varning

Extra-stora objektglas av specialstorlek 76 x 52 mm får aldrig sättas in i rack för 30 objektglas för infärgning i HistoCore SPECTRA ST.

Om en streckodsläsare är inbyggd i enheten, ändrar enheten rörelsesekvensen i räknaren för objektglas. Rack med 5 och 30 objektglas guidas över svärdet i räknaren för objektglas och räknas och skannas.

Användningen av extra-stora objektglas (storlek 76 x 52 mm) är endast möjligt vid användning av rack med 20 objektglas tillsammans med tillvalda Leica-tillbehör! Om ett rack med 20 objektglas känns igen av enheten, guidas det inte över svärdet och objektglasen räknas enbart men skannas inte. På grund av att extra-stora objektglas måste sättas in på längden i ett objektglasrack (→ "Bild 134-4"), skulle användningen av ett rack för 30 objektglas resultera i att objektglasen skadas eller förstörs i objektglasräknaren!

Observera att **ALLA** rack för 20 objektglas transporteras till utmatningsfacket när infärgningen har slutförts. Rack för 20 objektglas överförs inte automatiskt till HistoCore SPECTRA CV eftersom täckglasapplicering av rack för 20 objektglas inte är möjlig.

Själva instrumentet kan inte känna igen extra-stora objektglas!

- Adapterhandtag för Sakura 20 rack (→ "Bild 134-1"), tillgängligt i olika färger (→ Sida 157 – Rackhandtag för rack från andra tillverkare).
- Rack 20 objektglas, typ Sakura (→ "Bild 134-2"), plast, ordernummer 14 0474 33463
- Leica Adapter för stora objektglas (→ "Bild 134-3"), ordernummer 14 0456 27069, förpackning med två  
Adapter för individuella extra-stora objektglas, för isättning av upp till 5 objektglas (→ "Bild 134-4") med följande storlek:

Höjd: ungefär 76 mm bredd: mellan 26 mm och 52 mm, objektglasets tjocklek: optimalt 1 mm, max. 1.9 mm



### Obs!

På grund av den speciella orienteringen på längden av de extra-stora objektglasen av Leica Sakura typ rack för 20 objektglas, kan det förekomma minimala avvikelser i överföringen till **RHS** data under räkningen av objektglas. Dessa förbrukningsdata, **objektglas ef. senaste utbyte** (→ "Bild 78"), visas minimalt lägre än vad som faktiskt är fallet. Infärgningsresultaten borde inte påverkas av dessa minimala avvikelser. För speciell infärgning bör användaren ta hänsyn till detta beteende.

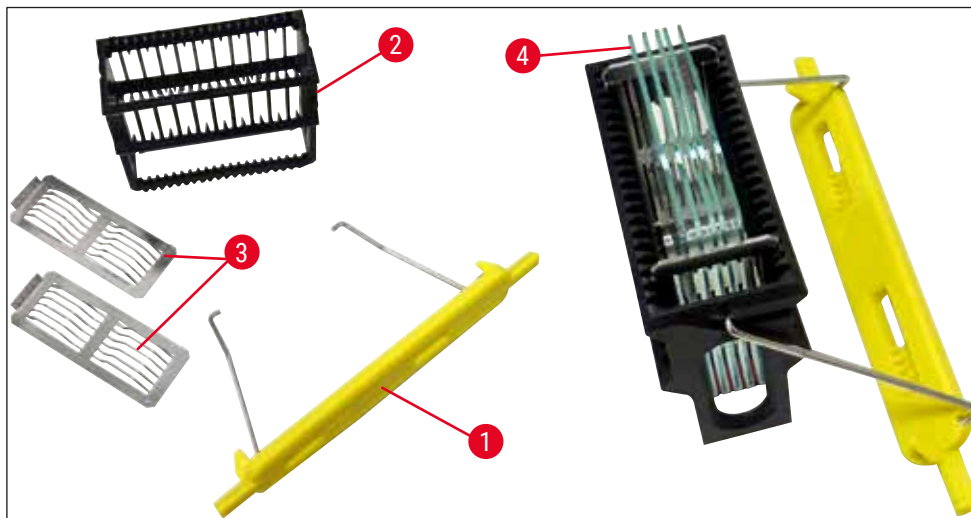


Bild 134



Bild 135

### Avloppsslang

Längd: 2 m

Beställningsnr:

14 0512 55279



Bild 136

**Tilloppsslang för kranvatten**

Längd: 2,50 m sats med 3/4" anslutning för vattenkran, inkl. reservtätning

**Beställningsnr:****14 0474 32325**

Bild 137

**Vattenanslutningssats****Beställningsnr:****14 0512 49324**

Bestående av:

- 2 st. vattentillförselslangar, 10 mm, 2,5 m 14 0474 32325
- Förlängnings slang, 1,5 m 14 0512 49334
- Y-koppling G3/4 14 3000 00351
- 2 st. dubbelnippel G3/4 G1/2 14 3000 00359
- Filterhus 14 0512 49331
- Filterpatron 14 0512 49332
- Rörskoppling G3/4 14 3000 00360
- Blindkåpa G3/4 14 3000 00434
- Packningsbricka 14 0512 54772
- Skiftnyckel SW30 DIN894 14 0330 54755



Bild 138

**Ventilations slang**

Längd: 2 m

**Beställningsnr:** 14 0512 54365

Bild 139

**Aktivt kolfilter**

1 sats bestående av 2 st.

**Beställningsnr:** 14 0512 53772

Bild 140

**Reagenskylvett**

Sats inkl. reagenskylvettlock

**Beställningsnr:** 14 0512 47086



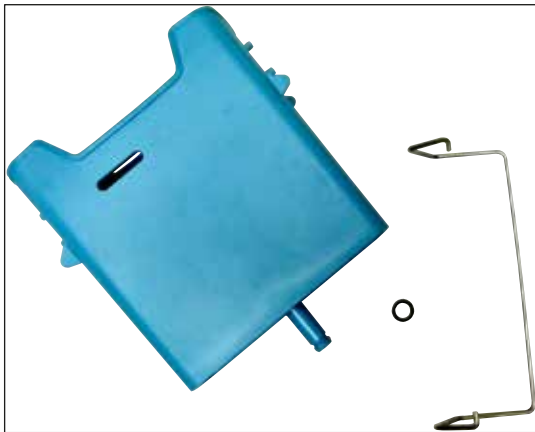


Bild 141

**Skölvattenkyvett**

sats

**Beställningsnr:**

**14 0512 47087**

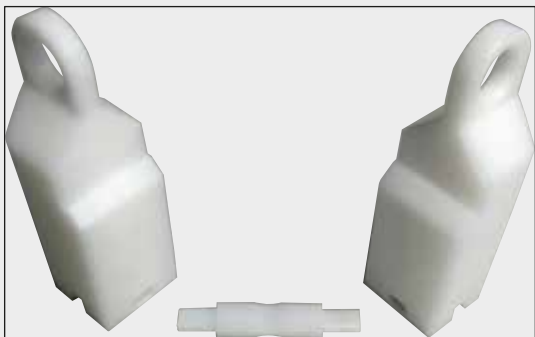


Bild 142

**Mellanlägg för speciell infärgning**

(endast för rack som är till för 5 objektglas)

**Beställningsnr:**

**14 0512 60339**



Bild 143

**Rack**

30 objektglas (3 st. per förpackning)

**Beställningsnr:**

**14 0512 52473**



Bild 144

**Rackhandtag**

30 objektglas (3 st. per förpackning)

**Färg**

- gult
- ljusblå
- mörkblå
- rosa
- rött
- ljusgrönt
- svart
- grått
- vitt

**Beställningsnr.:**

14 0512 52476  
 14 0512 52477  
 14 0512 52478  
 14 0512 52479  
 14 0512 52480  
 14 0512 52481  
 14 0512 52482  
 14 0512 52483  
 14 0512 52484



Bild 145

**Rack**

5 objektglas (3 st. per förpackning)

**Beställningsnr.:****14 0512 52475**

Bild 146

**Rackhandtag**

5 objektglas (3 st. per förpackning)

**Färg**

- gult
- ljusblå
- ljusgrönt
- svart
- grått
- vitt

**Beställningsnr.:**

14 0512 52494  
 14 0512 52495  
 14 0512 52499  
 14 0512 52500  
 14 0512 52501  
 14 0512 52502



Bild 147

**Leica adapter för stora objektglas**

2 st. per förpackning.

Används för infärgning av 5 extra-stora objektglas med storlek 76 x 52 mm, tillsammans med rack för 20 objektglas, typ Sakura och adapterhandtag för Sakura 20-rack (→ [Sida 157 – För speciella applikationer \(extra-stora objektglas\)](#)).

**Beställningsnr:****14 0456 27069**

Bild 148

**Sats med kyvettlock**

Med ett lock kan en hel rad med reagenskyvetter (14 stycken) i kyvettfältet (→ "[Bild 65](#)") täckas.

**Beställningsnr:****14 0512 57846**

Bestående av:

• 3 kyvettlock

14 0512 57847

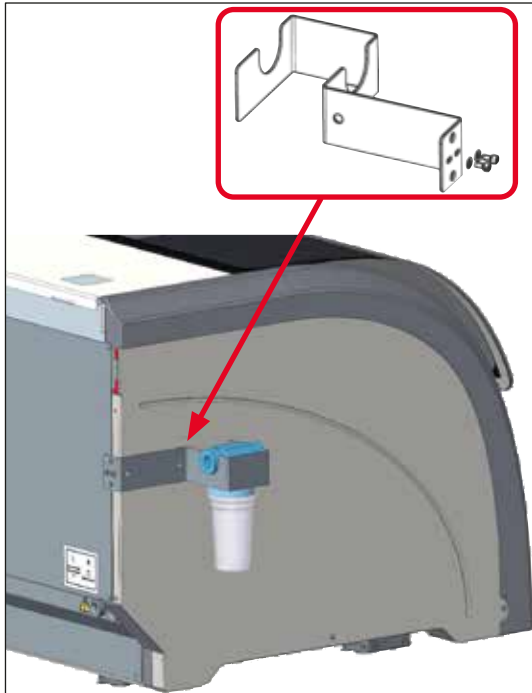


Bild 149

### Vattenfilterhållare

Ska placeras till vänster om HistoCore SPECTRA ST

Vattenfilterhållaren kan användas för att fästa vattenfiltret och för att ge användaren förbättrad åtkomst och sikt.

**Beställningsnr:** 14 0512 59363

Bestående av:

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| • 1 Vattenfilterhållare | 14 0512 59364 |
| • 2 insexskruvar        | 14 2101 03234 |
| • 2 brickor             | 14 2171 02114 |

**Obs! Installationen av vattenfilterhållaren får endast utföras av auktoriserad Leica-personal!**

---

## 10. Garanti och service

### Garanti

Leica Biosystems Nussloch GmbH garanterar att den kontraktsevenliga levererade produkten har genomgått omfattande kvalitetstester baserade på Leicas lokala teststandarder, samt att produkten är felfri och uppfyller samtliga tekniska specifikationer och/eller överenskomna egenskaper.

Garantins omfattning styrs av innehållet i avtalet som har slutits. Endast garantivillkoren från din ansvariga Leica försäljningsavdelning eller den organisation där du har köpt instrumentet gäller.

### Årligt förebyggande underhåll

Leica rekommenderar att man utför förebyggande underhåll varje år. Detta ska utföras av behörig representant från Leicas tekniska service.

### Serviceinformation

Om du behöver teknisk service eller reservdelar ska du vända dig till din Leica-representant eller Leica-återförsäljare där du har köpt instrumentet.

Ange följande information om instrumentet:

- Instrumentets modellbeteckning och serienummer.
- Instrumentets uppställningsplats och namn på en kontaktperson.
- Orsaken till serviceförfrågan.
- Instrumentets leveransdatum.

## 11 Udrifttagning och kassering

### 11. Udrifttagning och kassering



#### Varning

Instrumentet eller dess delar ska kasseras i enlighet med gällande lokala föreskrifter. Alla föremål som har kontaminerats av utspillda reagenser ska genast desinficeras med ett lämpligt desinfektionsmedel för att utesluta spridning till andra delar av laboratoriet eller till laboratoriepersonalen.

Se avsnittet (→ [Sida 118 – 7. Rengöring och underhåll](#)) och avsnittet gällande saneringsbekräftelse (→ [Sida 167 – 12. Saneringsbekräftelse](#)) i slutet av denna bruksanvisning för information om rengöring av infärgaren HistoCore SPECTRA ST.

Instrumentet kan ha kontaminerats vid användning av biologiskt farliga prover. Innan instrumentet tas i drift igen eller kasseras krävs en grundlig desinficering (t.ex. flera rengöringssteg, desinficering eller sterilisering). Följ gällande laboratorieföreskrifter när instrumentet kasseras.

För mer information kan du vända dig till din ansvariga Leica-representant.



Komponenter i ditt instrument som är märkta med en överstruken avfallstunna, t.ex. datorn, bildskärmen osv., omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om hantering av avfall från elektrisk och elektronisk utrustning.

Dessa föremål ska kasseras via samlingsställen i enlighet med lokala föreskrifter. Mer information om kasseringen av instrumentet kan du få av ditt lokala avfallshanteringsföretag eller en medarbetare på din lokala Leica-support.

---

## 12. Saneringsbekräftelse

Varje produkt som ska returneras till Leica Biosystems eller genomgå underhåll på plats måste vara ordentligt rengjord och dekontaminerad. Hitta rätt mall för att bekräfta dekontamineringen genom att använda sökfunktionen på vår webbplats [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com). Denna mall ska alltid användas för att ange alla data som krävs.

Vid produktretur måste en kopia av den ifyllda och undertecknade bekräftelsen bifogas eller skickas vidare till serviceteknikern. Avsändaren har fullt ansvar för produkter som returneras utan denna bekräftelse eller med en ofullständig bekräftelse. Returnerade varor som bedöms vara en potentiell fara för företaget skickas tillbaka på avsändarens bekostnad och risk.

## A1. Bilaga 1 – Godkända reagenser



### Varning

- Användning av reagenser som inte listas här (t.ex. aceton eller fenolhaltiga lösningar), eller reagenser och syror i högre koncentration än vad som beskrivs, kan leda till att prover förstörs eller till att användaren eller instrumentet skadas. Sådan användning av instrumentet sker på egen risk. Inga som helst garantianspråk eller andra krav på ansvar kan göras gällande mot Leica Biosystems eller associerade försäljnings- och serviceorganisationer.
- På grund av risken för brand och explosion får brännbara reagenser och lösningsmedel inte upphettas. Vid hantering av brännbara lösningsmedel och reagenser ska alla antändningskällor hållas borta.



### Obs!

Alla Leica-reagenser för förinställda Leica-program har testats med instrumentet gällande infärgningskvalitet och kompatibilitet med andra material.

Infärgningsmetod eller reagensgrupp	Reagensnamn	Anteckningar
H&E-sats	Leica Infinity	ST Hemalast
		ST Hematoxylin
		ST Differentiator
		ST Bluing
		ST Eosin
	Leica SelecTech	Hemotoxylin 560
		Hemotoxylin 560MX
		Define MX-aq
		Blue Buffer-8 (buffertlösning)
		Alcoholic Eosin Y 515 (alkoholhaltigt eosin)
		Alcoholic Eosin Y 515LT (alkoholhaltigt eosin)
		Eosin Trichrome 515 (trefärgning)
		Eosin Phloxine



Infärgningsmetod eller reagensgrupp	Reagensnamn	Anteckningar	
<b>Andra H&amp;E-reagenser</b>	Leica	Gill II Hematoxylin Gill III Hematoxylin Harris Hematoxylin Mayer's Hemalaun	
	Leica	Alcoholic Eosin (alkoholhaltigt eosin) Aqueous Eosin (1 %) (vattenhaltigt eosin)	
	Leica	Scott's Tap Water Solution (vattenlösning)	
	Leica	Acid Alcohol 0,5 % (syrahaltig alkohol)	
	Leica	Acid Alcohol 1,0 % (syrahaltig alkohol)	
	Användardefinierat	Hydrochloric Acid 2 % (saltsyra)	
<b>PAS</b>	Leica	Periodic Acid 0,5 % (perjodsyra)	
	Användardefinierat	Periodic Acid (up to 10 %) (perjodsyra, upp till 10 %)	
	Leica	Schiff's Reagent (Schiffreagens)	
<b>Diastas-PAS</b>	Leica	Diastase solution (37 °C) (diastaslösning)	
<b>Alcianblå-PAS</b>	Leica	Alcian Blue-Solution (alcianblå lösning)	
<b>Alcianblå</b>	Leica		
<b>Alcianblå och andra infärgningsmetoder</b>	Leica	Nuclear fast Red	
<b>Gömöri trefärgning, blå och grön kollagenfärgning</b>	Leica	Weigert Hematoxylin (A+B Solution) (A+B-lösning) Gömöri Trichrome Blue Stain (Gömöri trefärgning blå) 1 % Acetic Acid (ättiksyra) Light green (ljusgrön)	
<b>Perl's järnfärgning</b>	Leica	Potassium ferrocyanide solution (kaliumferrocyanidlösning) Hydrochloride Acid Solution (saltsyralösning)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Får inte komma i kontakt med metalljoner</li> <li>• Använd endast med belagda rackhandtag från 5-serien</li> </ul>

Infärgningsmetod eller reagensgrupp	Reagensnamn	Anteckningar
<b>Giemsa</b>	Leica	Methanol Solution A (metanollösning)  Stain 1 Solution B (infärgning 1, lösning B)  Stain 2 Solution C (infärgning 2, lösning C)  Buffer Solution D (buffertlösning D)
<b>Kongoröd amyloidinfärgning</b>	Leica	Congo Red Solution (kongoröd lösning)
	Leica	1 % Potassium Hydroxide Solution (kaliumhydroxidlösning)
	Användardefinierat	Saturated Lithium Carbonate Solution (mättad litiumkarbonatlösning)
<b>Alciangul för heliobacter pylori</b>	Leica	Alcian Yellow-Solution (0,25 % Alcian Yellow) (alciangul lösning, 0,25 % alciangul)  5 % Periodic Acid (perjodsyra)  5 % Sodium Metabisulfite (natriummetabisulfit)  6,8 pH Sorensen Buffer (Sörensensbuffert)  Toluidin Blue Solution (toluidinblå lösning)
<b>Elastiskinfärgning/ Verhoeff's van Gieson</b>	Leica	5 % Alcoholic Hematoxylin (alkoholhaltigt hematoxylin)  10 % Ferric Chloride (järntriklorid)  Lugol's Iodin Solution (Lugols jodlösning)  2 % Ferric Chloride (järntriklorid)  Verhoeff's Staining Solution (Verhoeffs infärgningslösning)  Van Gieson's Stain (Van Giesons infärgning)

Infärgningsmetod eller reagensgrupp	Reagensnamn	Anteckningar
<b>Gömöri metenamin silverinfärgning</b>	Leica Modified Chromic Acid (up to 5 %) (modifierad kromlösning, upp till 5 %) Methenamine Borax (metenaminborax) 0,5 % Silver Nitrate (silverniträt)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Får inte komma i kontakt med metalljoner</li> <li>• Använd endast med belagda rackhandtag från 5-serien</li> </ul>
	1 % Sodium Bisulfate (natriumbisulfat) 1 % Gold Chloride (guldklorid) 2 % Sodium Thiosulfate (natriumtiosulfat) Light green (ljusgrön)	
<b>Cellprov (PAP)</b>	Leica EA-50	
	Leica Orange G-6	
	Leica EA-65 (Secondary Counter Stain) (sekundär/motfärgning)	
<b>Schmorls reduktion</b>	Schmorl's Solution (Schmorl's lösning)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Använd endast med belagda rackhandtag från 5-serien</li> </ul>
<b>(Müller) Kolloidalt järn</b>	Colloidal Iron Solution (kolloidal järnlösning) Ferrocyanide-Hydrochloric Acid Solution (ferrocyanid-saltsyralösning)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Använd endast med belagda rackhandtag från 5-serien</li> </ul>
<b>Andra reagenser</b>	Användardefinierat Anilin Blue (anilinblå)	
	Användardefinierat Methylene Blue (metylenblå)	
	Användardefinierat Fast Green (snabbgrön)	
	Användardefinierat Carmin	
	Användardefinierat Southgate or Mayer's Micicarmine (Southgare eller Mayers mucicarmin)	
	Användardefinierat Neutral Red (neutralrött)	
	Användardefinierat Safranin	

# A1 Bilaga 1 – Godkända reagenser

Infärgningsmetod eller reagensgrupp	Reagensnamn	Anteckningar	
<b>Lösningsmedel</b>	Leica/ Användardefinierat	Xylen, toluol	
	Leica	Leica Ultra ST	Xylensubstitut baserat på alifatiska kolväten
	Leica	Leica Clearene	Limonenbaserat xylensubstitut
	Merck	Merck Neo-Clear	Xylensubstitut baserat på alifatiska kolväten
	Carl Roth	Roti®-Histol	Limonenbaserat xylensubstitut
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Clear-Rite 3	Xylensubstitut baserat på alifatiska kolväten
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Citrus Clearing Solvent (klarningslösning citrus)	Limonenbaserat xylensubstitut
<b>Alkohol</b>	Leica/ Användardefinierat	2-Propanol (Isopropanol)	
	Leica/ Användardefinierat	Etanol Metanol	
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Dehydrant (dehydrerare)	Etylalkohol, metylalkohol
	Richard-Allen Scientific/Thermo Scientific	Flex	Isopropyl, alkohol, metylalkohol
<b>Vanliga syror, max. koncentration</b>	Användardefinierat	Ättiksyra (upp till 15 %)	
		Saltsyra (upp till 5 %)	
		Pikrinsyra (upp till 3 %)	



[www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)



Leica Biosystems Nussloch GmbH  
Heidelberger Strasse 17 - 19  
69226 Nussloch  
Tyskland

Tel.: +49 - (0) 6224 - 143 0  
Fax: +49 - (0) 6224 - 143 268  
Webb: [www.LeicaBiosystems.com](http://www.LeicaBiosystems.com)